


beurer

FC 100










RO Pureo Derma Peel Microdermoabraziune
Instrucțiuni de utilizare



CE

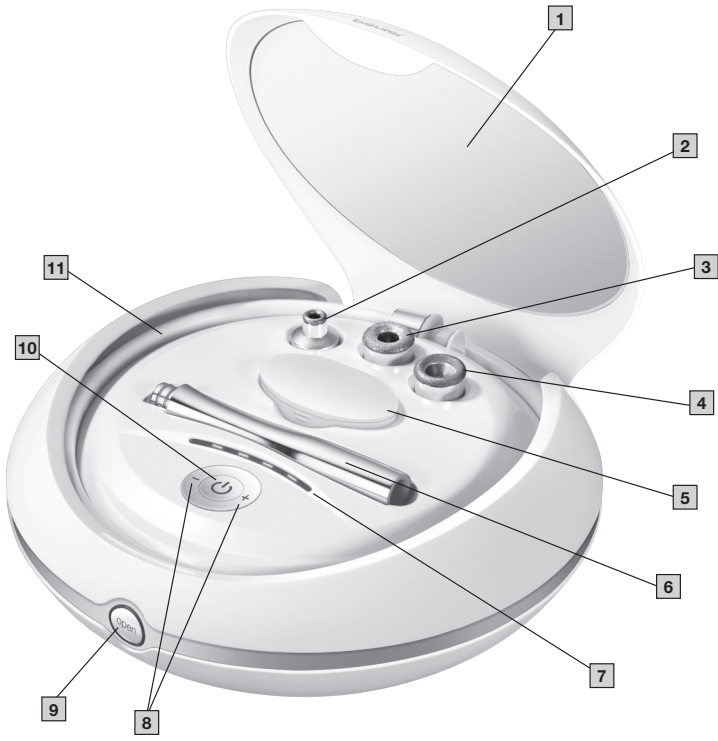

A

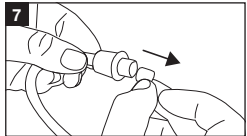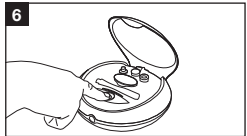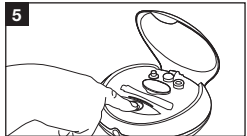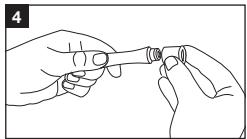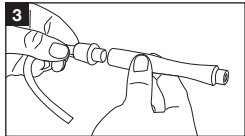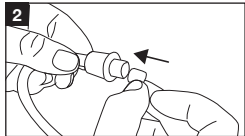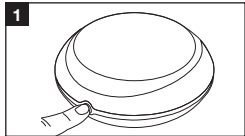

B

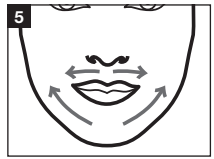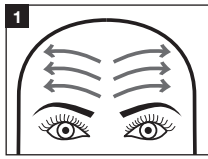



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le și la dispoziție altor utilizatori și respectați indicațiile.

! AVERTIZARE

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în domeniul comercial.
- Acest aparat nu este adecvat pentru persoane sub 18 ani.
- Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie eliminat. Dacă acesta nu este detașabil, aparatul trebuie să fie eliminat.
- Nu sunteți autorizat în niciun caz să demontați sau să reparați aparatul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În cazul nerespectării, pierdeți garanția.

Cuprins

1. Pachet de livrare.....	5	9. Accesorii și piese de schimb.....	9
2. Explicația simbolurilor	5	10. Întrebări frecvente.....	9
3. Utilizarea conform destinației.....	6	11. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?.....	10
4. Indicații de avertizare și de sănătate	6	12. Eliminarea ca deșeu	10
5. Descrierea aparatului.....	7	13. Date tehnice	10
6. Punerea în funcțiune.....	7	14. Garanție / Service.....	10
7. Utilizare.....	8		
8. Curățare și întreținere	9		













1. PACHET DE LIVRARE




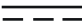




Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ireproșabilă și conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.

- 1 x stație de bază FC 100
- 1 x aparat
- 1 x accesoriu de precizie
- 1 x accesoriu dur
- 1 x accesoriu mare
- 20 x filtre de unică folosință
- 1 x adaptor de rețea
- Aceste instrucțiuni de utilizare

2. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Pe aparat, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a aparatului sunt utilizate următoarele simboluri:

	Avertizare Indicație de avertizare privind pericolurile de accidentare sau riscurile pentru sănătatea dumneavoastră		Producător
	Atenție Indicație de siguranță privind posibile daune la nivelul aparatului/accesoriilor		Informație privind produsul Indicație privind informații importante
	Pericol Nu utilizați aparatul în apropierea apei sau în apă (de exemplu, chiuvetă, duș, cadă) – pericol de electrocutare!		Marcaj de certificare pentru produse exportate în Federația Rusă și în statele din CSI
	Citiți instrucțiunile		Separați componentele ambalajului și eliminați-le conform reglementărilor locale.
	Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare. A = Abrevierea pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton		Separați produsul și componentele ambalajului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.
	marcaj de evaluare a conformității pentru Regatul Unit		Simbolul Importator
	Aparat din clasa de protecție II Aparatul prezintă izolație dublă de protecție și corespunde, prin urmare, clasei de protecție 2		Marcaj CE Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.

	Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice		A se utiliza exclusiv în spații închise
	Unitate de alimentare cu energie electrică, mod comutare; sursă de alimentare în regim de comutație; SMPS		Curent continuu Aparatul este adecvat numai pentru curent continuu
	Transformator de siguranță și izolare, protejat împotriva scurtcircuitelor		Polaritatea unui conector de alimentare c.c.
	Eficiență energetică, nivelul 6		Protejat împotriva corpurilor străine solide cu diametrul de minim 12,5 mm

3. UTILIZAREA CONFORM DESTINAȚIEI

Utilizați aparatul exclusiv pe fața persoanelor adulte (exceptând zona ochilor și a gurii). Nu utilizați aparatul la animale!

Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiunile produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

4. INDICAȚII DE AVERTIZARE ȘI DE SĂNĂTATE

AVERTIZARE

- Pericol de sufocare cu ambalajul! Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor.
- Înainte de utilizare, verificați aparatul și accesoriile pentru identificarea defecțiunilor vizibile. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți.
- Nu apropiați adaptorul de rețea de apă.

PERICOL

Nu utilizați aparatul în apropierea apei sau în apă (de exemplu chiuvetă, duș, cadă) – pericol de electrocutare!

AVERTIZARE

NU utilizați aparatul

- pe piele crăpată.
- pe răni deschise.
- în zona ochilor sau a gurii.
- pe o altă parte a corpului în afară de față (exceptând zona ochilor și a gurii).
- dacă suferiți de afecțiuni ale pielii (de exemplu herpes, afecțiuni vasculare sau tumori ale pielii).
- dacă suferiți de cancer de piele.
- dacă suferiți iritații ale pielii.
- direct după plajă sau dacă prezentați un eritem solar.
- dacă luați medicamente care conțin steroizi.
- dacă luați anticoagulante,
- dacă suferiți de una dintre următoarele boli: scleroză multiplă, diabet sau boli autoimune.

AVERTIZARE

Din acest motiv, utilizați aparatul doar cu cablul de alimentare livrat și la tensiunea de rețea menționată pe acesta.

ATENȚIE

Efectuarea lucrărilor de reparații la echipamentele electrice este permisă numai persoanelor de specialitate. Reparațiile efectuate în mod necorespunzător pot cauza pericole majore pentru utilizator. În cazul defectării sau deteriorării, aparatul trebuie reparat de către o firmă de specialitate autorizată.

AVERTIZARE

- Utilizați aparatul doar în spații interioare uscate (de exemplu, nu-l utilizați niciodată în cadă, la saună).
- Nu băgați niciodată mâna după un aparat căzut în apă. Scoateți imediat adaptorul de rețea din priză.
- Nu expuneți aparatul șocurilor și nu-l lăsați să cadă.
- Nu blocați cablul de alimentare.
- Asigurați-vă că adaptorul de rețea și cablul de alimentare nu intră în contact cu apa, aburii sau alte lichide.

5. DESCRIEREA APARATULUI

Desenele aferente sunt ilustrate la pagina 3.

- | | |
|--|---|
| 1 Oglindă | 2 Accesoriu de precizie cu strat din safir fin, adecvat suprafețelor mici pentru tratamentul precis (de exemplu în zona nasului) |
| 3 Accesoriu mai mare cu strat din safir fin, adecvat pielii sensibile | 4 Accesoriu dur cu strat din safir dur, adecvat zonelor problemă pentru tratamentul intensiv |
| 5 Geantă de depozitare cu filtru de unică folosință | 6 Aparat |
| 7 Afișaj al treptelor de intensitate (Nivel 1-5) | 8 Taste +/- pentru setarea treptei de intensitate |
| 9 Buton de deschidere | 10 Tasta Pornire/Oprire |
| 11 Furtun | |

6. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE



Înainte de utilizare, trebuie să aveți grijă ca pielea feței să fie curată, uscată și să nu prezinte urme de pudră, cremă sau machiaj.

6.1 Efectuarea testului pielii

Cu 24 de ore înainte de utilizare efectuați un test al pielii cu aparatul. În acest scop, testați aparatul la cea mai mică treaptă de intensitate pe locurile mici, discrete ale pielii. În cazul în care după 24 de ore locul testat se înroșește sau dacă aveți dureri, nu mai utilizați aparatul.

AVERTIZARE

- Nu utilizați aparatul mai des de o dată pe săptămână.
- Direct după tratament, pielea tratată a feței poate prezenta o ușoară înroșire și în cazuri rare, ușoare echimoze.
- Înainte cu o zi și după, evitați efectuarea activităților de sudură, sauna, solarul sau expunerea la soare.



În cazul în care pielea nu este sensibilă, puteți utiliza aparatul chiar de 2 ori pe săptămână (cu cel puțin 48 de ore pauză între utilizări).

7. UTILIZARE

7.1 Utilizarea

1. Închideți adaptorul de rețea de la nivelul aparatului și introduceți adaptorul de rețea în priză.
2. Apăsăți **butonul de deschidere** pentru a deschide aparatul. **A1**
3. Așezați filtrul de unică folosință la capătul furtunului. **A2**
4. Conectați capătul furtunului cu aparatul. **A3**
5. Așezați accesoriul dorit pe vârful aparatului. **A4**
6. Pentru a porni aparatul acum, apăsați **tasta Pornire/Oprire**. Afișajul pentru treptele de intensitate începe să lumineze. Vă aflați deja la cea mai mică treaptă de intensitate. **A5**
7. Mai întâi începeți utilizarea la cea mai mică treaptă de intensitate. Așezați aparatul pe pielea feței și mișcați-l pe piele. Aveți grijă să nu treceți de mai multe ori peste o porțiune de piele a feței. Detalii suplimentare despre tratament găsiți în capitolul „Domenii de utilizare”.

Dacă treapta cea mai mică de intensitate este prea slabă, o puteți schimba prin apăsarea **tastelor -/+**.

A6



Presiunea de utilizare trebuie să fie plăcută și nu trebuie să provoace dureri. După utilizare trebuie să se vadă o ușoară înroșire.

8. După finalizarea utilizării, opriți aparatul prin apăsarea **tastei Pornire/Oprire** și scoateți adaptorul de rețea din priză.
9. După fiecare utilizare, înlocuiți filtrul de unică folosință. În acest scop, deconectați aparatul de la furtun. Îndepărtați filtrul de unică folosință cu ajutorul unei pensete. **A7**

7.2 Domenii de utilizare



Aveți grijă ca porțiunea feței care este tratată să fie întinsă, în timp ce mișcați aparatul pe piele. Acest lucru se obține în timp ce trageți cu mâna liberă în jos sau în lateral de piele pentru a o întinde.

Frunte **B1**:

Mișcați încet și uniform aparatul din mijlocul frunții spre exterior. Aveți grijă ca o porțiune a pielii să nu fie tratată de mai multe ori.

Tâmpile **B2**:

Mișcați aparatul spre exterior în direcția rădăcinii părului. Repetați acest proces pe partea stângă și dreaptă a nasului. Aveți grijă ca aparatul să se afle la o distanță de cel puțin 1 cm față de ochi.

Nas: **B3**

Mișcați aparatul de la podul superior al nasului în centru spre partea de jos. Repetați acest proces pe partea stângă și dreaptă a nasului.

Obraji **B4**:

Mișcați aparatul în exterior pe linia obrajilor.

În jurul gurii **B5**:

Mișcați aparatul în zona buzei superioare, din centru spre stânga și spre dreapta. Mișcați aparatul de la buza inferioară spre stânga și dreapta în sus. Aveți grijă să nu atingeți direct buzele!

8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Nu scufundați în niciun caz aparatul în apă sau alte lichide!
- Dezinfectați accesoriile după fiecare utilizare cu o soluție pentru dezinfectare disponibilă în comerț.
- După fiecare utilizare, înlocuiți filtrul de unică folosință.
- Dacă este murdar, curățați aparatul cu o cârpă uscată. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Protejați aparatul de șocuri, umezeală, praf, substanțe chimice, fluctuații puternice de temperatură și de surse de căldură prea apropiate (cuptoare, radiatoare).

9. ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB

Pentru articolele pentru achiziție ulterioară/suplimentare, accesați www.beurer.com sau adresați-vă punctului de service din țara dumneavoastră (conform listei cu adrese ale punctelor de service).

Articolele pentru achiziție ulterioară/suplimentare sunt disponibile și în comerț.

Denumire	Număr de articol și număr de comandă
20 x filtre de unică folosință	163.546
Accesoriu de precizie	163.557
Accesoriu dur	163.556
Accesoriu mare	163.555

10. ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Pureo Derma Peel FC100 este adecvat pentru fiecare tip de piele?

Pureo Derma Peel FC100 este adecvat pentru toate tipurile de piele. Este adecvat deopotrivă pentru ten gras și uscat, cât și pentru ten mixt. De asemenea, este adecvat pentru toate culorile de piele.

Tehnologia integrată în Pureo Derma Peel FC100 este sigură?

Pureo Derma Peel FC100 funcționează pe baza tehnicii de microdermoabraziune. Astfel sunt îndepărtate doar particulele de piele în exces ale stratului de piele exterior, celelalte straturi de piele nu sunt afectate.

Utilizarea Pureo Derma Peel FC100 provoacă dureri?

Nu, utilizarea Pureo Derma Peel FC100 trebuie să fie ușoară și fără dureri. În cazuri rare, pielea foarte sensibilă poate manifesta o ușoară senzație de ardere. Cu toate acestea, dacă simțiți durere în timpul utilizării, reduceți intensitatea.

Cât durează un tratament cu Pureo Derma Peel FC100?

Durata unui tratament poate varia în funcție de zona tratată. Un tratament complet al feței durează cca. 20 de minute.

Cât de des trebuie să utilizez Pureo Derma Peel FC100?

Vă recomandăm să utilizați Pureo Derma Peel FC100 o dată pe săptămână și trebuie să așteptați cel puțin 48 de ore între tratamente. În cazul în care pielea nu este sensibilă, puteți utiliza aparatul chiar de 2 ori pe săptămână. Anterior este obligatorie testarea utilizării. După utilizare, protejați pielea de soare.

De ce anume trebuie să țineți cont după tratament?

Înainte de a vă expune la soare, în primele trei zile după un tratament, utilizați o cremă de protecție solară. În primele trei zile după un tratament NU efectuați exfolieri mecanice/chimice, electrolyze și epilări în zona feței și NU utilizați niciun agent de epilare. Puteți aplica produse de machiaj imediat după tratament.

11. CE ESTE DE FĂCUT ÎN CAZUL ÎN CARE APAR PROBLEME?

Problemă	Cauză	Remediere
Aparatul nu poate fi pornit	Înterupător de Pornire/Oprire defect	Contactați Serviciul pentru clienți sau comerciantul dumneavoastră
Aparatul nu este alimentat cu curent electric	Alimentatorul nu este conectat corect.	Conectați corect alimentatorul.
Aparatul nu este alimentat cu curent electric	Alimentatorul este defect.	Contactați Serviciul pentru clienți sau comerciantul dumneavoastră
Aspirația nu se efectuează corespunzător la nivelul aparatului	Filtru înfundat/pompă defectă	Înlocuiți filtrul vechi cu un filtru nou. / Contactați Serviciul pentru clienți sau comerciantul dumneavoastră
Efectul de exfoliere cu ajutorul accesoriilor nu mai este asigurat	Stratul de safir este uzat	Pentru a solicita accesorii noi, contactați Serviciul pentru clienți sau comerciantul dumneavoastră.

12. ELIMINAREA CA DEȘEU

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoii menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră.

Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorităților locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.



13. DATE TEHNICE

Alimentare cu tensiune alimentator	Tensiune de intrare: 100 - 240 V Frecvență curent alternativ de intrare: 50/60 Hz Tensiune de ieșire: 12,0 V Curent de ieșire: ≤0,6 A Putere de ieșire: 7,2 W Eficiență operațională medie: ≥80.53% Consum de putere la sarcină zero: ≤ 0,066 W
Dimensiuni	Ø 21,5 x 8,8 cm
Greutate	~869 g

14. GARANȚIE / SERVICE

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.

