



RO	Sistem de epilare	
	Instrucțiuni de utilizare.....	2-24

Cuprins

1. Pachet de livrare.....	3
2. Semne și simboluri.....	3
3. Utilizarea conform destinației.....	4
4. Indicații de avertizare și de sănătate	4
5. Ce este beurer SalonPro System?.....	7
6. Descrierea aparatului.....	8
6.1 Unitatea de bază	8
6.2 Aplicator	9
6.3 Cartuș.....	9
7. Înainte de a începe.....	10
ETAPA 1: Verificați dacă beurer SalonPro System este potrivit pentru dumneavoastră	10
ETAPA 2: Recunoașterea/măsurarea automată a nuanței de piele	10
ETAPA 3: Test de verificare a compatibilității pielii.....	11
ETAPA 4: Pentru a obține rezultate optime, planificați epilarea cu beurer SalonPro System.....	12
ETAPA54: Pregătiți zona de epilat	12
ETAPA 6: Setări intensitatea de energie	12
ETAPA 7: Familiarizarea cu posibile efecte secundare la utilizarea de beurer SalonPro System....	13
ETAPA 7: La ce rezultate trebuie să vă așteptați în urma utilizării aparatului beurer SalonPro System?	14
8. Utilizarea aparatului beurer SalonPro System	15
8.1 Începerea utilizării	15
8.2 Utilizarea la nivelul feței.....	16
8.3 Utilizarea la nivelul buzei superioare	17
8.4 Utilizarea în zona obrazilor și a maxilarului	17
8.5 Utilizarea în zona gâtului și a bărbiei.....	17
8.6 Îngrijirea după un tratament la nivelul feței	18
9. Îngrijirea aparatului beurer SalonPro System	18
9.1 Curățarea aparatului beurer SalonPro System.....	18
9.2 Înlocuirea cartușului	18
10. Remedierea defecțiunilor	18
11. Întrebări frecvente.....	19
12. Eliminarea ca deșeu.....	22
13. Date tehnice.....	22

Stimată clientă, stimate client,

Vă mulțumim că ați optat pentru unul dintre produsele noastre. Marca noastră simbolizează produse de calitate superioară, testate în detaliu, din domeniile căldură, terapie, tensiune/diagnosticare, greutate, masaj, frumusețe și aer. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le și la dispoziție altor utilizatori și respectați indicațiile.

Cu deosebită considerație,
Echipa dumneavoastră Beurer

1. Pachet de livrare








- 1 unitate de bază pentru beurer SalonPro System cu aplicator
- 1 cablu de alimentare
- 1 exemplar din prezentele instrucțiuni de utilizare



AVERTIZARE

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie sau uzului privat, nu uzului comercial.
- Aparatul este adecvat numai pentru persoane peste 18 ani.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Verificați înainte de fiecare utilizare dacă aparatul și cablul de alimentare sunt în stare intactă. În caz de deteriorări nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului.
- Nu utilizați aparatul în nicio situație în apropierea căzilor, chiuvetelor, dușurilor sau a altor vase care conțin apă sau alte lichide – pericol de electrocutare!
- Asigurați-vă că aparatul este așezat stabil pe o suprafață plană.
- Nu priviți niciodată în lumină.
- Nu introduceți obiecte în fantele de aerisire ale aparatului.
- Aveți grijă ca fantele de aerisire ale aparatului să nu fie acoperite.

2. Semne și simboluri

În prezentele instrucțiuni de utilizare și pe aparat se găsesc următoarele simboluri:

 AVERTIZARE	Indicație de avertizare privind pericolele de vătămare sau pericolele pentru sănătate
 ATENȚIE	Indicație de siguranță privind posibile daune ale aparatului/accesoriilor
 Notă	Indicație privind informații importante
 PERICOL	Nu utilizați aparatul în apropiere de apă sau în apă (de exemplu chiuvetă, duș, cadă) – pericol de electrocutare!
	A se citi instrucțiunile de utilizare
	A nu se apropia de ochi!
	A nu se utiliza pe piele bronzată sau după expunerea la soare

	Eliminare ca deșeu în conformitate cu Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE)
	Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.

3. Utilizarea conform destinației

Beurer SalonPro System este destinat îndepărtării părului nedorit la adulți.

Zonele ideale ale corpului pentru utilizarea beurer SalonPro System sunt picioarele, zona axilară, zona inghinală, pieptul, abdomenul și fața de la pomeți în jos. Beurer SalonPro nu este destinat epilării la anus, la organele genitale sau la mameloane. Utilizați beurer SalonPro System numai conform instrucțiunilor de utilizare.

4. Indicații de avertizare și de sănătate



AVERTIZARE

Anterior utilizării aparatului, citiți cu atenție indicațiile de siguranță și urmați-le întocmai când utilizați beurer SalonPro System. Nerespectarea următoarelor indicații poate să conducă la vătămări sau la daune materiale. Păstrați prezentele instrucțiuni de utilizare și permiteți altor utilizatori accesul la acestea. Aveți grijă să atașați prezentele instrucțiuni de utilizare când dați aparatul unor terți.

- Nu folosiți beurer SalonPro System în timpul sarcinii sau alăptării.
- Dacă observați roșeață accentuată, formarea de bășici sau arsuri pe piele, **ÎNTRERUPEȚI IMEDIAT UTILIZAREA!**
- Realizați 48 de ore înainte de prima utilizare a beurer SalonPro System un test de verificare a compatibilității cu pielea pe o porțiune mică de piele în zona pe care doriți să o epilați (consultați capitolul 7, etapa 2: „Test de verificare a compatibilității pielii”).
- Nu priviți în niciun caz direct în lumina generată de cartuș. Este posibil ca acest produs să emită radiații optice periculoase. Aveți grijă ca suprafața luminoasă a cartușului să se afle complet în contact cu pielea.
- Nu încercați niciodată să generați un impuls luminos în aer!
- Folosind „Tabelul pentru culoarea părului și a pielii” de pe versoul prezentelor instrucțiuni de utilizare, determinați intensitatea luminoasă cea mai potrivită pentru pielea și pentru părul dumneavoastră sau stabiliți dacă această metodă este adecvată pentru dumneavoastră (cazurile de incompatibilitate sunt marcate cu „x” în tabel).
- Nu folosiți beurer SalonPro System pe piele de culoare naturală închisă. Utilizarea aparatului beurer SalonPro System pe piele de culoare închisă poate avea urmări negative precum arsuri, bășici și modificarea culorii pielii (hiper- sau hipopigmentare).
- beurer SalonPro System funcționează cel mai bine la tipuri de păr de culoare mai închisă sau la păr care conține mai multă melanină. Negru și șaten reacționează cel mai bine; deși va reacționa și părul maro și maro deschis, acesta necesită în mod normal mai multe ședințe de epilare. Roșcat ar putea prezenta o reacție. Părul alb, gri sau blond nu reacționează de obicei la beurer SalonPro System, deși unii utilizatori au observat rezultate după mai multe ședințe de epilare.
- beurer SalonPro System poate să cauzeze o pigmentare temporară.
- Nu încercați să deschideți sau să reparați aparatul dumneavoastră beurer SalonPro System. La deschiderea aparatului beurer SalonPro System puteți intra în contact cu componente electrice periculoase sau cu impulsuri de energie luminoasă, ceea ce poate cauza vătămări grave și/sau leziuni oculare iremediabile.

PERICOL

Nu apropiați beurer SalonPro System de apă! Beurer SalonPro System este un echipament electric. Nu-l așezați în apă și nu-l lăsați să cadă în apă sau în alte lichide.



Acest lucru poate duce la electrocutare cu efecte grave!

- Nu folosiți beurer SalonPro System când luați o baie.
- Nu folosiți beurer SalonPro System dacă aparatul s-a umezit sau udat.
- Dacă beurer SalonPro System a căzut în apă, nu încercați să-l scoateți.
- Scoateți ștecărul din priză dacă beurer SalonPro System a căzut în apă.
- Nu atingeți niciodată ștecărul și aparatul cu mâini ude!

⚠ ATENȚIE

Pentru evitarea deteriorărilor

- Nu încercați să deschideți sau să reparați aparatul dumneavoastră beurer SalonPro System. Dacă încercați să deschideți beurer SalonPro System, aparatul se poate deteriora și pierdeți garanția.
- În timpul utilizării, nu expuneți aparatul unor temperaturi mai mici de 10 °C sau mai mari de 35 °C.
- Aparatul nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat când este cuplat la priză.
- Utilizați beurer SalonPro System numai în scopul și în modul descris în instrucțiunile de utilizare.
- Nu puneți în funcțiune beurer SalonPro System când este deteriorat un cablu sau un ștecăr și nu apropiați cablul de alimentare de suprafețe încălzite.
- Decuplați beurer SalonPro System de la priză imediat după utilizare.
- Scoateți ștecărul aparatului beurer SalonPro System din priză înainte de curățare.
- Nu utilizați beurer SalonPro System cu accesorii care nu sunt recomandate de firma beurer GmbH.
- Nu folosiți beurer SalonPro System dacă observați sau mirosiți fum în timpul utilizării aparatului.
- Nu folosiți beurer SalonPro System dacă nu funcționează corect sau dacă pare deteriorat.
- Nu folosiți beurer SalonPro System dacă este rupt, dacă se desprinde sau dacă lipsește complet orificiul ventilatorului din aplicator.
- Nu folosiți beurer SalonPro System dacă senzorul pentru culoarea pielii inclus în aplicator este fisurat sau rupt.
- Nu folosiți beurer SalonPro System în cazul în care carcasa exterioară este fisurată sau se descompune.
- Nu folosiți beurer SalonPro System cu un cartuș deteriorat sau dacă suprafața luminoasă este fisurată sau ruptă sau dacă lipsește.
- Nu folosiți beurer SalonPro System dacă are un cablu deteriorat sau un ștecăr deteriorat.

⚠ AVERTIZARE

Nu folosiți beurer SalonPro System în niciun caz dacă suferiți de una dintre următoarele boli:

- Dacă aveți sau ați avut cancer de piele.
- Dacă suferiți de epilepsie.
- Dacă prezentați cheloide cicatriceale.
- Dacă aveți herpes sau psoriazis.
- Dacă sunteți fotosensibil sau suferiți de alte sensibilități la lumină, cum ar fi porfirie, erupție polimorfă la lumină, urticarie fotosensibilă, lupus etc.
- Dacă suferiți de boli ale metabolismului, cum ar fi diabetul.
- Dacă aveți probleme cu coagularea sângelui.

Nu folosiți beurer SalonPro System în niciun caz dacă luați unul dintre următoarele medicamente:

- Dacă luați medicamente care cresc fotosensibilitatea pielii, inclusiv antireumatice nesteroidiene (de exemplu aspirină, ibuprofen, paracetamol), tetraciclină, fenotiazine, diuretice cu tiazidă, sulfoniluree, sulfonamide, DTIC, fluorouracil, vinblastină, griseofulvină, acizi alfa-hidroxilici (AHA), acizi beta-hidroxilici (BHA), Retin-A ®, Accutane® și/sau retinoizi topici.
- Dacă ați fost tratat recent sau vă aflați în prezent sub tratament cu acid azelaic.
- Dacă ați luat în ultimele două săptămâni antibiotice cu tetraciclină.
- Dacă ați fost tratat în ultimele 6 luni cu Accutane® (isotretinoin).
- Dacă ați urmat în ultimele 3 luni o cură cu steroizi.

- Dacă ați fost supus în ultimele 6-8 luni unui peeling cutanat sau altei proceduri de netezire a pielii.
- Dacă ați fost supus în ultimele 3 luni unei radioterapii sau chimioterapii.

Nu utilizați în niciun caz beurer SalonPro System în următoarele locuri:

- Pe mucoase în zona oro-nazală.
- Pe sau lângă un implant activ, cum ar fi stimulator cardiac, aparat pentru incontinență, pompă de insulină etc.
- Pe față de la pomeți în sus, în jurul ochilor, sprâncenelor sau genelor, întrucât se pot produce leziuni oculare grave.
- La mameloane, organele genitale (masculine sau feminine) sau în jurul anusului.
- Pe piercinguri sau alte obiecte metalice precum cercei sau bijuterii.
- Pe un tatuaj sau pe machiaj permanent în zona de tratat.
- Pe pete de culoare maro închis sau negru, cum ar fi pistrii de mari dimensiuni, nevi, pete hepatice sau veruci.
- Pe eczeme, psoriazis, leziuni, răni deschise sau infecții acute. Așteptați până s-a vindecat locul în cauză înainte de a utiliza beurer SalonPro System.
- Pe piele cu leziuni, pe piele crăpată sau în zone cu risc de malignitate.
- În locuri în care ulterior poate doriți să aveți păr.



Indicații de avertizare privind expunerea la soare înainte și după tratament!

Expunerea la soare înainte de tratament

1. După expunerea la soare, așteptați cel puțin 2 săptămâni înainte de a utiliza aparatul.
2. Înainte de tratament, asigurați-vă că pielea nu prezintă niciun eritem solar. Dacă eritemul solar nu s-a vindecat, nu utilizați aparatul decât după vindecarea completă.
3. Acum efectuați testul de verificare a compatibilității pielii (a se vedea capitolul 5.1) pentru a determina intensitatea de energie corespunzătoare.



Expunerea la soare după tratament

1. După tratament, așteptați cel puțin 48 de ore înainte de a vă expune la soare. Nu expuneți la soare pielea încă înroșită!
2. În primele două săptămâni după tratament acoperiți pielea tratată cu haine pentru a vă proteja împotriva contactului cu razele solare sau aplicați cremă de protecție solară (minim FPS 30).

Bronzarea cu lumină artificială


Instrucțiunile din „Expunerea la soare înainte de tratament” și „Expunerea la soare după tratament” sunt valabile, de asemenea, pentru bronzarea cu lumină artificială și cu loțiuni de bronzat.

După o vizită la saună/piscină faceți o pauză de 24 de ore înainte de a utiliza aparatul, deoarece pot apărea iritații ale pielii din cauza clorului.

Notă


Această listă nu are caracter exhaustiv. Dacă nu sunteți sigur că puteți utiliza aparatul beurer SalonPro System în siguranță consultați medicul sau dermatologul dumneavoastră.

5. Ce este beurer SalonPro System?

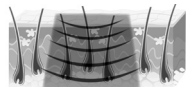

Anterior utilizării aparatului beurer SalonPro System

beurer SalonPro System este un aparat bazat pe lumină pentru epilarea definitivă, fiind destinat uzului personal. Metoda de epilare bazată pe laser și lumină este bine-cunoscut și testat. În cei peste 15 ani de utilizare clinică pe întreg globul pământesc, acesta s-a dovedit a fi sigur și eficient în reducerea părului pe termen lung.

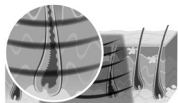


În timpul unui impuls generat de beurer SalonPro System

Cum îndepărtează lumina părul?

Epilarea bazată pe lumină are la bază teoria fototermolizei selective, la care se folosește energia optică pentru a dezactiva creșterea părului. Pentru a obține un astfel de efect termic, tulpina firului de păr trebuie să preia în mod selectiv energia luminoasă și să o transforme în căldură.

Această selectivitate se obține atunci când energia optică generată spre țesut este preluată în principal de pigmentul tulpinii firului de păr în timp ce pielea și țesutul dimprejur rămân reci. Melanina este pigmentul din tulpina firului de păr care este responsabil pentru absorbția luminii și care produce căldura, care, în cele din urmă, dezactivează creșterea părului. În consecință, se poate absorbi cu atât mai multă lumină și lumina poate fi cu atât mai eficientă la epilare cu cât există mai multă melanină în păr (cu alte cuvinte, cu cât părul este mai închis la culoare).

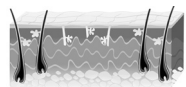

După utilizarea aparatului beurer SalonPro System



Anagen – fază de creștere

Ce influență are ciclul de creștere a părului asupra epilării bazate pe lumină?

Orice fir de păr de pe corpul nostru trece prin cele trei faze ale ciclului de creștere a părului. Anagen, catagen și telogen. Aceste trei faze au o mare influență asupra măsurii în care funcționează epilarea bazată pe lumină.

Anagen este faza de creștere a părului, în timp ce catagen și telogen sunt faze latente.



Catagen – fază latentă


Durata unui ciclu complet de creștere a părului diferă de la om la om și depinde de zona corpului în care se află părul, însă măsoară, de regulă, 18-24 de luni. La un anumit moment, majoritatea foliculelor de păr de pe o suprafață a pielii se află în faza latentă. beurer SalonPro System nu are efect asupra acestui păr.

Însă firele aflate în faza de creștere anagen reacționează la utilizarea aparatului beurer SalonPro System.

Trebuie să rețineți că este necesar un ciclu complet de creștere a părului pentru a obține o epilare completă cu beurer SalonPro System.



Telogen – fază latentă

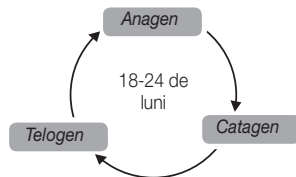


La beurer SalonPro System, siguranța este pe primul loc

- **Tehnologia IPL la beurer SalonPro System – siguranță maximă la un nivel mai mic de energie**
Cu tehnologia Technologie Intense Pulsed Light (IPL) se pot obține rezultate de epilare pe termen lung cu o fracțiune din nivelul de energie utilizat la alte aparate de epilare bazate pe lumină. Nivelul redus de energie utilizat la beurer SalonPro System reduce eventuala posibilitate de apariție a daunelor sau complicațiilor și contribuie la siguranța dumneavoastră generală.
- **beurer SalonPro System protejează pielea dumneavoastră**
Epilarea bazată pe lumină nu este potrivită pentru pielea de culoare naturală mai închisă sau pielea bronzată. În beurer SalonPro System este integrat un *senzor pentru culoarea pielii*, cu care poate fi măsurată culoarea suprafeței de piele care urmează a fi epilată astfel încât este posibilă utilizarea numai la culori potrivite ale pielii. Această funcție de siguranță împiedică utilizarea pe pielea dumneavoastră dacă are o culoare prea închisă sau dacă este bronzată prea puternic. *Aplicatorul* beurer SalonPro System dispune de o funcție de protecție UV, prin care sunt blocate razele UV dăunătoare.
- **beurer SalonPro System protejează ochii dumneavoastră**
Pentru a proteja ochii, *aplicatorul* beurer SalonPro System dispune de un senzor integrat pentru contactul cu pielea. Acesta a fost creat pentru a împiedica emiterea unui impuls luminos când *aplicatorul* este ținut în aer. Blițul este declanșat numai după ce senzorul pentru contactul cu pielea este așezat pe piele.

6. Descrierea aparatului

6.1 Unitatea de bază

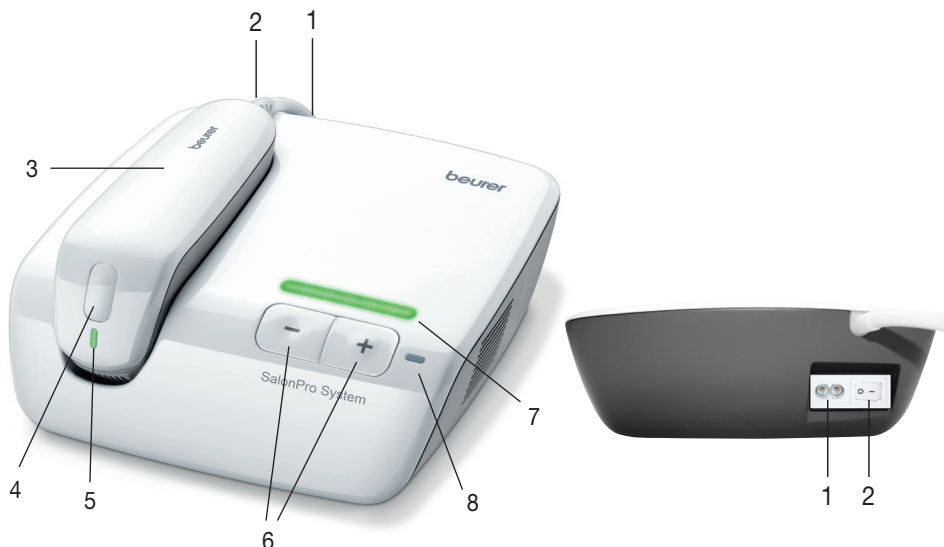

1. Mufa unității de bază
2. Întrerupător de rețea
3. Aplicator
4. Buton de declanșare
5. Bec de control

6. Butoane pentru setarea energiei
7. Bec de control pentru energie
8. Bec de control pentru „cartuș gol”

6.2 Aplicator



Pe aplicator se află un buton de declanșare. Prin intermediul butonului de declanșare se activează lampa de lumină-bliț.

În carcasa interioară a aplicatorului se află *cartușul*.

Becul de control se află în partea centrală superioară a capului aplicatorului și luminează în felul următor:

<i>Becul de control</i> nu luminează	Impulsul nu este pregătit
<i>Becul de control</i> luminează verde	Impulsul este pregătit
<i>Becul de control</i> luminează roșu	Impulsul va fi blocat, întrucât culoarea pielii nu este compatibilă (consultați „Tabelul pentru culoarea părului și a pielii” de pe versoul instrucțiunilor de utilizare).
<i>Becul de control</i> luminează portocaliu	Impulsul va fi blocat deoarece nu există un contact complet cu pielea.
<i>Becul de control</i> luminează intermitent roșu/ <i>becul de control pentru energie</i> luminează intermitent verde	<i>Cartușul</i> nu este introdus corect.

6.3 Cartuș



Cartușul beurer SalonPro System dispune de un *senzor integrat pentru culoarea pielii*.

Epilarea bazată pe lumină folosită pe piele de culoare închisă poate avea urmări negative precum arsuri, bășici și modificarea culorii pielii (hiper- sau hipopigmentare). Pentru a evita aceste erori de utilizare, *senzorul pentru culoarea pielii* integrat în beurer SalonPro System determină anterior fiecărui impuls luminos culoarea pielii care va fi epilată. Dacă *senzorul pentru culoarea pielii* recunoaște că pielea are o culoare prea închisă pentru a se utiliza beurer SalonPro System, aparatul întrerupe automat emiterea impulsurilor.

Dacă nu se vede niciun impuls luminos și *becul de control* luminează portocaliu, înseamnă că *senzorul pentru contactul cu pielea* nu este complet în contact cu pielea.

Senzorul pentru culoarea pielii nu servește doar la evitarea decojirii pielii prea închise, ci vă și ajută la pigmentarea corespunzătoare a pielii prin determinarea potențialului energetic recomandat pentru nuanța dumneavoastră de piele (a se vedea capitolul 7)

Pentru a proteja ochii, *cartușul* beurer SalonPro System dispune suplimentar de un *senzor pentru contactul cu pielea*. Acesta a fost creat pentru a împiedica emiterea unui impuls luminos când *aplicatorul* este ținut în aer. Dacă nu se vede niciun impuls luminos și *becul de control* luminează portocaliu,

înseamnă că *suprafața luminoasă a cartușului* nu este complet în contact cu pielea. Încercați aparatul în altă zonă de pe corp sau contactați serviciul pentru clienți dedicat beurer SalonPro System. *Cartușul* din beurer SalonPro System dispune de o funcție de protecție UV, prin care sunt blocate razele UV dăunătoare.

7. Înainte de a începe

ETAPA 1: Verificați dacă beurer SalonPro System este potrivit pentru dumneavoastră

AVERTIZARE

Înainte de prima utilizare a beurer SalonPro System verificați dacă aparatul este potrivit pentru dumneavoastră.

Pentru a verifica dacă beurer SalonPro System este potrivit pentru dumneavoastră, citiți capitolul „4. Indicații de avertizare și de siguranță” și, folosind „Tabелul pentru culoarea părului și a pielii” de pe versoul prezentelor instrucțiuni de utilizare, determinați intensitatea luminoasă cea mai potrivită pentru pielea și pentru părul dumneavoastră și stabiliți dacă această metodă este adecvată pentru dumneavoastră (cazurile de incompatibilitate sunt marcate cu „X” în tabel).

ETAPA 2: Recunoașterea/măsurarea automată a nuanței de piele

Prin recunoașterea automată a nuanței pielii, puteți lăsa aparatul să afișeze potențialul energetic corespunzător nuanței dumneavoastră de piele.

Utilizarea recunoașterii (automate) a nuanței de piele

1. Porniți recunoașterea (automată) a nuanței de piele, în timp ce apăsați simultan pe ambele butoane pentru setarea energiei (+ și -) timp de 2 secunde.
2. Vă aflați în modul de recunoașterea a nuanței pielii când LED-urile individuale ale becului de control pentru energie luminează unul după altul de la stânga la dreapta.
3. Așezați suprafața luminoasă a cartușului pe suprafața de test dorită și aveți grijă să se afle complet în contact cu pielea.

Notă

Pentru siguranța dumneavoastră, selectați întotdeauna cel mai închis loc de pe piele (de exemplu partea exterioară a pulpei, partea din spate a mâinii etc.)

Important: Înainte de utilizarea pe o altă parte a corpului, trebuie să efectuați din nou o măsurătoare.

4. Prin apăsarea butonului de declanșare, porniți recunoașterea nuanței pielii. Recunoașterea nuanței pielii durează 1-2 secunde.

Notă

În modul de recunoaștere a nuanței pielii, aparatul nu emite niciun impuls luminos.

5. Dacă măsurarea nuanței pielii are succes, becul de control pentru energie indică nivelul de energie corespunzător nuanței dumneavoastră de piele. LED-urile nivelului de energie indicat luminează permanent.
6. Dacă becul de control pentru energie luminează în continuare de la stânga la dreapta, recunoașterea nuanței pielii nu a funcționat.
7. Acordați atenție suplimentară becului de control de pe aplicator. Dacă becul de control luminează portocaliu, contactul cu pielea este insuficient pentru efectuarea măsurătorii. Dacă becul de control luminează roșu, pielea dumneavoastră este prea întunecată sau nuanța dumneavoastră de piele nu poate fi recunoscută.
8. În acest caz, repetați măsurătoarea, în timp ce apăsați din nou butonul de declanșare.

Notă

Dacă doriți să încheiați mai devreme recunoașterea nuanței pielii, puteți reveni la modul normal prin apăsarea unuia dintre butoanele pentru setarea energiei (+ sau -).

9. Dacă recunoașterea nuanței pielii a avut succes, verificați rezultatul măsurătorii în timp ce comparați tabelele cu nuanțele de piele și păr.
10. Dacă există o abatere între valoarea determinată și tabelul cu nuanțele de piele și păr, trebuie să porniți întotdeauna de la valoarea mai mare/de la setarea nuanței de piele mai închise.
11. Puteți crește, respectiv reduce de fiecare dată treapta de energie prin apăsarea tastelor + și -.

ETAPA 3: Test de verificare a compatibilității pielii

AVERTIZARE

Înainte de a utiliza beurer SalonPro System, efectuați un test de verificare a compatibilității pielii.

Cu ajutorul testului de verificare a compatibilității pielii se testează modul în care reacționează pielea dumneavoastră la epilarea cu beurer SalonPro System. În plus, vă ajută la setarea treptei optime de energie pentru fiecare zonă de epilat.

Cu **48 de ore** înainte de epilarea completă realizați pe fiecare suprafață a pielii pe care doriți să o tratați un test de verificare a compatibilității pielii.

Notă

În cazul epilării pe față, testul de verificare a compatibilității pielii trebuie realizat pe o suprafață fără păr, cum ar fi sub ureche sau lateral pe gât.

1. Anterior utilizării aveți în vedere ca pielea să fie rasă, curată și uscată (să nu prezinte urme de pudră, creme, produse de machiaj, antiperspirant sau deodorant).

AVERTIZARE

NU curățați pielea ÎN NICIUN CAZ cu lichide inflamabile precum alcool sau acetonă înainte de a folosi beurer SalonPro System.

2. Pregătiți aparatul conform descrierii din capitolul „8.1 Începerea utilizării” punctele 2 până la 5.
3. Calculați treapta de energie recomandată cu ajutorul recunoașterii/măsurării (automate) a nuanței pielii.
4. Așezați suprafața luminoasă a cartușului pe suprafața de test dorită și aveți grijă să se afle complet în contact cu pielea.
5. Declanșați primul impuls cu treapta de energie recomandată apăsând butonul de declanșare. Vedeți un bliț luminos, auziți un sunet puternic și simțiți o ușoară senzație de ardere și/sau de căldură. Aparatul este pregătit pentru următorul impuls în decursul a 3 secunde și becul de control la aplicator luminează continuu verde.
6. Îndepărtați aplicatorul de piele și așezați-l pe următoarea suprafață de test.
7. Dacă treapta de energie setată nu este neplăcută, puteți mări treapta de energie „+” cu 1.

Notă

Aveți însă grijă ca treapta de energie să nu depășească treapta de energie recomandată conform tabelului pentru culoarea părului și a pielii.

8. Apoi declanșați din nou un impuls luminos cu treapta de energie nou setată.
9. Repetați această etapă atât timp cât v-ați familiarizat cu modul de utilizare și până când ați atins treapta de energie maximă.
10. Dacă treptele de energie recomandate de aparat sunt neplăcute, nu creșteți în niciun caz treapta de energie, ci reduceți-o prin apăsarea tastei de selectare a energiei „-”. Reduceți treapta de energie până când modul de utilizare este plăcut.

11. Așteptați 48 de ore și examinați suprafața epilată.

Dacă pielea în zona epilată pare normală (nicio reacție sau roșeață ușoară), puteți continua cu o epilare completă la cea mai mare treaptă de temperatură pe care ați resimțit-o plăcută în timpul testului. Dacă observați roșeață extremă, umflături sau bășici chiar și la cea mai mică treaptă de energie, nu supuneți această suprafață unui tratament complet.

 **Notă**

Nu realizați o epilare completă cu o treaptă de energie pe care nu ați testat-o în prealabil!
Epilați suprafața testată cel mai devreme după 1 săptămână de la test.

ETAPA 4: Pentru a obține rezultate optime, planificați epilarea cu beurer SalonPro System

Un ciclu tipic de creștere a părului poate dura 18-24 de luni. În această perioadă pot fi necesare mai multe ședințe cu beurer SalonPro System pentru a se obține o epilare pe termen lung. Eficacitatea epilării diferă de la om la om și variază în funcție de zona corpului, de culoarea părului și de modul în care utilizați beurer SalonPro System.

Planul tipic pentru epilarea cu beurer SalonPro System pe parcursul unui ciclu complet de creștere a părului:

- Între primele 3-4 ședințe de epilare cu beurer SalonPro System trebuie să așteptați aproximativ două săptămâni.
- Între ședințele de epilare 5-7 cu beurer SalonPro System trebuie să așteptați aproximativ patru săptămâni. Ulterior veți utiliza beurer SalonPro System din când în când, atunci când este necesar, până când obțineți rezultate de durată.

Aceste indicații corespund planului recomandat, cu care se obțin, în mod demonstrat, cele mai bune rezultate. Dar puteți organiza și altfel planul dumneavoastră personal, obținând totuși rezultate satisfăcătoare.

 **Notă**

Dacă folosiți aparatul pe aceeași zonă a corpului mai mult de o dată la două săptămâni, nu obțineți rezultate mai bune.

Îngrijire ulterioară tipică folosind beurer SalonPro System după obținerea unei epilări definitive:

Modificările hormonale sau alte modificări fiziologice pot activa foliculele de păr latente. Din acest motiv, este posibil să fie uneori necesare ședințe de epilare ulterioare cu beurer SalonPro System.

ETAPA54: Pregătiți zona de epilat

Anterior utilizării aveți în vedere ca pielea să fie rasă, curată și uscată (să nu prezinte urme de pudră, creme, produse de machiaj, antiperspirant sau deodorant).

 **AVERTIZARE**

Nu curățați pielea cu lichide inflamabile precum alcool sau acetonă înainte de a folosi beurer SalonPro System.

ETAPA 6: Setati intensitatea de energie

Treapta de energie

Treapta de energie determină intensitatea impulsului luminos generat de beurer SalonPro System spre pielea dumneavoastră (de la cea mai mică treaptă (-) până la cea mai mare treaptă (+)). *Becurile de control pentru energie* de pe *unitatea de bază* indică mărirea treptei de energie. Odată cu mărirea treptei de energie se îmbunătățesc rezultatele epilării, dar crește și riscul de posibile efecte secundare și complicații.

Începeți întotdeauna prima ședință de epilare cu treapta de energie înregistrată în recunoașterea automată a nuanței pielii și confirmată prin intermediul testului de verificare a compatibilității pielii. Dacă în timpul și după prima ședință de epilare cu treapta de energie recomandată sesizați o ușoară iritație sau nu sesizați nicio iritație, puteți crește treapta de energie cu 1 în cadrul următoarelor ședințe.

AVERTIZARE

Nu creșteți treapta de energie dacă simțiți dureri neobișnuite în timpul sau după utilizarea aparatului beurer SalonPro System! (consultați „Etapa 6 Familiarizarea cu posibile efecte secundare”)

Nu creșteți treapta de energie în timpul unei ședințe de epilare, nici măcar atunci când nu aveți nicio senzație neplăcută.

Iritația se poate produce și la un anumit timp după utilizare.

AVERTIZARE

Nu tratați aceeași suprafață de piele mai mult de o dată per ședință!

Utilizarea multiplă pe o suprafață de piele în cadrul unei ședințe de epilare poate mări probabilitatea de efecte secundare.

Încercați să evitați suprapunerea de impulsuri.

ETAPA 7: Familiarizarea cu posibile efecte secundare la utilizarea de beurer SalonPro System

Dacă beurer SalonPro System este utilizat conform indicațiilor din prezentele instrucțiuni de utilizare, apar foarte rar efecte secundare și complicații în legătură cu utilizarea aparatului beurer SalonPro System. Cu toate acestea, orice metodă de tratament cosmetic, inclusiv metodele dezvoltate pentru utilizarea la domiciliu, prezintă un anumit risc. În consecință, este important să înțelegeți și să acceptați riscurile și complicațiile care pot să apară la utilizarea de sisteme de epilare cu impulsuri de lumină destinate uzului privat.

Complicație	Probabilitatea apariției complicației	Efect secundar	Probabilitatea apariției efectului secundar
Acțiunea mai multor impulsuri în același loc	Redus	Iritare ușoară a pielii	Redus
		Înroșirea pielii	Redus
		Sensibilitate ridicată a pielii	Redus
		Răni și arsuri	Rar
		Formarea de cicatrice	Rar
		Modificări pigmentare	Rar
		Roșeață accentuată și umflătură	Rar
		Infecție	Neglijabil
		Hematom	Neglijabil

Dureri ușoare la nivelul pielii

Deși epilarea la domiciliu cu impulsuri de lumină este suportată în general foarte bine, majoritatea utilizatorilor resimt o ușoară senzație neplăcută în timpul utilizării, descrisă de obicei ca o ușoară înțepătură pe suprafața de piele tratată. În mod normal, senzația de înțepătură persistă pe parcursul utilizării propriu-zise sau câteva minute după aceasta. Orice altă senzație diferită de această ușoară senzație neplăcută nu este normal și înseamnă că trebuie să întrerupeți utilizarea beurer SalonPro System, deoarece această metodă de epilare nu este potrivită pentru dumneavoastră, sau că ați setat o treaptă de energie prea ridicată.

Înroșirea pielii

Pielea dumneavoastră se poate înroși direct după utilizarea aparatului beurer SalonPro System sau pe parcursul a 24 de ore de la utilizare. Roșeața dispare de regulă în decursul a 24 de ore. Consultați medicul dacă roșeața nu dispare după 2-3 zile.

Sensibilitate ridicată a pielii

Pielea în zona epilată este mai sensibilă, astfel încât poate fi uscată sau se poate decoji.

Răni și arsuri

Foarte rar se pot produce arsuri sau răni cutanate în urma utilizării. Poate dura câteva săptămâni până când arsura sau rana s-a vindecat și, foarte rar, poate să rămână o cicatrice vizibilă.

Formarea de cicatrice

Deși se produce foarte rar, există posibilitatea formării unei cicatrice permanente. O eventuală cicatrice se produce în mod normal sub forma unei leziuni albe, plate pe piele (hipotrofic).

Totuși, aceasta poate fi lată și roșie (hipertrofic) sau lată și depășind marginile răni propriu-zise (che-loid). Pot fi necesare tratamente estetice ulterioare pentru a îmbunătăți aspectul cicatricei.

Modificări pigmentare

beurer SalonPro System vizează tulpina firului de păr, în special celulele pigmentate în foliculul de păr, și foliculul de păr propriu-zis.

Cu toate acestea, există pericolul unei hiperpigmentări (pigment accentuat sau culoare maro) sau al unei hipopigmentări (culoare deschisă) a pielii dimprejur. Acest pericol de modificări a pigmentării pielii este mai mare la persoane cu o piele de culoare închisă. În mod normal, modificările culorii sau modificările pigmentului pielii sunt temporare, hiperpigmentarea sau hipopigmentarea permanentă producându-se foarte rar.

Roșeață accentuată și umflătură

În cazuri rare, pielea tratată se poate înroși și umfla. Acest lucru apare mai frecvent în zone sensibile ale corpului. Roșeața și umflăturile trebuie să dispară după 2-7 zile și trebuie tratate cu comprese frecvente cu gheață. Spălarea cu atenție este permisă, însă trebuie să evitați expunerea la soare.

Infecție

O infecție a pielii este foarte rară, însă reprezintă totuși un posibil risc în urma unei arsuri sau a unei răni cutanate produse de aparatul beurer SalonPro System.

Hematom

Utilizarea aparatului beurer SalonPro System poate să conducă în cazuri foarte rare la hematoame de culoare albastru-lila, care pot persista 5-10 zile. După ce hematoamele dispar, se poate produce o colorare ruginie a pielii (hiperpigmentare), care poate fi permanentă.

ETAPA 7: La ce rezultate trebuie să vă așteptați în urma utilizării aparatului beurer SalonPro System?

Pentru mulți utilizatori ai aparatului beurer SalonPro System, aceasta este eventual prima experiență cu un aparat bazat pe lumină dezvoltat pentru uzul privat. Beurer SalonPro System este ușor de utilizat, iar ședințele de epilare nu durează mult. În timpul unei ședințe de epilare cu beurer SalonPro System este normal să observați și să simțiți următoarele:

- **Zgomot de vâjâit al ventilatorului** – ventilatorul de răcire din beurer SalonPro System produce un zgomot similar unui uscător de păr. Acest lucru este normal.
- **Zgomot de lovire la fiecare impuls** – când beurer SalonPro System declanșează un impuls, este normal să auziți odată cu pulsul de lumină un fel de zgomot de lovire.
- **Presiune ușoară a aplicatorului** – acest lucru este necesar și util pentru amplasarea impulsurilor luminoase învecinate și face parte din funcția de siguranță a beurer SalonPro System.
- **Senzație de căldură și mâncărimi** – în timpul fiecărui impuls luminos este normal să simțiți o senzație ușoară de căldură și mâncărimi cauzate de energie de lumină. Rețineți că este important să folosiți la prima ședință de epilare întotdeauna trepte mici de energie. Ușoara căldură pe care o resimțiți poate persista până la o oră după utilizarea aparatului beurer SalonPro System.
- **Culoare ușor roșatică sau roz a pielii** – în timpul sau direct după ședința cu beurer SalonPro System nu este neobișnuit să observați o ușoară culoare roz a pielii. În mod normal, aceasta poate fi

observată cel mai puternic în jurul firelor de păr. Dacă observați însă înroșirea completă a pielii, formarea de bășici sau arsuri, întrerupeți imediat utilizarea aparatului beurer SalonPro System.

8. Utilizarea aparatului beurer SalonPro System

AVERTIZARE

Dacă doriți să folosiți aparatul pe față, citiți mai întâi indicațiile din capitolul 8.2 până la 8.6 înainte de a continua cu capitolul 8.1 „Începerea utilizării”.

8.1 Începerea utilizării

1. Scoateți unitatea de bază, aplicatorul și celelalte componente ale aparatului beurer SalonPro System din cutie.
2. Verificați dacă este introdus corect *cartușul* în aplicator.
3. Introduceți cablul de alimentare în mufa unității de bază beurer SalonPro System.
4. Introduceți celălalt capăt al cablului de alimentare în priză. beurer SalonPro System este acum pregătit de funcționare.

Notă

Anterior utilizării aveți în vedere ca pielea să fie rasă, curată și uscată (să nu prezinte urme de pudră, creme, produse de machiaj, antiperspirant sau deodorant).

AVERTIZARE

Nu curățați pielea cu lichide inflamabile precum alcool sau acetonă înainte de a folosi beurer SalonPro System.

5. Acționați întrerupătorul de rețea de pe partea din spate a unității de bază. Becul de control și becurile de control pentru energie se aprind și se aude un zgomot de la ventilator (similar zgomotului unui uscător de păr).
6. Aparatul este setat automat la cea mai mică treaptă de energie. Aparatul este acum pregătit pentru generarea primului impuls.
7. Cu ajutorul butoanelor pentru setarea energiei „-” și „+” puteți reduce sau mări nivelul de energie pentru a seta treapta de energie determinată prin recunoașterea automată a nuanței pielii sau în cadrul testului de verificare a compatibilității, respectiv pentru a adapta setările conform cerințelor dumneavoastră. Becurile de control pentru energie se aprind verde în funcție de treapta de energie aleasă.
8. Așezați suprafața luminoasă a cartușului pe suprafața de tratat dorită și aveți grijă să se afle complet în contact cu pielea.

Notă

Dacă apăsați *butonul de declanșare* și pielea dumneavoastră are o culoare prea închisă sau este bronzată prea puternic, *becul de control* de pe *aplicator* luminează roșu. În cazul acesta, *aplicatorul* nu declanșează impulsul pe această suprafață a pielii.

Dacă *aplicatorul* nu se află în contact suficient cu pielea și apăsați *butonul de declanșare*, *becul de control* la nivelul *aplicatorului* luminează portocaliu. Nici în cazul acesta, *aplicatorul* nu declanșează impulsul pe această suprafață a pielii.

9. Apăsați butonul de declanșare. Vedeți un bliț luminos, auziți un sunet puternic și simțiți o ușoară senzație de ardere și/sau un efect de căldură. beurer SalonPro System este dotat cu o funcție de „bliț repetat”. Dacă țineți apăsat butonul de declanșare, se declanșează automat la intervale de 3 secunde un bliț luminos, astfel încât nu trebuie să apăsați butonul de declanșare de fiecare dată.

AVERTIZARE

Nu tratați aceeași suprafață de piele mai mult de o dată per ședință!

Utilizarea multiplă pe o suprafață de piele în cadrul unei ședințe de epilare poate mări probabilitatea de efecte secundare.

Încercați să evitați suprapunerea de impulsuri.

Notă

Impulsurile generate de beurer SalonPro System trebuie aplicate în rânduri – începând la capătul fiecărui rând până la celălalt capăt al rândului. Această metodă oferă un control mai bun asupra suprafeței de piele deja tratate și vă ajută să evitați aplicarea de mai multe ori pe aceeași suprafață sau epilarea pe suprafețe de piele suprapuse. *Suprafața luminoasă* a aparatului beurer SalonPro System este concepută în așa fel încât pe suprafața tratată rămân pentru scurt timp urme de apăsare. Aceste urme vizibile pot fi utilizate pentru aplicarea exactă a următorului impuls. Pe *cartuș*, în partea stângă și dreaptă, se află suplimentar câte un marcaj longitudinal, cu ajutorul căruia puteți vedea unde se află în acel moment *suprafața luminoasă*.

10. Îndepărtați aplicatorul de piele și așezați-l pe următoarea suprafață de tratat. Când mutați aplicatorul aveți grijă să nu se producă goluri sau suprapuneri pe pielea tratată. Aparatul se reîncarcă imediat și este pregătit pentru următorul impuls în decursul a 3 secunde (becul de control la aplicator luminează din nou continuu verde). Repetați procedura până când a fost tratată întreaga suprafață de piele.

După tratamentul cu beurer SalonPro System

- După ce s-a încheiat ședința de epilare cu beurer SalonPro System, oprți aparatul acționând *întrerupătorul de rețea*.
- Scoateți cablul de alimentare din priză.
- După fiecare ședință de epilare se recomandă curățarea aparatului dumneavoastră beurer SalonPro System, în special a *suprafeței luminoase* (consultați capitolul „9.1 Curățarea aparatului beurer SalonPro System”).
- După curățare se recomandă să păstrați aparatul dumneavoastră beurer SalonPro System în cutia sa originală și să îl protejați de apă.

8.2 Utilizarea la nivelul feței

AVERTIZARE

Nu folosiți aparatul beurer SalonPro System pe față la o treaptă de energie mai mare de 3.

Nu folosiți aparatul beurer SalonPro System pe față mai sus de pomeți sau la nivelul ochilor, sprâncnelor și genelor, întrucât se pot produce leziuni oculare grave.

Nu folosiți beurer SalonPro System pe mucoase în zona oro-nazală.

Pielea feței este foarte sensibilă și necesită îngrijire specială. Respectați în mod obligatoriu toate indicațiile de avertizare și de siguranță din instrucțiunile de utilizare pentru a evita consecințele. Vă recomandăm să efectuați mai întâi un tratament la nivelul corpului și să vă familiarizați cu aparatul înainte de a-l folosi la nivelul feței.

Cu beurer SalonPro System pot fi tratate toate zonele feței de la pomeți în jos, cum ar fi buza superioară, obraji, maxilar, bărbie și gât.


i Notă

Pentru a facilita utilizarea în zona feței, puteți utiliza accesoriul pentru față inclus în pachetul de livrare. Acesta reduce suprafața luminoasă și permite o utilizare precisă.

Puteți fixa cu ușurință accesoriul pentru față la nivelul aplicatorului prin așezarea și apăsarea pe suprafața luminoasă.

Așezați accesoriul pentru față, astfel încât decupajul corespunzător să se afle pe accesoriu peste senzorul pentru contactul cu pielea/culoarea pielii.

Dacă senzorul pentru contactul cu pielea/culoarea pielii este acoperit, nu este posibilă declanșarea unui impuls luminos.

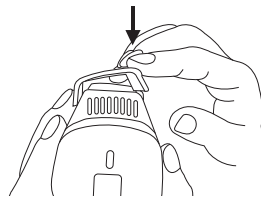

1. Este obligatoriu ca, 48 de ore înainte de tratament, să efectuați un test punctual de verificare a compatibilității pielii (consultați capitolul 7, etapa 2). Testul de verificare a compatibilității pielii trebuie realizat pe o suprafață fără păr, cum ar fi sub ureche sau lateral pe gât, pentru a se determina o treaptă de energie adecvată.

! AVERTIZARE

Epilați suprafața testată cel mai devreme după 1 săptămână de la testul de verificare a compatibilității pielii.

2. Marcați suprafața tratată cu un creion dermatograf alb. Folosiți marcajul ca linie de orientare pentru aplicarea impulsului. În felul acesta puteți evita ca suprafețele tratate să se suprapună sau puteți evita tratarea în zone ale feței în care nu doriți să epilați.
3. Folosiți o oglindă pentru a așeza aplicatorul corect pe suprafața de tratat.
4. Urmați instrucțiunile de utilizare (consultați capitolul anterior, 8.1 „Începerea utilizării”) și țineți cont în special de următoarele indicații specifice.

i Notă

Pielea de pe față poate avea cauze hormonale, astfel încât pentru o reducere permanentă a părului pot fi eventual necesare mai multe ședințe.

8.3 Utilizarea la nivelul buzei superioare

Așezați geamul aplicatorului ca în imagine. Declanșați în fiecare zonă marcată un impuls.

Nu utilizați la nări și pe buze, întrucât aceste locuri sunt mai sensibile.



i Notă

Puteți întoarce buzele dumneavoastră spre interior sau le puteți strânge pentru a întinde suprafața de tratat sau pentru a desena o linie groasă pe buze și marginile buzelor folosind creionul dermatograf alb. Prin linia albă se asigură reflectarea energiei blițului, astfel încât acesta să nu ajungă la buzele dumneavoastră dacă îndreptați din greșeală un impuls spre buzele dumneavoastră.

8.4 Utilizarea în zona obrazilor și a maxilarului

Așezați geamul aplicatorului ca în imagine. Declanșați în fiecare punct un impuls și deplasați de pe o parte a obrazilor sau maxilarului spre cealaltă parte.



8.5 Utilizarea în zona gâtului și a bărbiei

Așezați geamul aplicatorului ca în imagine. Declanșați în fiecare punct un impuls și deplasați de pe o parte a gâtului sau bărbiei spre cealaltă parte.



Notă

Indicație: Pielea este mai sensibilă în treimea inferioară a gâtului. Prin urmare, evitați suprafețe de tratare suprapuse.

8.6 Îngrijirea după un tratament la nivelul feței

- Aplicați o loțiune calmantă, cum ar fi de aloe vera.
- Evitați timp de cel puțin 24 de ore utilizarea de creme de exfoliere și de înălbire sau produse cores-punzătoare, deoarece se pot produce iritații ale pielii tratate.
- După utilizare, evitați timp de cel puțin 2 săptămâni expunerea la razele solare directe pe o durată mai mare de 15 minute. Dacă expuneți, în această perioadă, pielea recent tratată luminii solare, trebuie să folosiți în mod obligatoriu cremă cu factor de protecție solară FPS 30 sau mai mare.
- Evitați îndepărtarea părului din zonele tratate folosind ceară sau epilator/pensetă.

Rețineți că poate fi necesar un ciclu complet de creștere a părului până când obțineți rezultate complete în urma epilării.

9. Îngrijirea aparatului beurer SalonPro System

9.1 Curățarea aparatului beurer SalonPro System

După fiecare ședință de epilare se recomandă curățarea aparatului dumneavoastră beurer SalonPro System, în special a *suprafeței luminoase*.

ATENȚIE

Nu introduceți niciodată în apă beurer SalonPro System sau unul dintre componentele sale!

- Scoateți ștecărul aparatului beurer SalonPro System din priză înainte de curățare.
- Folosiți o cârpă uscată, curată și un agent de curățare conceput special pentru echipamente electro-nice pentru a șterge cu atenție suprafața aparatului beurer SalonPro System și, în special, a suprafe-ței luminoase.

9.2 Înlocuirea cartușului

Cartușul are o durată de viață de până la 250.000 de impulsuri luminoase. Când cartușul a atins 80 % din durata sa de viață, becul de control pentru „Cartuș gol” începe să lumineze intermitent, încet, roșu. Când se atinge valoarea de 90 %, acesta începe să lumineze intermitent mai rapid. De îndată ce au fost consumate toate impulsurile luminoase ale cartușului, nu se mai generează impulsuri luminoase suplimentare. În cazul acesta, becul de control pentru „Cartuș gol” luminează continuu roșu.

Notă

Cartușul trebuie înlocuit numai când se pot observa pete mari în interiorul acestuia sau dacă este spartă lentila. În acest caz, adresați-vă Serviciului pentru clienți Beurer.

10. Remedierea defecțiunilor

„Aparatul meu beurer SalonPro System nu mai poate fi pornit”

- Asigurați-vă că și cablul de alimentare este cuplat corect la aparatul beurer SalonPro System.
- Asigurați-vă că acest cablu de alimentare este conectat la o priză de perete.

„La apăsarea butonului de declanșare nu este emis niciun impuls luminos”

- Asigurați-vă că există un contact corespunzător cu pielea și că *suprafața luminoasă* este apăsată în piele în mod uniform și cu putere. Spre siguranța dumneavoastră, *butonul de declanșare* activează un impuls numai atunci când *suprafața luminoasă* este apăsată puternic pe piele.

- Verificați becul de control. Dacă *becul de control* la *aplicator* luminează roșu, înseamnă că pielea dumneavoastră, analizată de *senzorul pentru culoarea pielii*, are o culoare prea închisă pentru o utilizare în siguranță. Încercați aparatul în altă zonă de pe corp sau contactați serviciul pentru clienți dedicat beurer SalonPro System.

Dacă becul de control la *aplicator* luminează portocaliu, înseamnă că, la măsurarea cu ajutorul senzorului pentru contactul cu pielea, contactul a fost insuficient. Măriți contactul cu pielea sau contactați serviciul pentru clienți dedicat beurer SalonPro System.

- Cartușul are o durată de viață de până la 100.000 de impulsuri luminoase. Când cartușul a atins 80 % din durata sa de viață, becul de control pentru „Cartuș gol” începe să lumineze intermitent, încet, roșu. Când se atinge valoarea de 90 %, acesta începe să lumineze intermitent mai rapid. De îndată ce au fost consumate toate impulsurile luminoase ale cartușului, nu se mai generează impulsuri luminoase suplimentare. În cazul acesta, becul de control pentru „Cartuș gol” luminează continuu roșu.
- În cazul unei defecțiuni generale, toate cele 6 *becuri de control pentru energie* luminează concomitent intermitent verde. Realizați o resetare a aparatului. Dacă problemele cu aparatul dumneavoastră persistă, apălați la serviciul nostru pentru clienți.
- Verificați *becul de control*. Dacă *becul de control* la *aplicator* luminează intermitent roșu și *becul de control* la aparat luminează intermitent verde, înseamnă că nu este așezat corect cartușul în *aplicator*. Reintroduceți cartușul în *aplicator*.

11. Întrebări frecvente

1. Funcționează beurer SalonPro System cu adevărat?

Da. Testele clinice, efectuate de medici, au arătat că, folosind tehnologia din beurer SalonPro System, se pot obține într-un mod sigur rezultate de epilare durabile.

2. În ce zone ale corpului pot utiliza beurer SalonPro System?

beurer SalonPro System a fost conceput pentru epilarea întregului corp. Zonele tratate cel mai frecvent cu beurer SalonPro System sunt picioarele, zona axială, brațele, zona inghinală și fața de la pomeți în jos.

3. Cât durează o ședință de tratament cu beurer SalonPro System?

Durata poate varia în funcție de zona tratată a corpului. Tratamentul pe întregul corp (picioare, brațe, zona axilară, zona inghinală și fața de la pomeți în jos) durează aproximativ 26 de minute. Întrucât beurer SalonPro System funcționează cu curent electric poate fi utilizat cât este necesar pentru a realiza o ședință completă de epilare în zona sau în zonele dorite ale corpului.

4. Este sigur beurer SalonPro System?

beurer SalonPro System a fost dezvoltat punându-se accent în special pe siguranța dumneavoastră și folosește o tehnologie testată clinic. Însă acest aparat, ca orice produs sau echipament electronic destinat utilizării pe piele, trebuie folosit în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și indicațiile de siguranță pentru utilizator.

5. Produce dureri aparatul beurer SalonPro System?

În cazul unei utilizări corecte, majoritatea utilizatorilor aparatului beurer SalonPro System au raportat că în momentul eliberării impulsului luminos simt o ușoară senzație de căldură. Utilizatorii cu păr mai gros și de culoare închisă pot simți mai intens o senzație neplăcută, însă această senzație dispare de îndată ce a fost încheiată ședința de epilare. Aparatul beurer SalonPro System dispune de 6 setări pentru energie, pe care le puteți utiliza în funcție de sensibilitatea dumneavoastră.

6. Cât de des să utilizez aparatul beurer SalonPro System?

În cazul tratamentelor de epilare la nivelul corpului folosind beurer SalonPro System, primele patru ședințe trebuie realizate la interval de două săptămâni. Ședințele cinci până la șapte, inclusiv, trebuie să aibă loc la intervale de patru săptămâni. Toate celelalte ședințe trebuie realizate dacă părul a crescut din nou, până când se obțin rezultatele dorite.

În cazul tratamentelor de epilare la nivelul feței, de la pomeți în jos, primele șase ședințe trebuie realizate la interval de două săptămâni. Ședințele șapte până la douăsprezece, inclusiv, trebuie să aibă loc la intervale de patru săptămâni. Toate celelalte ședințe trebuie realizate dacă părul a crescut din nou, până când se obțin rezultatele dorite.

7. Este eficace aparatul beurer SalonPro System la păr alb, gri sau blond?

beurer SalonPro System funcționează cel mai bine la tipuri de păr de culoare mai închisă sau la păr care conține mai multă melanină. Melanina este pigmentul care conferă părului și pielii culoarea sa și care preia energia luminoasă. Părul negru și șaten prezintă cele mai bune reacții. Părul maro și maro deschis reacționează, de asemenea, însă au nevoie, în mod normal, de mai multe ședințe de epilare. La păr roșcat este posibil un anumit efect. Părul alb, gri sau blond nu reacționează de obicei la beurer SalonPro System, deși unii utilizatori au observat rezultate după mai multe ședințe de epilare.

8. Pot folosi aparatul beurer SalonPro System pe piele maro sau neagră?

Nu folosiți beurer SalonPro System pe piele de culoare naturală închisă! Nu funcționează! beurer SalonPro System este un aparat bazat pe lumină, care elimină părul nedorit prin tratarea selectivă a pigmentului părului. Și în țesutul înconjurător există o cantitate diferită de pigmenți. Cantitatea de pigment din pielea unei anumite persoane, care poate fi observată în funcție de culoarea pielii, determină gradul de risc la care persoana se expune în cazul utilizării aparatului beurer SalonPro System. Tratarea pielii de culoare închisă prin epilarea bazată pe lumină poate avea urmări negative precum arsuri, bășici și modificarea culorii pielii (hiper- sau hipopigmentare). În beurer SalonPro System este integrat un *senzor pentru culoarea pielii*, care măsoară la începutul fiecărei ședințe de tratament și uneori pe parcursul ședinței culoarea pielii tratate. *Senzorul pentru culoarea pielii* împiedică emiterea altor impulsuri de către beurer SalonPro System, dacă se recunoaște că aparatul este utilizat la nuanțe mai închise ale pielii.

9. Începând de când se observă rezultate în urma utilizării aparatului beurer SalonPro System?

Ca la orice alt aparat de epilare bazat pe lumină sau laser, rezultatele nu sunt vizibile imediat și chiar ați putea avea impresia că nu s-a întâmplat nimic. Uneori, după o ședință de epilare pare ca și cum părul ar crește la loc, însă, în mod normal, multe dintre aceste fire de păr cad după două săptămâni. În plus, părul crește în trei faze diferite și numai părul aflat într-o fază de creștere activă va fi influențat de beurer SalonPro System. Acesta este unul dintre motivele principale pentru care sunt necesare mai multe ședințe până la atingerea rezultatului dorit.

10. Poate fi utilizat aparatul beurer SalonPro System de către bărbați?

Deși beurer SalonPro System a fost dezvoltat pentru femei, poate fi potrivit și pentru bărbați. Însă părul bărbaților, în mod tipic cel de pe piept, necesită pentru obținerea rezultatelor dorite mai multe ședințe de epilare decât în cazul femeilor.

11. De ce crește părul meu, deși l-am tratat cu o săptămână în urmă?

Este posibil să aveți senzația că părul crește în continuare până la două săptămâni de la ședința de epilare cu beurer SalonPro System. Acest proces este cunoscut sub denumirea de „ejectare”, iar după aproximativ două săptămâni veți observa că aceste fire de păr cad pur și simplu sau pot fi scoase trăgând ușor de ele. (Totuși, nu este recomandat să trageți de firele de păr – lăsați-le să cadă pe cale naturală.) Este, de asemenea, posibil ca unele fire de păr să nu fie influențate de beurer SalonPro System ca urmare a unui tratament uitat sau a fazelor de creștere diferite. Aceste fire de păr vor fi tratate în cadrul ședințelor ulterioare și, prin urmare, acesta este motivul pentru care sunt necesare mai multe ședințe de epilare pentru a obține cel mai bun rezultat cu beurer SalonPro System.

12. Am auzit că unele fire de păr cresc mai subțire și mai fin după o epilare bazată pe lumină.

Acest fenomen a fost observat în detaliu de cosmeticienii și medicii care utilizează aparate cu lumină și aparate cu laser pentru epilare. Este posibil ca unele fire de păr să crească mai subțire și mai fin după o epilare cu beurer SalonPro System. În mod normal, aceste fire de păr reprezintă doar o fracțiune a celor care au fost acolo inițial, iar continuarea tratamentului poate avea efectul dorit asupra lor.

13. De ce nu mă pot trata personal dacă am un bronz „activ”?

Nu folosiți beurer SalonPro System pe piele bronzată sau după expunerea la soare. Pielea bronzată, în special după expunerea la soare, conține o cantitate mare din pigmentul melanină. Acest lucru este valabil pentru toate tipurile și culorile de piele, inclusiv la persoane care nu par a se bronză prea repede. Existența unei cantități mari de melanină supune pielea unui risc mărit de consecințe negative în legătură cu utilizarea aparatului beurer SalonPro System, incluzând arsuri, bășici și modificări ale culorii pielii (hiper- și hipopigmentare).

14. Utilizarea pe termen lung a aparatului beurer SalonPro System este periculoasă pentru pielea mea?

Utilizarea energiei luminoase și energiei laser în medicina estetică este documentată în detaliu de peste 15 ani în reviste de specialitate profesionale, verificate de experți, precum și în unități renumite precum clinica Mayo. Aceste reviste și unități nu au semnalat niciun fel de efecte negative sau daune în urma utilizării pe termen lung a aparatelor cu lumină sau cu laser.

15. Pot să utilizez aparatul beurer SalonPro System pentru a îndepărta părul de pe bărbie sau alt păr de la nivelul feței?

beurer SalonPro System **poate** fi utilizat pentru tratamentul părului de la nivelul feței de la pomeți în jos. În cazul utilizării la nivelul feței trebuie să aveți grijă în special să evitați zona ochilor: beurer SalonPro System nu trebuie utilizat în niciun caz în jurul ochilor sau la ochi. Și la fel ca și la alte părți ale corpului, trebuie evitată expunerea la soare înainte și după tratamentul cu beurer SalonPro System. Mijloace de protecție solară acceptabile sunt haine care acoperă zonele în cauză sau creme de protecție solară (cel puțin FPS 50), care vor fi purtate sau utilizate continuu înainte și după tratamente.

16. Cât timp trebuie să întrerup tratamentul cu beurer SalonPro System după o expunere neprotejată la soare?

Trebuie să așteptați 2 săptămâni înainte de a utiliza beurer SalonPro System după expunerea neprotejată la soare. Dacă totuși aveți dubii în legătură cu o expunere la soare consultați medicul dumneavoastră.

17. Trebuie să fac ceva anume înainte de a utiliza beurer SalonPro System?

Anterior fiecărei ședințe cu beurer SalonPro System este important să evitați expunerea la soare a suprafeței tratate pentru cel puțin 2 săptămâni. Utile pot fi o cremă de protecție solară (FPS 50+) și îmbrăcăminte care acoperă suprafața tratată. Suplimentar, suprafața de tratat trebuie curățată cu un săpun blând și cu apă, iar părul trebuie ras până la suprafața pielii.

18. Cum să îngrijesc suprafața tratată după utilizarea aparatului beurer SalonPro System?

Suprafața care a fost tratată cu beurer SalonPro System poate fi curățată și îngrijită cu produse uzuale pentru îngrijirea pielii. Trebuie să aveți în vedere în special evitarea expunerii neprotejate la soare. Cremele de protecție solară cu factor de protecție solară ridicat (50+) și haine care acoperă pielea reprezintă o protecție solară potrivită.

12. Eliminarea ca deșeu

Vă rugăm să eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi.

Pentru întrebări suplimentare adresați-vă autorității responsabile cu eliminarea deșeurilor.



13. Date tehnice

Suprafața de tratat	7 cm ²	
Tehnologie	IPL (Intense Pulsed Light) pentru utilizarea în gospodărie	
Lungime de undă	475-1200 nm	
Nivel max. de energie	max. 5 J/cm ²	
Trepte de energie reglabile	6	
Alimentare cu energie electrică	100-240 V AC, 50-60 Hz	
Viteză	1 impuls la intervale de 3 secunde: 2,3 (cm ² pe secundă)	
Nr. max. de impulsuri în lampă	250000	
Temperatură	Operare	10-40 °C
	Depozitare	-10-70 °C
Umiditate relativă a aerului	Operare	30-70 % umid. rel.
	Depozitare	0-90 % umid. rel. la 55 °C (fără condensare)
Aparat din clasa II		
WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment		
Marcajul CE		
Țineți cont de instrucțiunile de utilizare		

Tabel pentru culoarea părului și a pielii

Tip piele Păr	I	II	III	IV	V	VI
Negru	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Șaten	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Maro	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Blond închis	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Blond deschis	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Roșcat	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Gri/alb	✗	✗	✗	✗	✗	✗



- RO * Alegeți treapta de energie bazându-vă în special pe starea dumneavoastră de bine.
 ** Cu cât treapta de energie este mai mare, cu atât este mai eficient tratamentul

