



RO Epilare
Instrucțiuni de utilizare



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le la dispoziție altor utilizatori și respectați indicațiile.

AVERTIZARE

- Aparatul și adaptorul sunt destinate exclusiv utilizării în gospodărie sau uzului privat, nu uzului comercial.
- Aparatul este adecvat numai pentru persoane peste 18 ani.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Verificați înainte de fiecare utilizare dacă aparatul și cablul de alimentare sunt în stare intactă. În caz de deteriorări nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului.
- Aparatul și adaptorul nu trebuie să intre în contact cu umezeala.
- Nu utilizați aparatul în apropierea mediilor umede precum căzi, chiuvete, dușuri sau alte vase care conțin apă sau alte lichide – pericol de electrocutare!
- Nu priviți niciodată în lumină.
- Nu introduceți obiecte în aparat.
- Aveți grijă ca fantele de aerisire ale aparatului să nu fie acoperite.
- Dacă aparatul este deteriorat, nu atingeți componentele interne pentru a evita pericolul de electrocutare.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie eliminat. Dacă acesta nu este detașabil, aparatul trebuie să fie eliminat.
- Nu lăsați niciodată aparatul să funcționeze nesupravegheat. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu sunteți autorizat(ă) în niciun caz să demontați sau să reparați aparatul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În caz de nerespectare a acestei prevederi, se pierde garanția.

Stimată clientă, stimate client,

Ne bucurăm că ați ales un produs din gama noastră. Marca noastră este sinonimă cu produse de calitate, testate riguros, din domenii precum căldură, greutate, tensiune, temperatură corporală, puls, terapie, masaj, frumusețe și aer.

Cu deosebită considerație,

Echipa dumneavoastră Beurer

Cuprins

1. Pachet de livrare	3
2. Explicația simbolurilor	4
3. Utilizarea conform destinației	5
4. Indicații de avertizare și de siguranță	5
5. Ce este beurer Velvet Skin Pro?	8
6. Descrierea aparatului	9
7. Punerea în funcțiune	11
ETAPA 1: Verificați dacă aparatul beurer Velvet Skin Pro este potrivit pentru dumneavoastră.....	11
ETAPA 2: Test de verificare a compatibilității pielii.....	11
ETAPA 3: Pentru a obține rezultate optime, planificați epilarea cu beurer Velvet Skin Pro	12
ETAPA 4: Pregătiți zona de epilat	12
ETAPA 5: Setati intensitatea de energie/recunoașterea automată a nuanței de piele.....	13
ETAPA 6: Familiarizarea cu posibile efecte secundare la utilizarea aparatului beurer Velvet Skin Pro.....	13
ETAPA 7: La ce rezultate trebuie să vă așteptați în urma utilizării aparatului beurer Velvet Skin Pro?.....	14
8. Utilizare	15
8.1 Începerea utilizării	15
8.2 Utilizarea la nivelul feței.....	16
8.3 Îngrijirea după un tratament la nivelul feței	17
9. Curățarea și întreținerea	17
10. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?	18
11. Întrebări frecvente	18
12. Eliminarea ca deșeu	20
13. Date tehnice	21
14. Garanție/Service	21





















1. Pachet de livrare



Verificați aparatul pentru a vă asigura că starea ambalajului este ireproșabilă și conținutul este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau contactați-ne la adresa de service menționată.

- 1 x aparat beurer IPL Velvet Skin Pro
- 1 x accesoriu de precizie
- 1 x adaptor de rețea
- 1 x exemplar din prezentele instrucțiuni de utilizare
- 1 x geantă de depozitare

2. Explicația simbolurilor

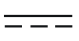În instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de fabricație a aparatului sunt utilizate următoarele simboluri:

 AVERTIZARE	Indicație de avertizare privind pericolele de accidentare sau pericolele pentru sănătate.
 ATENȚIE	Indicație de siguranță privind posibile daune ale aparatului/accesoriilor.
 Indicație	Indicație privind informații importante.
 PERICOL	Nu utilizați aparatul în apropierea apei sau în apă (de exemplu chiuvetă, duș, cadă) – pericol de electrocutare!
	Respectați instrucțiunile de utilizare
	Aparatul prezintă izolație dublă de protecție și corespunde, prin urmare, clasei de protecție 2.
	Atenție: radiații optice.
	A se utiliza exclusiv în spații închise.
	A se proteja împotriva umezelii.
	A nu se apropia de ochi!
	A nu se utiliza pe piele bronzată sau după expunerea la soare.
	Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi.
	Marcaj CE Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.
	Marcaj de evaluare a conformității pentru Regatul Unit
	S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE).
 PAP	Eliminați ambalajul în mod ecologic
 Storage / Transport	Temperatură de depozitare și transport și umiditate a aerului la transport admise
	Producător
	Curent continuu Aparatul este adecvat numai pentru curent continuu
	Polaritate

	Eficientă energetică, nivelul 6
 Pro Cf. Hg	Nu eliminați la gunoiul menajer baterii care conțin substanțe nocive

3. Utilizarea conform destinației

Aparatul beurer Velvet Skin Pro este destinat îndepărtării părului nedorit la adulți.

Zonele ideale ale corpului pentru utilizarea beurer Velvet Skin Pro sunt picioarele, zona axilară, zona inghinală, pieptul, abdomenul și fața de la pomeți în jos. Aparatul nu este destinat epilării la anus, la organele genitale sau la mameloane. Utilizați-l numai conform instrucțiunilor de utilizare.

4. Indicații de avertizare și de siguranță

AVERTIZARE

Anterior utilizării aparatului, citiți cu atenție indicațiile de siguranță și urmați-le întocmai când utilizați beurer Velvet Skin Pro. Nerespectarea următoarelor indicații poate să conducă la vătămări sau la daune materiale. Păstrați prezentele instrucțiuni de utilizare și permiteți altor utilizatori accesul la acestea. Aveți grijă să atașați prezentele instrucțiuni de utilizare când dați aparatul unor terți.

- Acest aparat poate fi utilizat de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau psihice reduse numai sub supravegherea unei persoane responsabile sau dacă au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea acestui aparat.
- Nu folosiți beurer Velvet Skin Pro în timpul sarcinii sau alăptării.
- Dacă observați roșeață accentuată, formarea de bășici sau arsuri pe piele, **ÎNTRERUPEȚI IMEDIAT UTILIZAREA!**
- Cu 48 de ore înainte de prima utilizare a aparatului beurer Velvet Skin Pro, realizați un test de verificare a compatibilității cu pielea pe o porțiune mică de piele în zona pe care doriți să o epilați (consultați capitolul 7, etapa 2: „Test de verificare a compatibilității pielii”).
- Nu priviți în niciun caz direct în lumina generată de lampa IPL. Este posibil ca acest produs să emită radiații optice periculoase. Aveți grijă ca suprafața luminoasă a accesoriului să se afle complet în contact cu pielea.
- Nu încercați niciodată să generați un impuls luminos în aer!
- Folosind tabelul pentru culoarea părului și a pielii de pe versoul prezentelor instrucțiuni de utilizare, determinați intensitatea luminoasă cea mai potrivită pentru pielea și pentru părul dumneavoastră sau stabiliți dacă această metodă este adecvată pentru dumneavoastră (cazurile de incompatibilitate sunt marcate cu „x” în tabel).
- Nu folosiți beurer Velvet Skin Pro pe piele de culoare naturală închisă. Utilizarea aparatului beurer Velvet Skin Pro pe piele de culoare închisă poate avea urmări negative precum arsuri, bășici și modificarea culorii pielii (hiperpigmentare sau hipopigmentare).
- Beurer Velvet Skin Pro funcționează cel mai bine la tipuri de păr de culoare mai închisă sau la păr care conține mai multă melanină. Părul negru și șaten prezintă cele mai bune reacții; deși va reacționa și părul maro și maro deschis, acesta necesită în mod normal mai multe ședințe de epilare. Părul roșcat ar putea prezenta o reacție. Părul alb, gri sau blond nu reacționează de obicei la beurer Velvet Skin Pro, deși unii utilizatori au observat rezultate după mai multe ședințe de epilare.
- Beurer Velvet Skin Pro poate să cauzeze o pigmentare temporară.
- Nu încercați să deschideți sau să reparați aparatul dumneavoastră beurer Velvet Skin Pro. La deschiderea aparatului beurer Velvet Skin Pro, puteți intra în contact cu componente electrice periculoase sau cu impulsuri de energie luminoasă, ceea ce poate cauza vătămări grave și/sau leziuni oculare iremediabile.

PERICOL

Țineți aparatul beurer Velvet Skin Pro departe de apă! beurer Velvet Skin Pro este un echipament electric. Nu-l așezați în apă și nu-l lăsați să cadă în apă sau în alte lichide.



Acest lucru poate duce la electrocutare cu efecte grave!

- Nu utilizați aparatul beurer Velvet Skin Pro când faceți baie.
- Nu utilizați aparatul beurer Velvet Skin Pro dacă acesta s-a umezit sau udat.
- Dacă aparatul beurer Velvet Skin Pro a căzut în apă, nu încercați să-l scoateți
- Nu atingeți niciodată ștecherul și aparatul cu mâini umede!

Indicații privind manipularea acumulatorilor

- În cazul în care lichidul din celula acumulatorului intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locurile afectate cu apă și căutați ajutor de specialitate.
- Protejați acumulatorii de căldura excesivă.
- Pericol de explozie! Nu aruncați acumulatorii în foc.
- Nu dezasamblați, deschideți sau rupeți acumulatorii.
- Utilizați numai aparatele de încărcare indicate în instrucțiunile de utilizare.
- Înainte de utilizare, acumulatorii trebuie încărcate corect. Pentru o încărcare corectă trebuie să respectați întotdeauna indicațiile producătorului, respectiv informațiile din aceste instrucțiuni de utilizare.
- Înainte de prima punere în funcțiune, încărcați complet acumulatorul.
- Pentru a atinge cea mai lungă durată de viață posibilă a acumulatorului, încărcați acumulatorul complet de cel puțin 2 ori pe an.

ATENȚIE

Pentru evitarea deteriorărilor

- Nu încercați să deschideți sau să reparați aparatul dumneavoastră beurer Velvet Skin Pro. Aparatul beurer Velvet Skin Pro se poate deteriora și puteți pierde garanția dacă încercați să-l deschideți.
- În timpul utilizării, nu expuneți aparatul unor temperaturi mai mici de 10 °C sau mai mari de 40 °C.
- Aparatul nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat atunci când acumulatorul este cuplat la priză.
- Utilizați beurer Velvet Skin Pro numai în scopul și în modul descris în instrucțiunile de utilizare.
- Nu puneți în funcțiune beurer Velvet Skin Pro când este deteriorat un cablu sau un ștecher și nu apropiați cablul de alimentare de suprafețe încălzite.
- Scoateți ștecherul aparatului beurer Velvet Skin Pro din priză înainte de curățare.
- Scoateți ștecherul din priză după încărcarea acumulatorului.
- Nu utilizați beurer Velvet Skin Pro cu accesorii care nu sunt recomandate de firma Beurer GmbH.
- Nu folosiți beurer Velvet Skin Pro dacă observați sau mirosiți fum în timpul utilizării aparatului.
- Nu utilizați beurer Velvet Skin Pro dacă nu funcționează corect sau dacă pare deteriorat.
- Nu utilizați beurer Velvet Skin Pro dacă senzorul pentru culoarea pielii de sub suprafața luminoasă prezintă fisuri sau rupturi.
- Nu folosiți beurer Velvet Skin Pro în cazul în care carcasa exterioră este fisurată sau se descompune.
- Nu folosiți beurer Velvet Skin Pro în cazul în care suprafața luminoasă este fisurată sau ruptă sau dacă lipsește.
- Nu folosiți beurer Velvet Skin Pro dacă are un cablu deteriorat sau un ștecher deteriorat.
- Încărcați aparatul numai cu adaptorul livrat.
- Nu utilizați aparatul în cazul în care filtrul UV al ferestrei de urgență a luminii este deteriorat.
- Nu utilizați accesoriul de precizie dacă filtrul este deteriorat.
- Asigurați-vă că există un curent de aer neobstrucționat prin orificiile de aer.

AVERTIZARE

Nu folosiți beurer Velvet Skin Pro în niciun caz dacă suferiți de una dintre următoarele boli:

- Dacă aveți sau ați avut cancer de piele.
- Dacă suferiți de epilepsie.
- Dacă prezentați cheloide cicatriceale.
- Dacă aveți herpes sau psoriazis.
- Dacă sunteți fotosensibil sau suferiți de alte sensibilități la lumină, cum ar fi porfirie, erupție polimorfă la lumină, urticarie fotosensibilă, lupus etc.
- Dacă suferiți de boli ale metabolismului, cum ar fi diabetul.
- Dacă aveți probleme cu coagularea sângelui.

Nu folosiți beurer Velvet Skin Pro în niciun caz dacă luați unul dintre următoarele medicamente:

- Dacă luați medicamente care cresc fotosensibilitatea pielii, inclusiv antireumatice nesteroidiene (de exemplu aspirină, ibuprofen, paracetamol), tetraciclină, fenotiazină, diuretice cu tiaxidă, sulfoniluree, sulfonamide, DTIC, fluorouracil, vinblastină, griseofulvină, acizi alfa-hidroxicilici (AHA), acizi beta-hidroxicilici (BHA), Retin-A[®], Accutane[®] și/sau retinoizi topici.
- Dacă ați fost tratat/ă recent sau vă aflați în prezent sub tratament cu acid azelaic.
- Dacă ați luat în ultimele două săptămâni antibiotice cu tetraciclină.
- Dacă ați fost tratat în ultimele 6 luni cu Accutane[®] (izotretinoină).
- Dacă ați urmat în ultimele 3 luni o cură cu steroizi.
- Dacă ați fost supus în ultimele 6-8 luni unui peeling cutanat sau altei proceduri de netezire a pielii.
- Dacă ați fost supus în ultimele 3 luni unei radioterapii sau chimioterapii.

Nu utilizați în niciun caz beurer Velvet Skin Pro în următoarele locuri:

- Pe mucoase în zona oro-nazală.
- Pe sau lângă un implant activ, cum ar fi stimulator cardiac, aparat pentru incontinență, pompă de insulină etc.
- În cazul femeilor, pe față de la pomeți în sus, în jurul ochilor, sprâncenelor sau genelor, întrucât se pot produce leziuni oculare grave.
- În cazul bărbaților, pe întreaga față și la nivelul gâtului.
- La mameloane, organele genitale (masculine sau feminine) sau în jurul anusului.
- Pe piercinguri sau alte obiecte metalice, precum cercei sau bijuterii.
- Pe un tatuaj sau pe machiaj permanent în zona de tratat.
- Pe pete de culoare maro închis sau negru, cum ar fi pistrii de mari dimensiuni, alunițe, pete hepatice sau veruci.
- Pe eczeme, psoriazis, leziuni, răni deschise sau infecții acute. Așteptați până s-a vindecat locul în cauză înainte de a utiliza beurer Velvet Skin Pro.
- Pe piele cu leziuni, pe piele crăpată sau în zone cu risc de malignitate.
- În locuri în care există posibilitatea să doriți să aveți păr la un moment dat.



Indicații de avertizare privind expunerea la soare înainte și după tratament!

Expunerea la soare înainte de tratament

1. După expunerea la soare, așteptați cel puțin 2 săptămâni înainte de a utiliza aparatul.
2. Înainte de tratament, asigurați-vă că pielea nu prezintă niciun eritem solar. Dacă eritemul solar nu s-a vindecat, nu utilizați aparatul decât după vindecarea completă.
3. Acum efectuați testul de verificare a compatibilității pielii (consultați capitolul 7, etapa 2) pentru a determina intensitatea de energie corespunzătoare.



Expunerea la soare după tratament

1. După tratament, așteptați cel puțin 48 de ore înainte de a vă expune la soare. Nu expuneți la soare pielea încă înroșită!
2. În primele două săptămâni după tratament, acoperiți pielea tratată cu haine pentru a vă proteja împotriva contactului cu razele solare sau aplicați cremă de protecție solară (minim FPS 30).

Bronzarea cu lumină artificială


Instrucțiunile din „Expunerea la soare înainte de tratament“ și „Expunerea la soare după tratament“ sunt valabile, de asemenea, pentru bronzarea cu lumină artificială și cu loțiuni de bronzat.

După o vizită la saună/piscină, faceți o pauză de 24 de ore înainte de a utiliza aparatul, deoarece pot apărea iritații ale pielii din cauza clorului.

i Indicație


Această listă nu are caracter exhaustiv. Dacă nu sunteți sigur că puteți utiliza aparatul beurer Velvet Skin Pro în siguranță, consultați medicul sau dermatologul dumneavoastră.

5. Ce este beurer Velvet Skin Pro?

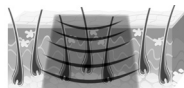

Înainte de utilizarea aparatului beurer Velvet Skin Pro

Beurer Velvet Skin Pro este un aparat bazat pe lumină pentru epilarea definitivă, fiind destinat uzului personal. Metoda de epilare bazată pe laser și lumină este bine cunoscută și testată. În cei peste 15 ani de utilizare clinică pe întreg globul pământesc, aceasta s-a dovedit a fi sigură și eficientă în reducerea părului pe termen lung.

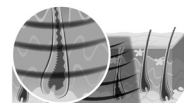


În timpul unui impuls generat de beurer Velvet Skin Pro

Cum îndepărtează lumina părul?

Epilarea bazată pe lumină are la bază teoria fototermolizei selective, la care se folosește energia optică pentru a dezactiva creșterea părului. Pentru a obține un astfel de efect termic, tulpina firului de păr trebuie să preia în mod selectiv energia luminoasă și să o transforme în căldură.

Această selectivitate se obține atunci când energia optică generată spre țesut este preluată în principal de pigmentul tulpinii firului de păr în timp ce pielea și țesutul dimprejur rămân reci. Melanina este pigmentul din tulpina firului de păr care este responsabil pentru absorbția luminii și care produce căldura, care, în cele din urmă, dezactivează creșterea părului. În consecință, se poate absorbi cu atât mai multă lumină și lumina poate fi cu atât mai eficientă la epilare cu cât există mai multă melanină în păr (cu alte cuvinte, cu cât părul este mai închis la culoare).

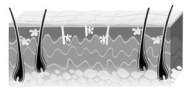

După utilizarea aparatului beurer Velvet Skin Pro



Anagen – fază de creștere

Ce influență are ciclul de creștere a părului asupra epilării bazate pe lumină?

Orice fir de păr de pe corpul nostru trece prin cele trei faze ale ciclului de creștere a părului: Anagenă, catagenă și telogenă. Aceste trei faze au o mare influență asupra măsurii în care funcționează epilarea bazată pe lumină.


Faza anagenă este faza de creștere a părului, în timp ce faza catagenă este cea de tranziție, iar faza telogenă este cea latentă.



Catagen – fază de tranziție

Durata unui ciclu complet de creștere a părului diferă de la om la om și depinde de zona corpului în care se află părul, însă de obicei este de 18 - 24 de luni. La un anumit moment, majoritatea foliculelor de păr de pe o suprafață a pielii se află în faza latentă. Aparatul beurer Velvet Skin Pro nu are efect asupra acestui păr.

Însă firele aflate în faza de creștere anagenă reacționează la utilizarea aparatului beurer Velvet Skin Pro. Trebuie să rețineți că este necesar cel puțin un ciclu complet de creștere a părului pentru a obține o epilare de lungă durată cu beurer Velvet Skin Pro.

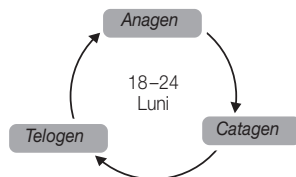

Telogen – fază latentă

La beurer Velvet Skin Pro, siguranța este pe primul loc

- **Tehnologia IPL a aparatului beurer Velvet Skin Pro – siguranță maximă la un nivel mai mic de energie**

Cu tehnologia Intense Pulsed Light (IPL) se pot obține rezultate de epilare pe termen lung cu o fracțiune din nivelul de energie utilizat la alte aparate de epilare bazate pe lumină. Nivelul redus de energie utilizat la beurer Velvet Skin Pro reduce eventuala posibilitate de apariție a daunelor sau complicațiilor și contribuie la siguranța dumneavoastră generală.

- **beurer Velvet Skin Pro vă protejează pielea**


Epilarea bazată pe lumină nu este potrivită pentru piele de culoare naturală mai închisă sau piele bronzată. În beurer Velvet Skin Pro este integrat un *senzor pentru culoarea pielii*, cu care poate fi măsurată culoarea suprafeței de piele care urmează a fi epilată astfel încât este posibilă utilizarea numai la culori potrivite ale pielii. Această funcție de siguranță împiedică utilizarea pe pielea dumneavoastră dacă are o culoare prea închisă sau dacă este bronzată prea puternic. Fereastra de lumină a aparatului dispune de protecție UV integrată, prin intermediul căreia sunt blocate razele UV periculoase.


- **beurer Velvet Skin Pro vă protejează ochii**

Pentru a proteja ochii, beurer Velvet Skin Pro dispune de un senzor integrat pentru contactul cu pielea. Acesta a fost creat pentru a împiedica emiterea unui impuls luminos când aparatul este ținut în aer. Blițul este declanșat numai după ce senzorul pentru contactul cu pielea este așezat pe piele.

6. Descrierea aparatului

	1. Lampă de emisie a impulsurilor
	2. Fereastră de lumină
	3. Butonul de declanșare (după declanșarea consecutivă a 3 blițuri) comută în modul „Auto Flash”.
	4. Afișajul treptelor de energie
	5. Afișajul nivelului de încărcare al acumulatorului
	6. Tastă de selectare a energiei
	7. Tastă pentru recunoașterea automată a nuanței pielii
	8. Tasta ON/OFF
	9. Bec de control
	10. Senzor pentru nuanța pielii și pentru contactul cu pielea
	11. Mufă de încărcare
	12. Accesoriu de precizie

1. **Tasta PORNIRE/OPRIRE** – Aparatul se pornește și se oprește prin apăsarea normală a tastei . Aparatul se oprește automat dacă nu este utilizat timp de cinci minute. La pornirea aparatului, toate lămpile de pe afișajul treptelor de energie luminează scurt, după care aparatul comută în treapta de energie 1.

2. **Tasta pentru recunoașterea automată a nuanței de piele** – Prin apăsarea normală a tastei , puteți stabili treapta de energie recomandată pentru utilizarea pe porțiunea de piele respectivă. Atunci când această tastă este apăsată, luminează și toate tastele de selectare a energiei luminează intermitent timp de zece secunde. Dacă senzorul pentru contactul cu pielea se află complet în contact cu zona de tratament dorită și este emis un impuls luminos, treapta de energie

recomandată (în funcție de nuanța pielii de pe porțiunea tratată) este setată automat; afișajul treptelor de energie luminează corespunzător.

Din acest motiv, este indicat ca treapta de energie recomandată să se selecteze numai atunci când este apăsată tasta corespunzătoare, nu atunci când se schimbă nuanța pielii, respectiv zona de tratament.

3. **Tastele de selectare a energiei** – Tasta + (treaptă de energie mai mare) și – (treaptă de energie mai mică) vă permit să selectați una din cele șapte trepte de energie diferite. Selectați treapta de energie în funcție de confortul dumneavoastră, respectiv de testul de verificare a compatibilității cu pielea. Pentru selectarea treptei optime de energie, puteți utiliza tasta pentru recunoașterea automată a nuanței de piele pentru fiecare zonă de tratament.

- Prin apăsarea tastei + sau - (după pornirea aparatului), aparatul comută într-o treaptă superioară sau inferioară. Fiecare apăsare suplimentară modifică treapta de energie, selecția pornind de la cea mai joasă (marcată cu „1”) și cea mai înaltă treaptă (marcată cu „6”).
- După fiecare selectare a treptei de energie, mai multe lămpi de pe afișajul treptelor de viteză luminează corespunzător.

4. **Afișajul nivelului de încărcare al acumulatorului** – Acest afișaj oferă informații referitoare la nivelul de încărcare al acumulatorului:

- Roșu – Acumulatorul se încarcă.

Indicație: În mod suplimentar, această lampă luminează roșu și atunci când aparatul este pornit la treapta de energie 1.

- Verde – Acumulatorul este încărcat complet, iar aparatul este conectat la sursa externă de alimentare cu energie.
- Roșu, intermitent lent – Nivel de încărcare scăzut al acumulatorului (aproximativ 30%).
- Roșu, intermitent rapid – Nivel de încărcare foarte scăzut al acumulatorului (aproximativ 10%).

Indicație: Afișajul nivelului de încărcare al acumulatorului luminează numai verde, respectiv numai roșu, atunci când aparatul este pornit.

5. **Becul de control** – Acest afișaj de pe partea din spate a aparatului dispune de mai multe led-uri de stare diferite (consultați tabelul următor).

Afișaj	Mod	
Aprins, verde	Pornit	Pregătit pentru impulsul luminos. La transmiterea unui impuls luminos, respectiv între impulsurile luminoase, nu luminează nicio lampă.
Aprins continuu, portocaliu	Declanșarea (impulsul luminos) este blocată.	Aparatul nu transmite niciun impuls luminos din cauza unui contact insuficient cu pielea.
Aprins continuu, roșu	Declanșarea (impulsul luminos) este blocată.	Din cauza unei nuanțe de piele neadecvate (valoarea Fitzpatrick mare, potrivit indicației de pe versoul instrucțiunilor de utilizare), aparatul nu transmite niciun impuls.
Luminează intermitent, portocaliu	Indicație privind sfârșitul duratei de viață	Indică sfârșitul timpului al duratei de viață a lămpii de emisie a impulsurilor.
Aprins, roșu	A fost atins sfârșitul duratei de viață.	Aparatul este blocat permanent, limita de iluminare a lămpii de emisie a impulsurilor a fost atinsă, a fost detectată o defecțiune internă sau fereastra de tratament nu este așezată corespunzător pe aparat.

7. Punerea în funcțiune

ETAPA 1: Verificați dacă aparatul beurer Velvet Skin Pro este potrivit pentru dumneavoastră

AVERTIZARE

Înainte de prima utilizare a aparatului beurer Velvet Skin Pro, verificați dacă acesta este potrivit pentru dumneavoastră.

Pentru a verifica dacă beurer Velvet Skin Pro este potrivit pentru dumneavoastră, citiți capitolul „4. Indicații de avertizare și de siguranță” și folosiți tabelul pentru culoarea părului și a pielii de pe versoul instrucțiunilor de utilizare, determinați intensitatea luminoasă cea mai potrivită pentru pielea și pentru părul dumneavoastră sau stabiliți dacă această metodă este adecvată pentru dumneavoastră (cazurile de incompatibilitate sunt marcate cu „X” în tabel).

ETAPA 2: Test de verificare a compatibilității pielii

AVERTIZARE

Înainte de a utiliza beurer Velvet Skin Pro, efectuați un test de verificare a compatibilității pielii.

Cu ajutorul testului de verificare a compatibilității pielii, se testează modul în care pielea dumneavoastră reacționează la epilarea cu beurer Velvet Skin Pro. În plus, vă ajută la setarea treptei optime de energie pentru fiecare zonă de epilat.

Cu **48 de ore** înainte de epilarea completă, realizați un test de verificare a compatibilității pielii pe fiecare suprafață a pielii pe care doriți să o tratați.

Indicație

În cazul epilării pe față, testul de verificare a compatibilității pielii trebuie realizat pe o suprafață fără păr, cum ar fi sub ureche sau lateral pe gât.

1. Anterior utilizării, aveți în vedere ca pielea să fie rasă, curată și uscată (să nu prezinte urme de pudră, creme, produse de machiaj, antiperspirant sau deodorant).

AVERTIZARE

NU curățați pielea ÎN NICIUN CAZ cu lichide inflamabile, precum alcool sau acetonă, înainte de a folosi beurer Velvet Skin Pro.

2. Pregătiți aparatul conform descrierii de la punctele 2 până la 5 din capitolul „8.1 Începerea utilizării”.
3. Așezați suprafața luminoasă a aparatului pe suprafața de test dorită și aveți grijă să se afle complet în contact cu pielea.
4. Aparatul este setat automat la cea mai mică treaptă de energie. Declanșați primul impuls cu treapta de energie 1 apăsând butonul de declanșare. Vedeți un bliț luminos, auziți un sunet puternic și simțiți o ușoară senzație de ardere și/sau de căldură. Aparatul este pregătit pentru următorul impuls în max. 3 secunde și becul de control de pe beurer Velvet Skin Pro luminează continuu verde.
5. Îndepărtați fereastra de lumină de piele și așezați-o pe următoarea suprafață de test.

Indicație

Măriți treapta de energie numai dacă treapta anterioară de energie nu vi s-a părut neplăcută. Dacă treapta de energie 1 este deja neplăcută, nu măriți treapta de energie.

Indicație

Indicație: Puteți utiliza tasta pentru recunoașterea automată a nuanței de piele pentru a stabili în mod automat treapta de energie recomandată pentru fiecare zonă de tratament. Aveți grijă ca recomandarea să fie efectuată în funcție de nuanța dumneavoastră de piele. Puteți regla oricând treapta de energie.

6. Puteți mări treapta de energie cu 1 cu ajutorul butonului pentru selectarea energiei „+”. Afișajul treptelor de energie se aprinde în funcție de treapta de energie aleasă.
Declanșați al doilea impuls cu treapta de energie 2 apăsând butonul de declanșare.
7. Repetați pașii 5 și 6 numai dacă vă simțiți bine, până când atingeți treapta 6, cea mai mare treaptă de energie. Încheiați testul când simțiți o senzație neplăcută, întrucât există pericol de urmări negative în cazul mării treptelor de energie. Întrerupeți imediat testul dacă observați efecte negative precum roșeață extremă sau formarea de bășici.
8. Așteptați 48 de ore și verificați suprafața tratată.
Dacă pielea pare normală în zona epilată (nicio reacție sau roșeață ușoară), puteți continua cu o epilare completă la cea mai mare treaptă de temperatură pe care ați resimțit-o plăcută în timpul testului. Dacă observați roșeață extremă, umflături sau bășici chiar și la cea mai mică treaptă de energie, nu supuneți această suprafață a unui tratament complet.

Indicație

Nu realizați o epilare completă cu o treaptă de energie pe care nu ați testat-o în prealabil!
Epilați suprafața testată cel mai devreme după 1 săptămână de la test.

ETAPA 3: Pentru a obține rezultate optime, planificați epilarea cu beurer Velvet Skin Pro

Un ciclu tipic de creștere a părului poate dura 18 - 24 de luni. În această perioadă pot fi necesare mai multe ședințe cu beurer Velvet Skin Pro pentru a se obține o epilare pe termen lung. Eficacitatea epilării diferă de la om la om și variază în funcție de zona corpului, de culoarea părului și de modul în care utilizați beurer Velvet Skin Pro.

Planul tipic pentru epilarea cu beurer Velvet Skin Pro pe parcursul unui ciclu complet de creștere a părului:

- Trebuie să așteptați aproximativ două săptămâni între primele 3–4 ședințe de epilare cu beurer Velvet Skin Pro.
- Trebuie să așteptați aproximativ patru săptămâni între ședințele de epilare 5 - 7 cu beurer Velvet Skin Pro. Ulterior, veți utiliza beurer Velvet Skin Pro din când în când, atunci când este necesar, până când obțineți rezultate de durată.

Aceste indicații corespund planului recomandat, cu care se obțin, în mod demonstrat, cele mai bune rezultate. Dar puteți organiza și altfel planul dumneavoastră personal, obținând totuși rezultate satisfăcătoare.

Indicație

Dacă folosiți aparatul pe aceeași zonă a corpului mai mult de o dată la două săptămâni, nu obțineți rezultate mai bune.

Îngrijire ulterioară tipică folosind beurer Velvet Skin Pro după obținerea unei epilări definitive:

Modificările hormonale sau alte modificări fiziologice pot activa foliculele de păr latente. Din acest motiv, este posibil să fie uneori necesare ședințe de epilare ulterioare cu beurer Velvet Skin Pro.

ETAPA 4: Pregătiți zona de epilat

Anterior utilizării, aveți în vedere ca pielea să fie rasă, curată și uscată (să nu prezinte urme de pudră, creme, produse de machiaj, antiperspirant sau deodorant).

AVERTIZARE

NU curățați pielea cu lichide inflamabile, precum alcool sau acetonă, înainte de a folosi beurer Velvet Skin Pro.

ETAPA 5: Setați intensitatea de energie/recunoașterea automată a nuanței de piele

Treapta de energie

Treapta de energie determină intensitatea impulsului luminos generat de beurer Velvet Skin Pro spre pielea dumneavoastră (de la cea mai mică treaptă (-) până la cea mai mare treaptă (+)). Afișajul treptelor de energie de pe aparat indică mărirea treptei de energie. Odată cu mărirea treptei de energie se îmbunătățesc rezultatele epilării, dar crește și riscul de posibile efecte secundare și complicații. Începeți întotdeauna prima ședință de epilare cu treapta de energie înregistrată în recunoașterea automată a nuanței pielii și confirmată prin intermediul testului de verificare a compatibilității pielii.

Recunoașterea/măsurarea automată a nuanței de piele

Prin recunoașterea automată a nuanței pielii, puteți lăsa aparatul să afișeze potențialul energetic corespunzător nuanței dumneavoastră de piele.

i Indicație

- Pentru siguranța dumneavoastră, selectați întotdeauna cel mai închis loc de pe piele (de exemplu partea exterioră a pulpei, partea din spate a mâinii etc.)
Important: Înainte de utilizarea pe o altă parte a corpului, trebuie să efectuați din nou o măsurătoare.
- În modul de recunoaștere a nuanței pielii, aparatul nu emite niciun impuls luminos.
- Dacă doriți să încheiați mai devreme recunoașterea nuanței pielii, puteți reveni la modul normal prin apăsarea unuia dintre butoanele pentru setarea energiei (+ sau -).

Dacă în timpul și după prima ședință de epilare cu treapta de energie recomandată, sesizați o ușoară iritație sau nu sesizați nicio iritație, puteți crește treapta de energie cu 1 în cadrul următoarelor ședințe.

⚠ AVERTIZARE

Nu creșteți treapta de energie dacă simțiți dureri neobișnuite în timpul sau după utilizarea aparatului beurer Velvet Skin Pro! (consultați „Etapă 6 Familiarizarea cu posibile efecte secundare”)
Nu creșteți treapta de energie în timpul unei ședințe de epilare, nici măcar atunci când nu aveți nicio senzație neplăcută.
Iritația se poate produce și la un anumit timp după utilizare.

ETAPA 6: Familiarizarea cu posibile efecte secundare la utilizarea aparatului beurer Velvet Skin Pro

Dacă beurer Velvet Skin Pro este utilizat conform indicațiilor din prezentele instrucțiuni de utilizare, apar foarte rar efecte secundare și complicații în legătură cu utilizarea aparatului beurer Velvet Skin Pro. Cu toate acestea, orice metodă de tratament cosmetic, inclusiv metodele dezvoltate pentru utilizarea la domiciliu, prezintă un anumit risc. În consecință, este important să înțelegeți și să acceptați riscurile și complicațiile care pot să apară la utilizarea de sisteme de epilare cu impulsuri de lumină destinate uzului privat.

Complicație	Probabilitatea apariției complicației	Efect secundar	Probabilitatea apariției efectului secundar
Acțiunea mai multor impulsuri în același loc	Redus	Iritare ușoară a pielii	Redus
		Înroșirea pielii	Redus
		Sensibilitate ridicată a pielii	Redus
		Răni și arsuri	Rar
		Formarea de cicatrice	Rar
		Modificări pigmentare	Rar
		Roșeață accentuată și umflătură	Rar
		Infecție	Neglijabil
Hematom	Neglijabil		

Dureri ușoare la nivelul pielii

Deși epilarea la domiciliu cu impulsuri de lumină este suportată în general foarte bine, majoritatea utilizatorilor resimt o ușoară senzație neplăcută în timpul utilizării, descrisă de obicei ca o ușoară înțepătură pe suprafața de piele tratată. În mod normal, senzația de înțepătură persistă pe parcursul utilizării propriu-zise sau câteva minute după aceasta. Orice altă senzație diferită de această ușoară senzație neplăcută nu este normală și înseamnă că trebuie să întrerupeți utilizarea beurer Velvet Skin Pro, deoarece această metodă de epilare nu este potrivită pentru dumneavoastră sau ați setat o treaptă de energie prea ridicată.

Înroșirea pielii

Pielea dumneavoastră se poate înroși imediat după utilizarea aparatului beurer Velvet Skin Pro sau pe parcursul a 24 de ore de la utilizare. De regulă, roșeața dispare în decursul a 24 de ore. Consultați medicul dacă roșeața nu dispare după 2-3 zile.

Sensibilitate ridicată a pielii

Pielea în zona epilată este mai sensibilă, astfel încât poate fi uscată sau se poate decoji.

Răni și arsuri

Foarte rar se pot produce arsuri sau răni cutanate în urma utilizării. Poate dura câteva săptămâni până când arsura sau rana s-a vindecat și, foarte rar, poate să rămână o cicatrice vizibilă.

Formarea de cicatrice

Deși se produce foarte rar, există posibilitatea formării unei cicatrice permanente. O eventuală cicatrice se produce în mod normal sub forma unei leziuni albe, plate pe piele (hipotrofic).

Totuși, aceasta poate fi lată și roșie (hipertrofic) sau lată și depășind marginile răni propriu-zise (cheloid). Pot fi necesare tratamente estetice ulterioare pentru a îmbunătăți aspectul cicatricei.

Modificări pigmentare

Aparatul beurer Velvet Skin Pro vizează tulpina firului de păr, în special celulele pigmentate în foliculul de păr și foliculul de păr propriu-zis.

Cu toate acestea, există pericolul unei hiperpigmentări (pigment accentuat sau culoare maro) sau al unei hipopigmentări (culoare deschisă) a pielii dimprejur. Acest pericol de modificări a pigmentării pielii este mai mare la persoane cu o piele de culoare închisă. În mod normal, modificările culorii sau modificările pigmentului pielii sunt temporare, hiperpigmentarea sau hipopigmentarea permanentă producându-se foarte rar.

Roșeață accentuată și umflătură

În cazuri rare, pielea tratată se poate înroși și umfla. Acest lucru apare mai frecvent în zone sensibile ale corpului. Roșeața și umflăturile trebuie să dispară după 2-7 zile și trebuie tratate cu comprese frecvente cu gheață. Spălarea cu atenție este permisă, însă trebuie să evitați expunerea la soare.

Infecție

O infecție a pielii este foarte rară, însă reprezintă totuși un posibil risc în urma unei arsuri sau a unei răni cutanate produse de aparatul beurer Velvet Skin Pro.

Hematom

Utilizarea aparatului beurer Velvet Skin Pro poate să conducă în cazuri foarte rare la hematoame de culoare albastru-lila, care pot persista 5-10 zile. După ce hematoamele dispar, se poate produce o colorare ruginie a pielii (hiperpigmentare), care poate fi permanentă.

ETAPA 7: La ce rezultate trebuie să vă așteptați în urma utilizării aparatului beurer Velvet Skin Pro?

Pentru mulți utilizatori ai aparatului Velvet Skin Pro, este posibil ca aceasta să fie prima experiență cu un aparat bazat pe lumină care a fost dezvoltat pentru utilizarea privată. Aparatul beurer Velvet Skin Pro este ușor de utilizat, iar ședințele de epilare nu durează mult. În timpul unei ședințe de epilare cu beurer Velvet Skin Pro, este normal să observați și să simțiți următoarele:

- **Zgomot de vâjâit al ventilatorului** – ventilatorul de răcire din beurer Velvet Skin Pro produce un zgomot similar unui uscător de păr. Acest lucru este normal.

- **Zgomot de lovire la fiecare impuls** – atunci când beurer Velvet Skin Pro declanșează un impuls, este normal să auziți odată cu impulsul de lumină un fel de zgomot de lovire.
- **Presiune ușoară a ferestrei de lumină** – acest lucru este necesar și util pentru amplasarea impulsurilor luminoase învecinate și face parte din funcția de siguranță a aparatului beurer Velvet Skin Pro.
- **Senzație de căldură și mâncărimi** – în timpul fiecărui impuls luminos este normal să simțiți o senzație ușoară de căldură și mâncărimi cauzate de energie de lumină. Rețineți că este important să folosiți întotdeauna trepte mici de energie la prima ședință de epilare. Căldura ușoară pe care o resimțiți poate persista până la o oră după utilizarea aparatului beurer Velvet Skin Pro.
- **Culoare ușor roșatică sau roz a pielii** – în timpul sau imediat după ședința cu beurer Velvet Skin Pro, nu este neobișnuit să observați o ușoară culoare roz a pielii. În mod normal, aceasta poate fi observată cel mai puternic în jurul firelor de păr. Dacă observați însă înroșirea completă a pielii, formarea de bășici sau arsuri, întrerupeți imediat utilizarea aparatului beurer Velvet Skin Pro.

8. Utilizare

AVERTIZARE

Dacă doriți să folosiți aparatul pe față, citiți mai întâi indicațiile din capitolul 8.2 până la 8.3 înainte de a continua cu capitolul 8.1 „Începerea utilizării”.

8.1 Începerea utilizării

1. Scoateți aparatul din ambalaj.
2. Verificați aparatul, ștecherul și cablul cu privire la deteriorări.
3. Racordați aparatul la rețeaua electrică.
4. Încărcați aparatul complet înainte de utilizare (durată: aproximativ 2 ore).

Indicație

Anterior utilizării, aveți în vedere ca pielea să fie rasă, curată și uscată (să nu prezinte urme de pudră, creme, produse de machiaj, antiperspirant sau deodorant).

Lăsați dispozitivul să se răcească timp de câteva minute pentru a nu fi prea fierbinte. Puteți continua utilizarea după o scurtă perioadă de răcire.

AVERTIZARE

NU curățați pielea cu lichide inflamabile, precum alcool sau acetona, înainte de a folosi beurer Velvet Skin Pro.

5. Apăsăți tasta ON/OFF pentru a opri aparatul.
6. Cu ajutorul tastelor +/- -, selectați treapta corectă de energie pentru nuanța pielii dumneavoastră sau utilizați recunoașterea automată a nuanței de piele (☺).
7. Așezați aparatul la un unghi de 90 de grade pe piele, astfel încât accesoriul să fie complet perpendicular. Senzorul integrat pentru contactul cu pielea împiedică impulsul luminos accidental fără contactul cu pielea.
8. Becul de control de pe partea din spate a aparatului luminează verde pentru a vă indica faptul că puteți continua tratamentul.
9. Apăsăți butonul de declanșare pentru a genera un impuls luminos.
10. Aparatul dispune de un mod „Auto-Flash”. Dacă mențineți butonul de declanșare apăsat pentru 3 impulsuri luminoase succesive, se activează acest mod. Acum, aparatul transmite impulsuri luminoase automate fără să fie necesară apăsarea repetată a butonului de declanșare, atât timp cât există un contact suficient cu pielea.

Indicație

Dacă apăsați *butonul de declanșare* și pielea dumneavoastră are o culoare prea închisă sau este bronzată prea puternic, *becul de control* al aparatului luminează roșu. În acest caz, aparatul nu declanșează impulsul pe această suprafață a pielii.

Dacă aparatul nu se află în contact suficient cu pielea și apăsați *butonul de declanșare*, *becul de control* de la nivelul aparatului luminează portocaliu. În acest caz, aparatul nu declanșează impulsul pe această suprafață a pielii.

AVERTIZARE

Nu tratați aceeași suprafață de piele mai mult de o dată per ședință!

Utilizarea multiplă pe o suprafață de piele în cadrul unei ședințe de epilare poate mări probabilitatea de efecte secundare.

Încercați să evitați suprapunerea de impulsuri.

Indicație

Impulsurile generate de beurer Velvet Skin Pro trebuie aplicate în rânduri – începând de la capătul fiecărui rând până la celălalt capăt al rândului. Această metodă oferă un control mai bun asupra suprafeței de piele deja tratate și vă ajută să evitați aplicarea de mai multe ori pe aceeași suprafață sau epilarea pe suprafețe de piele suprapuse. *Suprafața luminoasă* a aparatului beurer Velvet Skin Pro este concepută în așa fel încât pe suprafața tratată rămân pentru scurt timp urme de apăsare. Aceste urme vizibile pot fi utilizate pentru aplicarea exactă a următorului impuls.

11. Ridicați aparatul de pe piele și așezați-l pe următoarea porțiune a suprafeței de tratat. Aveți grijă să nu se producă goluri sau suprapuneri pe pielea tratată atunci când mutați aparatul. Aparatul se reîncarcă imediat și este pregătit pentru următorul impuls în max. 3 secunde (la cea mai înaltă treaptă) (*becul de control* al aparatului luminează din nou continuu verde). Repetați procedura până când a fost tratată întreaga suprafață de piele.

După tratamentul cu beurer Velvet Skin Pro

- După ce s-a încheiat ședința de epilare cu beurer Velvet Skin Pro, opriți aparatul apăsând tasta ON/OFF.
- După fiecare ședință de epilare, se recomandă curățarea aparatului dumneavoastră beurer Velvet Skin Pro, în special a *suprafeței luminoase*.
- După curățare, se recomandă să păstrați aparatul dumneavoastră beurer Velvet Skin Pro în cutia originală și să îl protejați de apă.

8.2 Utilizarea la nivelul feței

AVERTIZARE

Nu folosiți aparatul beurer Velvet Skin Pro pe față la o treaptă de energie mai mare de 3.

Femeile nu trebuie să folosească aparatul beurer Velvet Skin Pro pe față mai sus de pomeți sau la nivelul ochilor, sprâncenelor și genelor, întrucât se pot produce leziuni oculare grave.

Bărbații nu trebuie să folosească aparatul beurer Velvet Skin Pro pe față, gât sau în zona bărbiei.

Nu folosiți beurer Velvet Skin Pro pe mucoase în zona oro-nazală.

Pielea feței este foarte sensibilă și necesită îngrijire specială. Respectați în mod obligatoriu toate indicațiile de avertizare și de siguranță din instrucțiunile de utilizare pentru a evita consecințele. Vă recomandăm să efectuați mai întâi un tratament la nivelul corpului și să vă familiarizați cu aparatul înainte de a-l folosi la nivelul feței.

Cu beurer Velvet Skin Pro pot fi tratate toate zonele feței de la pomeți în jos, cum ar fi buza superioară, obraji, maxilar, bărbie și gât.

i **Indicație**

Pentru a facilita utilizarea în zona feței, puteți utiliza accesoriul de precizie inclus în pachetul de livrare. Acesta reduce suprafața luminoasă și permite o utilizare precisă.

Puteți fixa cu ușurință accesoriul de precizie la nivelul aparatului, prin așezarea și apăsarea pe suprafața luminoasă la nivelul capului aparatului.

Așezați accesoriul de precizie, astfel încât decupajul corespunzător să se afle pe accesoriu, peste senzorul pentru contactul cu pielea/culoarea pielii. Dacă senzorul pentru contactul cu pielea/culoarea pielii este acoperit, nu este posibilă declanșarea unui impuls luminos.

Utilizați accesoriul de precizie la max. treapta de energie 3 și când nuanța pielii este mai deschisă decât tipul de piele 5.

Nu utilizați mai mult de 80 de impulsuri la rând în timpul folosirii accesoriului de precizie.

Există pericolul ca filtrul roșu să devină prea încins, ceea ce poate duce la arsuri.



1. Cu 48 de ore înainte de tratament, este obligatoriu să efectuați un test punctual de verificare a compatibilității pielii (consultați capitolul 7, etapa 2). Testul de verificare a compatibilității pielii trebuie realizat pe o suprafață fără păr, cum ar fi sub ureche sau lateral pe gât, pentru a se determina o treaptă de energie adecvată.

⚠ **AVERTIZARE**

Epilați suprafața testată cel mai devreme după 1 săptămână de la testul de verificare a compatibilității pielii.

i **Indicație**

Părul de pe față poate avea cauze hormonale, astfel încât există posibilitatea să fie necesare mai multe ședințe pentru reducerea permanentă a părului.

8.3 Îngrijirea după un tratament la nivelul feței

- Aplicați o loțiune calmantă, cum ar fi aloe vera.
- Timp de cel puțin 24 de ore, evitați utilizarea de creme de exfoliere și de înălbire sau produse corespunzătoare, deoarece se pot produce iritații ale pielii tratate.
- După utilizare, evitați timp de cel puțin 48 de ore expunerea la razele solare directe pe o durată mai mare de 15 minute. Dacă expuneți, în această perioadă, pielea recent tratată luminii solare, trebuie să folosiți în mod obligatoriu cremă cu factor de protecție solară FPS 30 sau mai mare.
- Evitați îndepărtarea părului din zonele tratate folosind ceară sau un epilator/o pensetă.

Rețineți că poate fi necesar un ciclu complet de creștere a părului până când obțineți rezultate complete în urma epilării.

9. Curățarea și întreținerea

După fiecare ședință de epilare, se recomandă curățarea aparatului dumneavoastră beurer Velvet Skin Pro, în special a *suprafeței luminoase*.

⚠ **ATENȚIE**

Nu introduceți niciodată în apă beurer Velvet Skin Pro sau unul dintre componentele sale!

- Folosiți o cârpă uscată, curată și un agent de curățare conceput special pentru echipamente electronice pentru a șterge cu atenție suprafața aparatului beurer Velvet Skin Pro și, în special, a suprafeței luminoase.

10. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?

„Aparatul meu beurer Velvet Skin Pro nu mai poate fi pornit”

- Asigurați-vă că acumulatorul aparatului este încărcat (cu ajutorul led-ului verde al afișajului nivelului de încărcare al acumulatorului).
- În cazul în care aparatul IPL nu emite niciun impuls luminos, verificați dacă
 - a. accesoriul pentru tratament este fixat corespunzător pe aparat (aparatul nu funcționează dacă acesta nu este fixat sau nu este fixat corect pe aparat).
 - b. aparatul se află în modul de siguranță activat în mod automat, după ce nu a fost detectat contactul cu pielea, respectiv nuanța de piele adecvată.
 - c. există un contact complet cu pielea.
 - d. zona de tratament este prea mică, prea curbată sau prea osoasă. Fereastra de tratament trebuie amplasată complet pe zona de tratament (încercați să o așezați perpendicular pe piele).
 - e. generarea de impulsuri luminoase este blocată dacă aparatul IPL detectează o nuanță de piele prea închisă. În acest caz, becul de control luminează scurt roșu.
 - f. În cazul în care există probleme de siguranță sau la atingerea duratei de viață, becul de control luminează roșu. În acest caz, aparatul se oprește în mod automat.
- Erori generale:
 - a. Conform indicațiilor din paragraful corespunzător, fereastra de tratament se curăță dacă prezintă murdărie sau praf. În cazul în care nu puteți elimina impuritățile, luați legătura cu serviciul pentru clienți.
 - b. Dacă impulsurile luminoase se generează cu întârziere după schimbarea zonei de tratament, utilizați aparatul într-un mediu mai rece, dacă este cazul. Generarea de impulsuri luminoase este încetinită în cazul în care temperatura ambiantă este ridicată.
 - c. Dacă apare o eroare generală, opriți aparatul, așteptați zece secunde și apoi reporniți-l.
- Dacă problemele cu aparatul dumneavoastră persistă, vă rugăm să vă adresați serviciului nostru pentru clienți.

11. Întrebări frecvente

1. Funcționează beurer Velvet Skin Pro cu adevărat?

Da. Testele clinice, efectuate de medici, au arătat că, folosind tehnologia din aparatul beurer Velvet Skin Pro, se pot obține rezultate de epilare durabile. Desigur, rezultatele pot varia în funcție de ciclul de creștere a părului, treapta de energie folosită, grosimea și culoarea părului.

2. În ce zone ale corpului pot utiliza beurer Velvet Skin Pro?

Aparatul beurer Velvet Skin Pro a fost conceput pentru epilarea întregului corp. Zonele tratate cel mai frecvent cu beurer Velvet Skin Pro sunt picioarele, zona axială, brațele, zona inghinală și fața de la pomeți în jos.

3. Cât durează o ședință de tratament cu beurer Velvet Skin Pro?

Durata poate varia în funcție de zona tratată a corpului. Tratamentul pe întregul corp (picioare, brațe, zona axilară, zona inghinală și fața de la pomeți în jos) durează aproximativ 21 de minute la cea mai mică treaptă și cu accesoriul mare.

4. Este sigur beurer Velvet Skin Pro?

Aparatul beurer Velvet Skin Pro a fost dezvoltat punându-se accent în special pe siguranța dumneavoastră și folosește o tehnologie testată clinic. Însă acest aparat, ca orice produs sau echipament electronic destinat utilizării pe piele, trebuie folosit în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și indicațiile de siguranță pentru utilizator.

5. Aparatul beurer Velvet Skin Pro cauzează dureri?

În cazul unei utilizări corecte, majoritatea utilizatorilor aparatului beurer Velvet Skin Pro au declarat că simt o ușoară senzație de căldură în momentul eliberării impulsului luminos. Utilizatorii cu păr mai gros și de culoare închisă pot simți mai intens o senzație neplăcută, însă această senzație dispare de îndată ce a fost încheiată ședința de epilare. Aparatul beurer Velvet Skin Pro dispune de 6 setări pentru energie, pe care le puteți utiliza în funcție de sensibilitatea dumneavoastră.

6. Cât de des să utilizez aparatul beurer Velvet Skin Pro?

În cazul tratamentelor de epilare la nivelul corpului folosind beurer Velvet Skin Pro, primele patru ședințe trebuie realizate la interval de două săptămâni. Ședințele cinci până la șapte, inclusiv, trebuie să aibă loc la intervale de patru săptămâni. Toate celelalte ședințe trebuie realizate dacă părul a crescut din nou, până când se obțin rezultatele dorite.

În cazul tratamentelor de epilare la nivelul feței, de la pomeți în jos, primele șase ședințe trebuie realizate la interval de două săptămâni. Ședințele șapte până la douăsprezece, inclusiv, trebuie să aibă loc la intervale de patru săptămâni. Toate celelalte ședințe trebuie realizate dacă părul a crescut din nou, până când se obțin rezultatele dorite.

7. Este eficace aparatul beurer Velvet Skin Pro la păr alb, gri sau blond?

Aparatul beurer Velvet Skin Pro acționează cel mai bine la tipuri de păr de culoare mai închisă sau la păr care conține mai multă melanină. Melanina este pigmentul care conferă părului și pielii culoarea sa și care preia energia luminoasă. Părul negru și șaten prezintă cele mai bune reacții. Părul maro și maro deschis reacționează, de asemenea, însă au nevoie, în mod normal, de mai multe ședințe de epilare. La părul roșcat este posibil un anumit efect. Părul alb, gri sau blond nu reacționează de obicei la beurer Velvet Skin Pro, deși unii utilizatori au observat rezultate după mai multe ședințe de epilare.

8. Pot folosi aparatul beurer Velvet Skin Pro pe piele maro sau neagră?

Nu folosiți beurer Velvet Skin Pro pe piele de culoare naturală închisă! Nu funcționează! Aparatul beurer Velvet Skin Pro este bazat pe lumină și elimină părul nedorit prin tratarea selectivă a pigmentului părului. Și în țesutul înconjurător există o cantitate diferită de pigmenți. Cantitatea de pigmenți din pielea unei anumite persoane, care poate fi observată în funcție de culoarea pielii, determină gradul de risc la care persoana se expune în cazul utilizării aparatului beurer Velvet Skin Pro. Tratarea pielii de culoare închisă prin epilarea bazată pe lumină poate avea urmări negative precum arsuri, bășici și modificarea culorii pielii (hiperpigmentare sau hipopigmentare). În beurer Velvet Skin Pro este integrat un *senzor pentru culoarea pielii*, care măsoară culoarea pielii la începutul fiecărei ședințe de tratament și uneori pe parcursul ședinței. *Senzorul pentru culoarea pielii* împiedică emiterea altor impulsuri de către beurer Velvet Skin Pro, atunci când se detectează că aparatul este utilizat la nuanțe mai închise ale pielii.

9. De când încep să se observe rezultate în urma utilizării aparatului beurer Velvet Skin Pro?

Ca la orice alt aparat de epilare bazat pe lumină sau laser, rezultatele nu sunt vizibile imediat și chiar ați putea avea impresia că nu s-a întâmplat nimic. Uneori, după o ședință de epilare pare ca și cum părul ar crește la loc, însă, în mod normal, multe dintre aceste fire de păr cad după două săptămâni. În plus, părul crește în trei faze diferite și numai părul aflat într-o fază de creștere activă va fi influențat de beurer Velvet Skin Pro. Acesta este unul dintre motivele principale pentru care sunt necesare mai multe ședințe până la atingerea rezultatului dorit.

10. Bărbații pot utiliza aparatul beurer Velvet Skin Pro?

Deși beurer Velvet Skin Pro a fost dezvoltat pentru femei, poate fi potrivit și pentru bărbați. Însă părul bărbaților, în mod tipic cel de pe piept, necesită mai multe ședințe de epilare decât în cazul femeilor pentru obținerea rezultatelor dorite.

11. De ce îmi crește părul, deși l-am tratat cu o săptămână în urmă?

Este posibil să aveți senzația că părul crește în continuare până la două săptămâni de la ședința de epilare cu beurer Velvet Skin Pro. Acest proces este cunoscut sub denumirea de „ejectare”, iar după aproximativ două săptămâni, veți observa că aceste fire de păr cad pur și simplu sau pot fi scoase trăgând ușor de ele. (Totuși, nu este recomandat să trageți de firele de păr – lăsați-le să cadă pe cale naturală.) Este, de asemenea, posibil ca unele fire de păr să nu fie influențate de beurer Velvet Skin Pro, ca urmare a unui tratament uitat sau a fazelor de creștere diferite. Aceste fire de păr vor fi tratate în cadrul ședințelor ulterioare și, prin urmare, acesta este motivul pentru care sunt necesare mai multe ședințe de epilare pentru a obține cel mai bun rezultat cu beurer Velvet Skin Pro.

12. Am auzit că unele fire de păr cresc mai subțire și mai fin după o epilare bazată pe lumină?

Acest fenomen a fost observat în detaliu de cosmeticienii și medicii care utilizează aparate cu lumină și aparate cu laser pentru epilare. Este posibil ca unele fire de păr să crească mai subțire și mai fin după

o epilare cu beurer Velvet Skin Pro. În mod normal, aceste fire de păr reprezintă doar o fracțiune a celor care au fost acolo inițial, iar continuarea tratamentului poate avea efectul dorit asupra lor.

13. De ce nu mă pot trata personal dacă am un bronz „activ”?

Nu folosiți beurer Velvet Skin Pro pe piele bronzată sau după expunerea la soare. Pielea bronzată, în special după expunerea la soare, conține o cantitate mare din pigmentul melanină. Acest lucru este valabil pentru toate tipurile și culorile de piele, inclusiv la persoane care nu par a se bronză prea repede. Existența unei cantități mari de melanină supune pielea unui risc mărit de consecințe negative în legătură cu utilizarea aparatului beurer Velvet Skin Pro, incluzând arsuri, bășici și modificări ale culorii pielii (hiperpigmentare și hipopigmentare).

14. Utilizarea pe termen lung a aparatului beurer Velvet Skin Pro este periculoasă pentru pielea mea?

Utilizarea energiei luminoase și energiei laser în medicina estetică este documentată în detaliu de peste 15 ani în reviste de specialitate profesionale, verificate de experți, precum și în unități renumite precum clinica Mayo. Aceste reviste și unități nu au semnalat niciun fel de efecte negative sau daune în urma utilizării pe termen lung a aparatelor cu lumină sau cu laser.

15. Pot să utilizez aparatul beurer Velvet Skin Pro pentru a îndepărta părul de pe bărbie sau alt păr de la nivelul feței?

Aparatul beurer Velvet Skin Pro poate fi utilizat pentru tratamentul părului de la nivelul feței de la pomeți în jos. În cazul utilizării la nivelul feței, trebuie să aveți grijă să evitați mai ales zona ochilor: beurer Velvet Skin Pro nu trebuie utilizat niciodată în jurul ochilor sau la ochi. Și la fel ca și la alte părți ale corpului, trebuie evitată expunerea la soare înainte și după tratamentul cu beurer Velvet Skin Pro. Mijloace de protecție solară acceptabile sunt haine care acoperă zonele în cauză sau creme de protecție solară (cel puțin FPS 30+), care vor fi purtate sau utilizate înainte și după tratamente.

16. Cât timp trebuie să întrerup tratamentul cu beurer Velvet Skin Pro după o expunere neprotejată la soare?

Trebuie să așteptați 2 săptămâni înainte de a utiliza beurer Velvet Skin Pro după expunerea neprotejată la soare. Dacă totuși aveți dubii în legătură cu o expunere la soare, consultați medicul dumneavoastră.

17. Trebuie să fac ceva anume înainte de a utiliza beurer Velvet Skin Pro?

Anterior fiecărei ședințe cu beurer Velvet Skin Pro, este important să evitați expunerea la soare a suprafeței tratate pentru cel puțin 2 săptămâni. O cremă de protecție solară (FPS 30+) și îmbrăcăminte care acoperă suprafața tratată pot fi utile. Suplimentar, suprafața de tratat trebuie curățată cu un săpun blând și cu apă, iar părul trebuie ras până la suprafața pielii.

18. Cum să îngrijesc suprafața tratată după utilizarea aparatului beurer Velvet Skin Pro?

Suprafața care a fost tratată cu beurer Velvet Skin Pro poate fi curățată și îngrijită cu produse uzuale pentru îngrijirea pielii. Trebuie să aveți în vedere în special evitarea expunerii neprotejate la soare. Cremele de protecție solară cu factor de protecție solară ridicat (30+) și hainele care acoperă pielea reprezintă o protecție solară potrivită.

12. Eliminarea ca deșeu

Acumulatorii uzate, complet goale trebuie eliminate în recipientele de colectare special marcate, la firmele specializate sau la comerciantul de electrice. Aveți obligația legală să eliminați acumulatorii ca deșeu.

Acumulatorii care conțin substanțe toxice prezintă aceste simboluri:

Pb = bateria conține plumb,

Cd = bateria conține cadmiu,

Hg = bateria conține mercur.



În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat cu reziduurile menajere la finalul duratei de viață. Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei


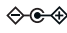


– WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor. Acumulatorul aparatului trebuie eliminat separat. Acumulatorul nu poate fi aruncat la gunoiul menajer. Pentru informații privind eliminarea, vă rugăm să contactați vânzătorul autorizat sau instituțiile publice responsabile de eliminare.

13. Date tehnice

Tip	IPL 8500	
Suprafața de tratat	4,5 cm ² /accesoriu de precizie 2 cm ²	
Tehnologie	IPL (Intense Pulsed Light) pentru utilizarea în ospodărie	
Lungime de undă	475–1200 nm (accesoriu mare), 550–1200 nm (accesoriu de precizie)	
Nivel max. de energie	max. 5 J/cm ²	
Trepte de energie reglabile	6	
Viteză	1 impuls la intervale de 3 secunde (la cea mai înaltă treaptă)	
Nr. max. de impulsuri în lampă	600.000	
Dimensiuni	aprox. 17,5 x 6,5 x 20 cm	
Greutate	cca. 480 g	
Temperatură	Operare	10–40° C
	Depozitare	-10–70° C
Umiditate relativă a aerului	Operare	30–70% umid. rel.
	Depozitare	0–90% umid. rel. la 55° C (fără condensare)
Acumulator	Acumulator Li-Ion, 7,4 V, 2500 mAh	
Impulsuri per încărcare	550 impulsuri	

Alimentator

Număr de model	YJS024Y-1201800
Intrare	100-240V ~, 50/60 Hz, 0,5 A
Ieșire	12,0 V  1,8 A, 21,6 W
Protecție	izolație dublă de protecție
Polaritate	
Clasificare	Clasa de protecție II
Eficiență operațională medie	≥ 86,55 %
Consum de putere fără sarcină	≤ 0,08 W

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de natură tehnică.

14. Garanție/Service

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.

Tabel pentru culoarea părului și a pielii

Tip piele Păr	I	II	III	IV	V	VI
Negru	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Șaten	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Maro	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Blond închis	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Blond deschis	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Roșcat	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Gri/alb	✗	✗	✗	✗	✗	✗



- RO** * Alegeți treapta de energie bazându-vă în special pe starea dumneavoastră de bine.
 ** Cu cât treapta de energie este mai mare, cu atât este mai eficient tratamentul

