

# beurer

FC 90

RO



**RO** Îngrijirea feței pentru efect anti-îmbătrânire  
Instrucțiuni de utilizare

CE

## Conținut

1. Prezentare .....	4	7. Ce fac în cazul în care apar probleme? .....	7
2. Descrierea aparatului .....	5	8. Eliminarea ca deșeu .....	7
3. Punerea în funcțiune .....	5	9. Date tehnice .....	7
4. Utilizare .....	5		
5. Întreținere și curățare .....	7		
6. Piese de schimb și piese de uzură .....	7		

### Stimată clientă, stimat client,

Ne bucurăm că ați optat pentru un produs din sortimentul nostru. Marca noastră este sinonimă cu produse de calitate, testate riguros, din domenii precum căldură, greutate, tensiune, temperatură corporală, puls, terapie, masaj, frumusețe, bebeluș și aer.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, să le păstrați pentru consultarea ulterioară, să le puneți la dispoziție și altor utilizatori și să respectați indicațiile.

Cu deosebită considerație,  
Echipa dumneavoastră Beurer



### Avertizare

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în scop comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală limitată sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în scop comercial.
- Nu utilizați aparatul dacă prezintă deteriorări sau dacă nu funcționează corect. În aceste cazuri, contactați serviciul pentru clienți.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie eliminat. Dacă acesta nu este detașabil, aparatul trebuie să fie eliminat.

### Pachet de livrare

1 FC 90 Pureo Ionic Skin Care

1 adaptor de rețea

1 Intensive Cleansing Milk (30 ml) (Puteți comanda laptele de curățare special creat pentru FC 90 la serviciul nostru pentru clienți indicând numărul de comandă 163.394.)

1 Advanced Hydro Lift Cream (15 ml) (Puteți comanda crema Advanced Hydro Lift Cream special creată pentru FC 90 la serviciul nostru pentru clienți indicând numărul de comandă 163.392.)

1 manual de utilizare

## Utilizarea conform destinației

Folosiți FC 90 Pureo Ionic Skin Care exclusiv pentru tratamentul feței omului.





Aparatul trebuie utilizat numai în scopul descris în instrucțiunile de utilizare. Utilizați aparatul numai în modul descris. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiunile produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în gospodărie, nu uzului comercial.

## Instrucțiuni de siguranță

### Tabel cu simboluri

Următoarele simboluri sunt folosite în instrucțiunile de utilizare.

 <b>Avertizare</b>	Indicație de avertizare privind pericolele de rănire sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră.
	Indicație privind informații importante.
	Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.
	A se utiliza exclusiv în spații închise.

## Instrucțiuni importante de siguranță



### Avertizare

Înainte de a utiliza FC 90 Pureo Ionic Skin Care, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea următoarelor indicații poate conduce la vătămări corporale sau daune materiale. Păstrați instrucțiunile de utilizare și permiteți și altor utilizatori accesul la acestea. Predați aceste instrucțiuni de utilizare la înstrăinarea aparatului.

- Dacă în urma tratamentului observați o înrăutățire a aspectului pielii, efecte secundare nedorite sau o roșeață persistentă, nu mai utilizați aparatul și consultați medicul.
- NU utilizați aparatul pe o piele (inflamată sau lezată) cu probleme acute sau cronice (de exemplu, în cazul inflamațiilor dureroase și nedureroase, al roșeții, al eczemelor (de exemplu, alergii), al arsurilor, al contuziilor, al umflăturilor, al rănilor deschise sau aflate în proces de vindecare.
- Nu apropiați aparatul de apă.
- Utilizați numai adaptorul de rețea livrat.

## Pericol de electrocutare



### Avertizare!

- Fiind un aparat electric, FC 90 Pureo Ionic Skin Care se va utiliza cu atenție și precauție pentru a evita pericolul de electrocutare.
- Utilizați aparatul numai cu adaptorul de rețea livrat și la tensiunea de rețea indicată pe plăcuța de fabricație.
- Conectați în toate cazurile adaptorul de rețea la priză numai dacă aparatul este oprit.
- Nu utilizați aparatul dacă acesta sau accesoriile sale prezintă defecte vizibile.

- Nu utilizați aparatul dacă a căzut sau dacă apa a pătruns în interiorul său.
- Nu utilizați aparatul în timpul unei furtuni cu trăsnete.
- În cazul defecțiunilor sau al problemelor de funcționare, opriți imediat aparatul. Scoateți ștecărul din priză.
- Nu trageți de cablul de alimentare sau de aparat pentru a scoate adaptorul de rețea din priză.
- Nu țineți și nu transportați niciodată aparatul de cablul de alimentare.
- Nu blocați cablul de alimentare.
- Mențineți adaptorul de rețea la distanță de suprafețele calde.
- Asigurați-vă că adaptorul de rețea și cablul de alimentare nu intră în contact cu apa, aburii sau alte lichide.
- Nu băgați niciodată mâna după un aparat căzut în apă. Scoateți imediat adaptorul de rețea din priză.

## Reparații



### Avertizare!

- Nu este permisă deschiderea aparatului.
- Efectuarea lucrărilor de reparații la echipamentele electrice este permisă numai persoanelor de specialitate. Reparațiile efectuate în mod necorespunzător pot cauza pericole majore pentru utilizator. Pentru efectuarea reparațiilor, contactați serviciul pentru clienți sau un comerciant autorizat.

## Pericol de incendiu



### Avertizare

Utilizarea necorespunzătoare, respectiv nerespectarea prezentelor instrucțiuni de utilizare poate cauza, în anumite condiții, apariția pericolului de incendiu!

- Nu utilizați niciodată aparatul acoperit, de exemplu, cu o pătură sau o pernă.
- Nu utilizați aparatul în apropierea substanțelor ușor inflamabile.
- Aveți grijă ca fantele de aerisire să nu fie acoperite.
- Nu depozitați aparatul dacă este pornit. Opriți-l întotdeauna aparatul în prealabil.
- Protejați aparatul împotriva temperaturilor ridicate.

## 1. Prezentare

Datorită tehnologiei multifuncționale cu ioni, FC 90 Pureo Ionic Skin Care reprezintă soluția ideală pentru tratamentul de curățare și anti-îmbătrânire a pielii. Capul utilizat tratament este încărcat la alegere cu ioni pozitivi sau negativi. Prin intermediul reacțiilor electrochimice, acești ioni încărcăți pătrund prin suprafața pielii și ajung în straturile mai adânci ale pielii, respectiv pornesc din straturile mai adânci ale pielii și ajung la suprafața pielii.

### Curățare prin dezincrustare:

Componentele încărcate negativ ale laptelui de curățare pătrund adânc în piele datorită ionilor negativi. Eliberează acolo impuritățile care sunt apoi eliminate la suprafața pielii prin utilizarea capului pentru tratament încărcat pozitiv.

### Anti-îmbătrânire prin iontoforeză:

În cazul în care capul pentru tratament este încărcat negativ, substanțele anti-îmbătrânire încărcate negativ din Advanced Hydro Lift Cream sunt împinse de capul pentru tratament și sunt transportate adânc în piele. Acolo pot exploata în mod optim efectele anti-îmbătrânire.

### Funcția de răcire și încălzire:

FC 90 Pureo Ionic Skin Care dispune în mod suplimentar de o funcție de încălzire și răcire. Funcția de încălzire relaxează pielea feței și stimulează circulația. Vă catifelează pielea. Prin intermediul funcției de răcire, umflăturile de la nivelul feței sunt reduse, porii se închid și este redată elasticitatea pielii.

## 2. Descrierea aparatului

1. Cap pentru tratament
2. Afișaj LCD
3. Tasta PORNIRE/OPRIRE
4. Tastă Ioni negativi
5. Tastă Ioni pozitivi
6. Tastă Încălzire
7. Tastă Răcire



## 3. Punerea în funcțiune



### Avertizare

Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.

- Scoateți aparatul din ambalaj și verificați aparatul și accesoriile pentru a vedea dacă sunt complete și intacte.
- Introduceți cablul de alimentare în partea din spate a aparatului.
- Amplasați cablul de alimentare într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.
- Introduceți adaptorul de rețea în priză.

## 4. Utilizare



### Avertizare

Înainte de tratament, efectuați un test de verificare a compatibilității laptei de curățare și a cremei Advanced Hydro Lift Cream cu pielea dumneavoastră. Astfel, procedați în felul următor:

- Folosind săpun, curățați temeinic o zonă de pe interiorul încheieturii brațului, aplicați o cantitate mică de lapte de curățare și Advanced Hydro Lift Cream pe această zonă curățată și lăsați produsul să pătrundă în piele și să se usuce.
- Dacă pe parcursul următoarelor 48 de ore pielea nu prezintă nicio reacție, puteți utiliza fără ezitare produsul testat.
- Dacă pielea prezintă reacții după expirarea celor 48 de ore, nu se recomandă utilizarea produsului testat pentru tratamentul facial.
- Nu efectuați testul de verificare a compatibilității cu pielea în zona ochilor.

Cu ajutorul acestui aparat puteți atât îngriji, cât și curăța pielea.



În timpul tratamentului țineți aparatul astfel încât mâinile dumneavoastră să cuprindă ambele benzi cromate de pe părțile laterale ale acestuia. În caz de nerespectare a acestor instrucțiuni, circuitul electric nu se închide și funcția ionilor nu este posibilă.




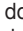


### Efectuarea tratamentului



Pentru a garanta un efect optim, vă recomandăm să efectuați procedurile de curățare și anti-îmbătrânire numai cu produsele puse la dispoziție deoarece acestea sunt compatibile în mod sigur cu FC 90.  
Dimineața vă recomandăm efectuarea unei proceduri de îngrijire, iar seara o combinație între procedurile de curățare și îngrijire.

#### 4.1 Procedura de îngrijire (dimineța):







- Aplicați Advanced Hydro Lift Cream pe locurile de pe față care vor fi tratate.
- Apăsăți tasta Pornire/Oprire  de pe aparat.
- Acționați mai întâi tasta Încălzire , iar la final acționați tasta Ioni negativi . Aparatul funcționează timp de 30 de secunde în faza de preîncălzire. Pe display se afișează „WAITING“. Imediat după ce dispare „WAITING“, aparatul este pregătit pentru utilizare.
- Deplasați capul pentru tratament cu mișcări ușoare de rotație pe pielea feței.
- După un tratament de aproximativ două minute, acționați tasta Răcire  și tasta Ioni negativi . Aparatul funcționează timp de 30 de secunde în faza de prerăcire. Pe display se afișează „WAITING“. Imediat după ce dispare „WAITING“, aparatul este pregătit pentru utilizare. Din acest moment, efectuați tratamentul pentru alte două minute.
- Pentru a porni din nou aparatul, apăsați tasta Pornire/Oprire .

#### 4.2 Combinația procedurilor de curățare și îngrijire (seara):

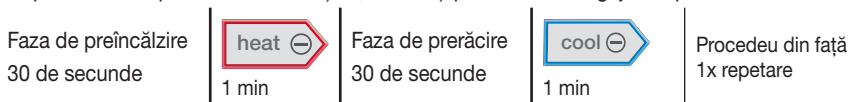
##### Curățarea:







- Aplicați laptele de curățare pe pielea feței.
- Apăsăți tasta Pornire/Oprire  de pe aparat.
- Acționați mai întâi tasta Încălzire , iar la final acționați tasta Ioni negativi . Aparatul funcționează timp de 30 de secunde în faza de preîncălzire. Pe display se afișează „WAITING“. Imediat după ce dispare „WAITING“, aparatul este pregătit pentru utilizare.
- Ulterior, deplasați capul pentru tratament cu mișcări ușoare de rotație pe pielea feței.
- După trei minute, acționați tasta Ioni pozitivi  și efectuați tratamentul pentru încă un minut. După tratamentul de curățare, spălați fața cu apă caldă.

##### Îngrijirea:

După finalizarea procedurii de curățare, efectuați procedura de îngrijire după cum urmează:



- Curățați capul pentru tratament cu o cârpă fără scame până când nu mai rămân deloc urme de lapte de curățare.
- Aplicați Advanced Hydro Lift Cream pe locurile de pe față care vor fi tratate.
- Acționați mai întâi tasta Încălzire , iar la final acționați tasta Ioni negativi . Aparatul funcționează timp de 30 de secunde în faza de preîncălzire. Pe display se afișează „WAITING“. Imediat după ce dispare „WAITING“, aparatul este pregătit pentru utilizare.
- Deplasați capul pentru tratament cu mișcări ușoare de rotație pe pielea feței.
- După aproximativ un minut de tratament, apăsați tasta Răcire . Aparatul funcționează timp de 30 de secunde în faza de prerăcire. Pe display se afișează „WAITING“. Imediat după ce dispare „WAITING“, aparatul este pregătit pentru utilizare. Din acest moment, efectuați tratamentul pentru încă un minut.
- La final, repetați tratamentul de încălzire, respectiv de răcire, timp de câte un minut, conform descrierii de mai sus. Dacă este necesar, aplicați Advanced Hydro Lift Cream.
- Pentru a porni din nou aparatul, apăsați tasta Pornire/Oprire .

## 5. Întreținere și curățare

- Când nu utilizați aparatul, depozitați-l într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină.
- După fiecare utilizare, curățați cu atenție aparatul utilizând o lavetă. Dacă este nevoie, aceasta poate fi umezită ușor. În acest caz, evitați pătrunderea apei în interiorul aparatului.
- Nu utilizați detergenți sau dizolvanți. Puteți deteriora aparatul.
- Nu țineți în niciun caz aparatul sub apă, deoarece apa poate pătrunde în aparat și îl poate defecta.

## 6. Piese de schimb și piese de uzură

Puteți achiziționa piese de schimb și piese de uzură la departamentul de service folosind numărul de articol indicat.

Articol	Număr de articol și număr de comandă
Advanced Hydro Lift Cream (30 ml)	163.392
Intensive Cleansing Milk (200ml)	163.394

## 7. Ce fac în cazul în care apar probleme?

Problemă	Cauză	Remediere
Display-ul aparatului nu afișează nimic.	Adaptorul de rețea nu este conectat corect.	Verificați dacă adaptorului de rețea este conectat corect.
	Aparatul nu este pornit.	Apăsăți tasta Pornire/Oprire.
Funcția de încălzire și răcire nu funcționează.	Cablul de alimentare este deteriorat.	Contactați comerciantul dumneavoastră.
	Aparatul este deteriorat.	

## 8. Eliminarea ca deșeu

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat cu reziduurile menajere la finalul duratei de viață. Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorităților locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.



## 9. Date tehnice

Nr. model	FC 90
Intrare	100-240 V c.a./50~60Hz/0,5 A
Ieșire	6,5 V c.c./2,46 A ---

