

beurer

HA 80 Single



DE	Digitale Hörhilfe	
	Gebrauchsanweisung	2
EN	Digital hearing amplifier	
	Instructions for use	24
FR	Amplificateur auditif numérique	
	Mode d'emploi	46
ES	Audífono digital	
	Instrucciones de uso	69

CE

DEUTSCH



Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt unseres Sortimentes entschieden haben. Unser Name steht für hochwertige und eingehend geprüfte Qualitätsprodukte aus den Bereichen Wärme, Gewicht, Blutdruck, Blutzucker, Körpertemperatur, Puls, Sanfte Therapie, Beauty, Massage und Luft.

Mit freundlicher Empfehlung
Ihr Beurer-Team

Inhalt

1. Lieferumfang.....	3	8. Reinigung und Pflege	17
2. Zeichenerklärung.....	4	9. Zubehör- und Ersatzteile	18
3. Warn- und Sicherheitshinweise.....	5	10. Was tun bei Problemen?	18
4. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	9	11. Entsorgung	20
5. Gerätebeschreibung.....	10	12. Technische Angaben.....	21
6. Inbetriebnahme	11	13. Garantie und Service.....	22
7. Anwendung	12		

1. Lieferumfang

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der Kartonverpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienstadresse.

- 1 x digitale Hörhilfe HA 80
(inklusive Schallschläuche für das linke oder rechte Ohr)
- 4 x Ohrstöpsel (in unterschiedlichen Größen und Arten)
- 1 x wechselbarer Akku
- 1 x Reinigungsbürste
- 1 x Trocknungskapsel
- 1 x Aufbewahrungsbox mit Ladefunktion
- 1 x Gebrauchsanweisung












Zum Kennenlernen


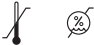
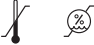


Die Hörhilfe dient zur Unterstützung des Hörvermögens von Menschen. Sie verstärkt hierzu Töne und überträgt diese dann auf das Ohr. Die Hörhilfe kann organisch bedingte Hörschäden weder vorbeugen noch lindern.

Dennoch bietet sie Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Egal ob Sie einen Film anschauen möchten, sich mit Freunden unterhalten wollen oder einfach Lust haben im Wald den Klängen der Natur zu lauschen, die Hörhilfe hilft Ihnen dabei Töne lauter und deutlicher zu hören. Bei diesen Hörhilfen handelt es sich um Verstärker und nicht um Medizinprodukte, die zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden können.

2. Zeichenerklärung

Auf dem Gerät, in der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typschild des Geräts werden folgende Symbole verwendet:

 WARNUNG	Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für Ihre Gesundheit.
 ACHTUNG	Sicherheitshinweis auf mögliche Schäden am Gerät.
 Hinweis	Hinweis auf wichtige Informationen.
	Gebrauchsanweisung beachten.
	Seriennummer
	Anwendungsteil Typ B
	Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik-Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	CE-Kennzeichnung Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.
	Zertifizierungszeichen für Produkte, die in die Russische Föderation und in die Länder der GUS exportiert werden.

	Hersteller
Storage/Transport 	Zulässige Lagerungs- und Transporttemperatur und -luftfeuchtigkeit
Operating 	Zulässige Betriebstemperatur und -luftfeuchtigkeit
 21 PAP	Verpackung umweltgerecht entsorgen.
IP21	Geschützt gegen feste Fremdkörper, 12,5 mm Durchmesser und größer und gegen senkrecht tropfendes Wasser
	Verwendbar bis

3. Warn- und Sicherheitshinweise



WARNUNG



- Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie diese Hörhilfen benutzen (falls Sie derzeit unter Ohrschmerzen leiden oder in der Vergangenheit daran gelitten haben).
- Benutzen Sie die Hörhilfe NICHT, wenn Sie eine Mittelohrentzündung haben oder an einer Gehörgangsentzündung leiden.

- Wenn Sie beim Tragen der Hörhilfe Schmerzen oder Unwohlsein verspüren, beenden Sie die Anwendung und kontaktieren Sie Ihren Arzt.
- Wenn sich beim Tragen der Hörhilfe Ihr Ohr entzündet, Hautreizungen entstehen oder sich vermehrt Cerumen (Ohrenschmalz) bildet, beenden Sie die Anwendung und kontaktieren Sie Ihren Arzt.
- Stellen Sie die Verwendung der Hörhilfe ein und suchen Sie einen Arzt auf bei:
 - Ausschlag oder Ekzemen an Hautstellen, die mit der Hörhilfe in Berührung kommen. (Die Hörhilfe wird aus hautschonendem Material gefertigt. In seltenen Fällen kann es dennoch zu allergischen Reaktionen kommen, die sich möglicherweise in Form von Ekzemen äußern.)
 - Die Verwendung der Hörhilfe verursacht Ausfluss aus dem Ohr bzw. macht Behandlung des Ohres erforderlich.
 - Das Hörvermögen lässt unvermittelt deutlich nach.
- Stellen Sie die Lautstärke zunächst niedrig ein und erhöhen diese schrittweise, wenn Sie sich an die Hörhilfe gewöhnt haben.
- Stellen Sie die Lautstärketaste NICHT zu hoch ein, da dies über einen längeren Zeitraum hinweg das Hörvermögen zusätzlich schädigen kann.
- Verleihen Sie Ihre Hörhilfe NICHT an andere Personen und verwenden Sie auch keine fremde Hörhilfe. Es drohen Gehörschäden und Infektionen.
- Geben Sie ihre Hörhilfe NICHT zur Verwendung an andere Personen weiter. Die Verwendung einer für eine andere Person hergestellten Hörhilfe kann Gehörschäden verursachen.
- Die Hörhilfe ist NICHT für den Einsatz bei Kleinkindern unter 36 Monaten geeignet.
- Die Diagnose von Hörproblemen ist bei Kindern besonders schwierig. Kinder sollten nur nach einer eingehenden Untersuchung bei einem HNO-Arzt eine Hörhilfe erhalten.
- Halten Sie die Hörhilfe, das Zubehör und die Akkus von Kindern fern, es besteht Verletzungs- und Verschluckungsgefahr.
- Dieses Gerät ist NICHT dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige

Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Verwenden Sie die Hörhilfe NICHT in explosionsgefährdeten und gefährlichen Umgebungen.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT in sauerstoffreichen Umgebungen und über einen längeren Zeitraum hinweg.
- Wenden Sie sich in folgenden Fällen an den Hersteller:
 - wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung, Verwendung oder Pflege der Hörhilfe benötigen oder
 - wenn sich das Gerät im Betrieb unerwartet verhält oder bei sonstigen Vorfällen.
- Benutzen Sie eine beschädigte Hörhilfe im Zweifelsfall NICHT und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienstadresse.
- Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn es defekt ist oder Betriebsstörungen vorliegen.
- Versuchen Sie in keinem Fall die Hörhilfe selbstständig zu öffnen und/oder zu reparieren. Lassen Sie Reparaturen nur vom Kundendienst oder autorisierten Händlern durchführen. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.

Hinweise zum Umgang mit Akkus:

- Wenn Flüssigkeit aus einer Akkuzelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit Wasser auswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
-  Verschluckungsgefahr! Kleinkinder könnten Akkus verschlucken und daran ersticken. Daher Akkus für Kleinkinder unerreichbar aufbewahren!
- Wenn ein Akku ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen und das Gerät entsorgen.
- Schützen Sie Akkus vor übermäßiger Wärme.
-  Explosionsgefahr! Keine Akkus ins Feuer werfen.
- Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts die Akkus vom Gerät trennen.
- Keine Akkus zerlegen, öffnen oder zerkleinern.
- Nur in der Gebrauchsanweisung aufgeführte Ladegeräte verwenden.
- Akkus müssen vor dem Gebrauch korrekt geladen werden. Die Hinweise des Herstellers bzw. die Angaben in dieser Gebrauchsanweisung für das korrekte Laden sind stets einzuhalten.
- Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf (siehe Kapitel 6).
- Um eine möglichst lange Akku-Lebensdauer zu erreichen, laden Sie den Akku mindestens 4 Mal im Jahr vollständig auf.

ACHTUNG

- Tragen Sie die Hörhilfe NICHT in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern oder Röntgenstrahlen.
- Tragen Sie die Hörhilfe NICHT beim Baden, Duschen oder Schwimmen.
- Schützen Sie die Geräte vor Stößen, Feuchtigkeit, Schmutz, starken Temperaturschwankungen, direkter Sonneneinstrahlung und hoher Luftfeuchtigkeit.
- In geschlossenen Fahrzeugen können im Sommer sehr hohe Temperaturen entstehen. Lassen Sie daher Ihre Hörhilfe nie im Auto liegen.
- Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen aus bzw. lassen Sie es NICHT fallen.
- Wenn die Hörhilfe ins Wasser fällt, trocknen Sie sie mit einem Tuch ab und lassen Sie sie anschließend von Ihrem Händler überprüfen.

- Versuchen Sie nie, die Hörhilfe in einer Mikrowelle, einem Wäschetrockner oder mithilfe eines Haartrockners zu trocknen. Die Hörhilfe kann andernfalls beschädigt werden.
- Verwenden Sie die Hörhilfe NICHT zusammen mit einem Mobiltelefon. (Die Funkwellen von Mobiltelefonen können Störgeräusche oder eine Lautstärkedämpfung verursachen.)
- Tragen Sie die Hörhilfe NICHT während Sie Kosmetika auftragen (z.B. Schminke, Haarspray, Parfüm oder Sonnencreme).
- Tragen Sie die Hörhilfe NICHT während Kurzwellentherapien oder medizinischen Behandlungen, bei denen starke Radiofrequenz- oder Magnetfelder auftreten können.
- Bedienen Sie die Tasten sorgfältig. Drücken Sie NICHT zu fest.
- Führen Sie keine spitzen Gegenstände in die Mikrofonöffnung ein, da das Mikrofon dadurch beschädigt werden kann.
- Berühren Sie den Magneten der Hörhilfe NICHT, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann.
- Berühren Sie NICHT das Geräteinnere. Dort befinden sich viele empfindliche Teile, die präzise eingestellt wurden. Stechen Sie auf keinen Fall mit einer Nadel oder einem ähnlichen Gegenstand in das Innere der Hörhilfe.
- Warten Sie die Hörhilfe in regelmäßigen Abständen. Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper zwischen Ohrstöpsel und Lautsprecher befinden, es könnte zu Tonbeeinträchtigungen kommen.

4. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Hörhilfen dürfen nur zu dem Zweck verwendet werden, das Hörvermögen von Personen zu verbessern. Die Geräte wurden ausschließlich für die Anwendung konzipiert, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wird. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf eine unzulässige oder unsachgemäße Verwendung zurückzuführen sind. Bei diesen Hörhilfen handelt es sich um Verstärker und nicht um Medizinprodukte, die zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden können.

5. Gerätebeschreibung


Hörhilfe

- 1 Minus-Taste
- 2 Plus-Taste
- 3 Programmwahltaste
- 4 Mikrofon
- 5 Verbindungsstück
- 6 Schallschlauch
- 7 Fixierfaden
- 8 Ohrstöpsel
- 9 Wechselbarer Akku




Aufbewahrungsbox mit Ladefunktion

- 1 Ladeposition Hörhilfe
- 2 Ladeposition wechsel-barer Akku
- 3 Aufbewahrungposition für Trocknungskapsel
- 4 Micro-USB-Anschluss
- 5 Trocknungskapsel

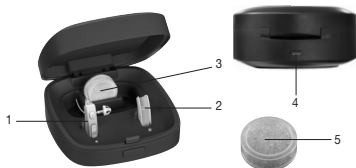

Reinigungsbürste

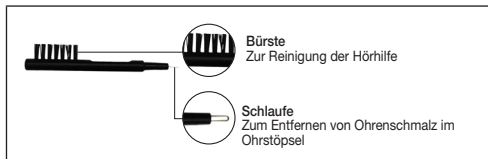

6. Inbetriebnahme

Entnehmen Sie die Hörhilfe aus der Verpackung und überprüfen Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Vollständigkeit und Beschädigungen.

Aufladen der Hörhilfe mit der Aufbewahrungsbox mit Ladefunktion

Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an, stecken Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel ein und verbinden Sie es mit Ihrer Aufbewahrungsbox mit Ladefunktion, um das Gerät und die Akkus aufzuladen.


Blinkendes grünes Licht:

Gerät und Akkus werden geladen.

Permanentes grünes Licht:

Gerät und Akkus sind voll geladen.

In der Regel dauert es 2 Stunden, bis das Gerät und die Akkus vollständig aufgeladen sind.

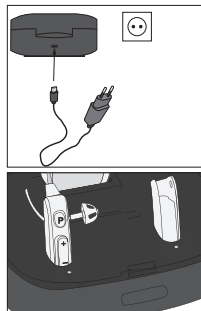

- i** Bevor Sie die Hörhilfe in Betrieb nehmen, achten Sie darauf, dass die Lautstärketaste zu Beginn auf der niedrigsten Stufe eingestellt ist.


Hinweis:

- i**
- Der Ladevorgang kann bei offenem oder geschlossenem Deckel erfolgen.
 - Die Hörhilfe sollten Sie nach dem vollständigen Aufladen und während einer Tragepause in der Aufbewahrungsbox mit Ladefunktion aufbewahren.

7. Anwendung

Anpassen Ihrer Hörhilfe


1. Die Bedruckungen der Hörschläuche sind jeweils mit „2B“ in rot und blau gekennzeichnet. „Rot“ steht für das rechte und „blau“ für das linke Ohr.
2. Befestigen Sie den Ohrstöpsel am Schallschlauch, indem Sie ihn über die Rippen am Schlauch stülpen, bis dieser sicher sitzt.
3. Platzieren Sie das Gehäuse der Hörhilfe hinter dem Ohr. Die Wölbung des Schallschlauches sollte bequem auf dem Ohr aufliegen (bei Brillenträgern neben dem Bügel der Brille).

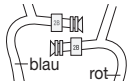

4. Halten Sie den Schallschlauch fest und führen Sie den Ohrstöpsel vorsichtig in den Gehörgang ein. Achten Sie darauf, dass der Ohrstöpsel nicht zu tief in den Gehörgang eingeführt wird. Sollte der Ohrstöpsel nicht richtig sitzen oder Ihnen unangenehm sein, probieren Sie einen anderen Ohrstöpsel aus.



5. Legen Sie den Fixierfaden entlang Ihrer Ohrmuschel. Dies sorgt für einen festeren Sitz des Ohrstöpsels im Ohr. Wenn der Fixierfaden Sie stört, können Sie diesen abtrennen. Er ist nicht zwingend erforderlich.

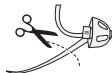

i Prüfen Sie, ob Sie die korrekte Ohrstöpselgröße gewählt haben, indem Sie Ihren Kopf langsam nach oben und unten und dann nach rechts und links bewegen, während Sie Kaubewegungen machen. Wenn der Ohrstöpsel herausrutscht, ist er zu klein. Wenn Sie eine Brille tragen, platzieren Sie den Bügel zwischen dem Kopf und der Hörhilfe.

i **WICHTIG**
Führen Sie den Schallschlauch niemals ohne Ohrstöpsel in den Gehörgang ein. Achten Sie auch darauf, dass Sie Schlauch und Ohrstöpsel nicht zu tief in den Gehörgang hindrücken.

Ein-/Ausschalten

Um die Hörhilfen ein- bzw. auszuschalten, halten Sie die Programmwahltaste am Gerät für drei (3) Sekunden, bis Sie einen Piepton hören.



Anpassen der Lautstärke

Plus-Taste:

Lautstärke erhöhen (kurz drücken)

Minus-Taste:

Lautstärke verringern (kurz drücken)



Damit Sie nun Töne klar und deutlich hören können, stellen Sie mit Hilfe der Lautstärketaste Ihre gewünschte Lautstärke ein.



Hinweis:

- Wenn Sie beim Tragen der Hörhilfe ein leichtes Pfeifen hören, überprüfen Sie, ob Ihr Ohrstöpsel fest genug im Ohr sitzt. Sollte er nicht fest genug sitzen, verwenden Sie einen anderen Ohrstöpsel.
- Die Hörhilfe kann eine bestehende Höreinschränkung nicht heilen, aber das Hören und das Sprachverständnis verbessern.
- Wenn ein einziger Piepton zu hören ist, wurde die Lautstärke erhöht oder verringert.
- Wenn zwei mal hintereinander ein Piepen ertönt, wurde die höchst- oder geringstmögliche Lautstärke erreicht.

Einstellung der Hörprogramme


Um das Hörprogramm zu wechseln, drücken Sie die Programmwahltaaste.

P1: Normaler Modus (1 x Piep):

Geeignet für ruhige Umgebungen, z.B. zuhause oder im Büro.


P2: Geräuschunterdrückungsmodus (2x Piep):

Geeignet für den Außenbereich, z.B. unterwegs, im Supermarkt oder Restaurant)

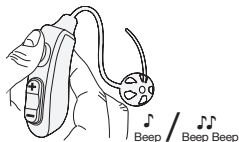

Akku wechseln

Um den Akku der Hörhilfe zu wechseln, halten Sie den Akku mit der einen Hand fest und schieben Sie mit der anderen Hand den oberen Teil der Hörhilfe in die entgegengesetzte Richtung. Nehmen Sie nun den voll aufgeladenen Wechselakku und schieben diesen auf die Hörhilfe. Nun ist die Hörhilfe wieder einsatzbereit.

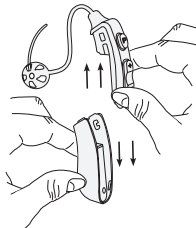

Schallschlauch wechseln

Für den Wechsel legen Sie bitte den Ersatz-Schallschlauch bereit. Prüfen Sie ihn vorher auf die korrekte farbliche Markierung („Rot“ steht für das rechte und „Blau“ für das linke Ohr).

1. Entfernen Sie für einen besseren Griff den Akku vom Gerät.
2. Halten Sie das Gerät in einer Hand und greifen Sie mit der anderen Hand das Verbindungsstück des Schallschlauches zum Gerät zwischen Daumen und Zeigefinger.

3. Drehen Sie das Verbindungsstück gegen den Uhrzeigersinn und das Gerät parallel mit dem Uhrzeigersinn.
4. Sobald das Verbindungsstück um etwa 90° gedreht ist ziehen Sie den Schallschlauch nach oben ab. Halten Sie dabei das Gerät gut fest.
5. Nehmen Sie den neuen Schallschlauch zur Hand. Setzen Sie den Schallschlauch auf und drehen Sie ihn mit dem Uhrzeigersinn mit etwas Druck ganz auf das Gerät, bis der Pfeil auf der Vorderseite wieder in einer Flucht mit den Gerätetasten liegt.
6. Prüfen Sie den Sitz des Schallschlauches bevor Sie den Akku wieder einsetzen und das Gerät in Betrieb nehmen.

Sollten Sie Probleme beim Abnehmen des Schallschlauches haben, verwenden Sie beispielsweise eine Pinzette zum Greifen des Verbindungsstücks.

Trocknungskapsel einlegen

Im Lieferumfang ist eine Trocknungskapsel enthalten. Durch das Tragen der Hörhilfe hinter dem Ohr, kommt die Hörhilfe mit der Haut und somit z.B. auch mit Schweiß in Berührung. Zur Pflege des Gerätes sollte dieses daher nach jeder Anwendung getrocknet werden.

Entnehmen Sie die Trocknungskapsel aus der Verpackung und setzen Sie diese mit etwas Druck in den vorgesehen Aufbewahrungsplatz ein.

Die Kapsel enthält einen Farbindikator. Mit abnehmender Trocknungsleistung ändert sich die Farbe von leuchtend orange zu weiß. Ist die Kapsel weißlich, so hat sie keine Trocknungsleistung mehr und muss getauscht werden.

Wo Sie eine neue Trocknungskapsel erhalten, erfahren Sie im Kapitel „9. Zubehör- und Ersatzteile“.



Hinweis: Für eine ideale Trocknungsleistung schließen Sie den Deckel der Aufbewahrungsbox mit Ladefunktion, nachdem Sie die Hörhilfe eingesetzt haben.

8. Reinigung und Pflege



ACHTUNG

- Halten Sie die Hörhilfe stets sauber.
- Gehen Sie mit den Produkten stets pfleglich um und vermeiden Sie, dass der Ohrstöpsel oder das Mikrofon von Fremdkörpern verschlossen wird. Dies beeinträchtigt die Funktion der Schallverstärkung.
- Reinigen Sie die Hörhilfe und die Ohrstöpsel nach jeder Anwendung mit einem sauberen, trockenen Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie das Tuch auch mit einer leichten Seifenlauge befeuchten. Benutzen Sie niemals scheuernde, ätzende oder lösungsmittelhaltige Reiniger.
- Halten Sie die Hörhilfe auf keinen Fall unter Wasser, da sonst Flüssigkeit eindringen kann und die Hörhilfe beschädigt wird.
- Zum Entfernen von im Ohrstöpsel feststehendem Ohrenschmalz eignet sich die beiliegende Reinigungsbürste (s. Gerätebeschreibung).
- Lassen Sie die Hörhilfe nach der Reinigung vollständig trocknen. Bewahren Sie die Hörhilfe an einem sicheren, trockenen und sauberen Ort in der dazugehörigen Aufbewahrungsbox mit Ladefunktion mit der Trocknungskapsel auf.
- Die Trocknungskapsel muss ersetzt werden, wenn sich die Farbe des Granulats von orange zu weiß ändert (Wo Sie eine neue Trocknungskapsel erhalten, erfahren Sie im Kapitel „9. Zubehör und Ersatzteile“).

9. Zubehör- und Ersatzteile

Sie können die Zubehör- und Ersatzteile über die jeweilige Serviceadresse unter der angegebenen Materialnummer erwerben.

Bezeichnung	Artikel- bzw. Bestellnummer
Trocknungskapseln HA 60/80/85 (8 St.)	641.15
Schallschläuche Größe S	164.341
Schallschläuche Größe L	164.342

10. Was tun bei Problemen?

Problem	Mögliche Ursachen	Behebung
Es sind keine Töne von der Hörhilfe wahrzunehmen.	Hörhilfe ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie die Hörhilfe wie im Kapitel 7 beschrieben an.
	Akku ist nicht richtig mit der Hörhilfe verbunden.	Kontrollieren Sie, ob der Akku richtig mit der Hörhilfe verbunden ist.
	Akku ist leer.	Wechseln Sie den Akku und laden Sie den leeren Akku in der Aufbewahrungsbox mit Ladefunktion wie im Kapitel 6 beschrieben.
	Mikrofon ist verunreinigt.	Reinigen Sie die Mikrofonöffnung vorsichtig mit der Reinigungsbürste.
	Hörhilfe ist beschädigt.	Kontaktieren Sie den Kundenservice.

Problem	Mögliche Ursachen	Behebung
Der Klang ist sehr schwach und undeutlich.	Lautstärkeeinstellung an der Hörhilfe ist zu gering.	Erhöhen Sie die Lautstärke wie in Kapitel 7 beschrieben.
	Akku ist fast leer.	Wechseln Sie den Akku und laden Sie den leeren Akku in der Aufbewahrungsbox mit Ladefunktion wie im Kapitel 6 beschrieben.
	Ohrstöpsel ist verunreinigt.	Befreien Sie den Ohrstöpsel und das vordere Schlauchende mit dem Reinigungsbürstchen von groben Verunreinigungen. Ziehen Sie dann den Ohrstöpsel ab und reinigen Sie ihn unter fließendem Wasser.
	Mikrofon ist verunreinigt.	Reinigen Sie die Mikrofonöffnung vorsichtig mit der Reinigungsbürste.
Der Klang ist sehr schwach und undeutlich.	Akku ist nicht richtig mit der Hörhilfe verbunden.	Kontrollieren Sie, ob der Akku richtig mit der Hörhilfe verbunden ist.
	Der integrierte Lautsprecher könnte beschädigt sein.	Kontaktieren Sie den Kundenservice.

Problem	Mögliche Ursachen	Behebung
Hörhilfe gibt unangenehme Pfeiftöne aus.	Der Ohrstöpsel der Hörhilfe passt nicht richtig ins Ohr. Dies kann unangenehme Pfeiftöne (akustische Rückkopplung) verursachen und die Funktion beeinträchtigen.	Versuchen Sie es mit einem anderen Ohrstöpsel. Es wird empfohlen, einen korrekt sitzenden Ohrstöpsel zu verwenden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
	Das Mikrofon der Hörhilfe ist verdeckt.	Verdecken Sie das Mikrofon der Hörhilfe nicht durch Teile des Ohres oder große Haarpartien. Dies kann akustische Rückkopplung begünstigen.
	Die Hörhilfe ist zu laut eingestellt.	Stellen Sie die Lautstärke der Hörhilfe wie in Kapitel 7 beschrieben leiser.
LEDs der Ladestation leuchten nicht	Die Hörhilfe könnten nicht richtig in der Aussparung sitzen oder das USB Kabel ist nicht richtig verbunden.	Prüfen Sie, ob die Hörhilfe richtig in der Aussparung sitzt und überprüfen Sie, ob das USB Kabel richtig mit der Aufbewahrungsbox und dem Netzteil verbunden ist.
	Die Ladkontakte in der Aufbewahrungsbox mit Ladefunktion sind verschmutzt.	Reinigen Sie die Ladkontakte vorsichtig mit einem trocknen Tuch. Setzen Sie anschließend die Hörhilfe erneut in die Aussparung ein.

11. Entsorgung

Allgemeine Entsorgung

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entfernt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammel-



stellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik-Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

Akku Entsorgung

- Die verbrauchten, vollkommen entladenen Akkus müssen Sie über speziell gekennzeichnete Sammelbehälter, Sondermüllannahmestellen oder über den Elektrohändler entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Akkus zu entsorgen:
- Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Akkus:
Pb = Batterie enthält Blei,
Cd = Batterie enthält Cadmium,
Hg = Batterie enthält Quecksilber.



12. Technische Angaben

Max. Schalldruckpegel (OSPL90):	118 dB ± 3 dB
Klangverstärkung:	43 dB ± 5 dB
Gesamte Oberwellenverzerrung:	≤3% @ 1600Hz
Frequenzbereich:	200~6700 Hz
Eingangsruschen:	≤32 dB
Spannung:	1,5 V — — —
Stromversorgung:	≤3 mA
Betriebsdauer:	≥ 26 Std.
Betriebsbedingungen:	Temperatur: -10°C ~ +40°C Relative Luftfeuchte: 30% ~ 75% Atmosphärischer Druck: 700 ~ 1600 hPa
Lager- und Transportbedingungen:	Temperatur: -10°C ~ +55°C Relative Luftfeuchte: 10% ~ 90% Atmosphärischer Druck: 500 ~ 1600 hPa

Die Seriennummer befindet sich auf dem Gerät.

13. Garantie und Service

Die Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (nachfolgend „Beurer“ genannt) gewährt unter den nachstehenden Voraussetzungen und in dem nachfolgend beschriebenen Umfang eine Garantie für dieses Produkt.

Die nachstehenden Garantiebedingungen lassen die gesetzlichen Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Käufer unberührt. Die Garantie gilt außerdem unbeschadet zwingender gesetzlicher Haftungs Vorschriften.

Beurer garantiert die mangelfreie Funktionstüchtigkeit und die Vollständigkeit dieses Produktes.

Die weltweite Garantiezeit beträgt 3 Jahre ab Beginn des Kaufes des neuen, ungebrauchten Produktes durch den Käufer.

Diese Garantie gilt nur für Produkte, die der Käufer als Verbraucher erworben hat und ausschließlich zu persönlichen Zwecken im Rahmen des häuslichen Gebrauchs verwendet.

Es gilt deutsches Recht.

Falls sich dieses Produkt während der Garantiezeit als unvollständig oder in der Funktionstüchtigkeit als mangelhaft gemäß der nachfolgenden Bestimmungen erweist, wird Beurer gemäß diesen Garantiebedingungen eine kostenfreie Ersatzlieferung oder Reparatur durchführen.

Wenn der Käufer einen Garantiefall melden möchte, wendet er sich zunächst an den Beurer Kundenservice:

Beurer GmbH, Servicecenter

Tel: +49 731 3989-144

Für eine zügige Bearbeitung nutzen Sie bitte unser Kontaktformular auf der Homepage **www.beurer.com** unter der Rubrik ‚Service‘.

Der Käufer erhält dann nähere Informationen zur Abwicklung des Garantiefalls, z.B. wohin er das Produkt kostenfrei senden kann und welche Unterlagen erforderlich sind.

Eine Inanspruchnahme der Garantie kommt nur in Betracht, wenn der Käufer

- eine Rechnungskopie/Kaufquittung und
- das Original-Produkt Beurer oder einem autorisierten Beurer Partner vorlegen kann.

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind

- Verschleiß, der auf normalem Gebrauch oder Verbrauch des Produktes beruht;
- zu diesem Produkt mitgelieferte Zubehörteile, die sich bei sachgemäßen Gebrauch abnutzen bzw. verbraucht werden (z.B. Batterien, Akkus, Manschetten, Dichtungen, Elektroden, Leuchtmittel, Aufsätze, Inhalatorzubehör);
- Produkte, die unsachgemäß und/oder entgegen der Bestimmungen der Bedienungsanleitung verwendet, gereinigt, gelagert oder gewartet wurden sowie Produkte, die vom Käufer oder einem nicht von Beurer autorisierten Servicecenter geöffnet, repariert oder umgebaut wurden;
- Schäden, die auf dem Transportweg zwischen Hersteller und Kunde bzw. zwischen Servicecenter und Kunde entstehen
- Produkte, die als 2.Wahl-Artikel oder als gebrauchte Artikel gekauft wurden;
- Folgeschäden, welche auf einem Mangel dieses Produktes beruhen (es können für diesen Fall jedoch Ansprüche aus Produkthaftung oder aus anderen zwingenden gesetzlichen Haftungsbestimmungen bestehen).

Reparaturen oder ein Komplettaustausch verlängern in keinem Fall die Garantiezeit.

ENGLISH



Read these instructions for use carefully and keep them for later use, be sure to make them accessible to other users and observe the information they contain.

Dear customer,

Thank you for choosing a product from our range. Our name stands for high-quality, thoroughly tested products for applications in the areas of heat, weight, blood pressure, blood glucose, body temperature, pulse, gentle therapy, beauty, massage and indoor air quality.

With kind regards,
Your Beurer team

Contents

1. Included in delivery.....	25	8. Cleaning and maintenance.....	38
2. Signs and symbols	26	9. Accessories and replacement parts	39
3. Warnings and safety notes.....	27	10. What if there are problems?	40
4. Proper use	31	11. Disposal.....	42
5. Device description.....	31	12. Technical specifications	43
6. Initial use	32	13. Warranty and service.....	44
7. Usage	34		

1. Included in delivery

Check that the exterior of the cardboard delivery packaging is intact and make sure that all contents are present. Before use, ensure that there is no visible damage to the device or accessories and that all packaging material has been removed. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Service address.

- 1 x HA 80 digital hearing amplifier
(includes sound tube for the left or right ear)
- 4 x earplugs (various sizes and designs)
- 1 x replaceable battery
- 1 x cleaning brush
- 1 x drying capsule
- 1 x storage box with charging function
- 1 x instructions for use



Getting to know your device










The hearing amplifier is a device to help people hear better. It does this by amplifying sounds and then transmitting them to the ear. The hearing amplifier can neither prevent nor alleviate organically caused hearing loss.


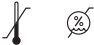
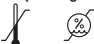


Nevertheless, it offers various usage possibilities. Whether you want to watch a film, chat with friends or just feel like listening to the sounds of nature in the woods, this hearing amplifier helps you to hear sounds more loudly and clearly.

These hearing amplifiers are amplifying devices and are not medical devices that can be used for therapeutic purposes.

2. Signs and symbols

The following symbols are used on the device, in these instructions for use, on the packaging and on the type plate for the device:

 WARNING	Warning notice indicating a risk of injury or damage to health.
 IMPORTANT	Safety note indicating possible damage to the device.
 Note	Note on important information.
	Observe the instructions for use.
	Serial number
	Application part type B
	Disposal in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment EC Directive – WEEE
	CE labelling This product satisfies the requirements of the applicable European and national directives.
	Certification symbol for products that are exported to the Russian Federation and CIS countries.

	Manufacturer
<p>Storage/Transport</p> 	Permissible storage and transport temperature and humidity
<p>Operating</p> 	Permissible operating temperature and humidity
	Dispose of packaging in an environmentally friendly manner.
<p>IP21</p>	Protected against solid foreign objects 12.5 mm in diameter and larger, and against vertically falling drops of water
	Use by

3. Warnings and safety notes

WARNING




- Consult your doctor before using these hearing amplifiers (if you are currently suffering from earache or have suffered from it in the past).
- Do NOT use the hearing amplifier if you are suffering from an inflammation of the middle ear or ear canal.

- If you feel unwell or experience pain when wearing the hearing amplifier, stop using it immediately and contact your doctor.
- If your ear becomes inflamed or your skin irritated, or if you experience an increased accumulation of earwax when wearing the hearing amplifier, stop using it immediately and contact your doctor.
- Stop using the hearing amplifier and seek medical attention if the following occurs:
 - Rash or eczema on areas of skin that come into contact with the hearing amplifier. (The hearing amplifier is made from a material that is kind to the skin. In rare cases, however, an allergic reaction may occur that appears in the form of eczema.)
 - Use of the hearing amplifier results in discharge from the ear and/or necessitates ear treatment.
 - Sudden, significant decrease in hearing ability.
- Start with the volume at a low setting and increase it gradually once you have become accustomed to the hearing amplifier.
- Do NOT set the volume too high, as this may cause further damage to your hearing over an extended period of time.
- Do NOT lend your hearing amplifier to others or use others' hearing amplifier, as there is a risk of hearing damage and infection if you do so.
- Do NOT pass on your hearing amplifier for use by other persons. The use of a hearing amplifier that was designed for someone else may cause hearing damage.
- The hearing amplifier is NOT suitable for use by small children below the age of 36 months.
- It is particularly difficult to diagnose hearing problems in children. Children should only be provided with a hearing amplifier following a thorough examination by an ENT specialist.
- Keep the hearing amplifier, the accessories and the batteries away from children, as there is a risk of injury and choking.
- This device is NOT intended for use by people (including children) with restricted physical, sensory or mental skills or a lack of experience and/or a lack of knowledge, unless they are supervised by a person who has responsibility for their safety or they receive instructions from

this person on how to use the device. Supervise children around the device to ensure they do not play with it.

- Do NOT use the hearing amplifier in potentially explosive and hazardous environments.
- Do NOT use the device in oxygen-rich environments and over an extended period of time.
- Please contact the manufacturer in the following cases:
 - if you require assistance in the set-up, use or maintenance of the hearing amplifier or
 - if the device behaves unexpectedly during operation or otherwise.
- If you have any doubts, do NOT use a damaged hearing amplifier; contact your retailer or the specified Customer Services address.
- Switch the device off immediately if it is faulty or not working properly.
- Do not attempt to open and/or repair the hearing amplifier yourself. Repairs may only be carried out by Customer Services or authorised retailers. Failure to observe this will invalidate the warranty.

Notes on handling batteries:

- If your skin or eyes come into contact with fluid from a battery cell, flush out the affected areas with water and seek medical assistance.
-  Choking hazard! Small children may swallow and choke on batteries. Batteries should be stored out of the reach of small children.
- If a battery leaks, put on protective gloves and dispose of the device.
- Protect batteries from excessive heat.
-  Risk of explosion! Never throw batteries into a fire.
-  Remove the battery from the device if you do not intend to use the device for an extended period of time.
- Do not disassemble, split or crush the battery.
- Only use chargers specified in the instructions for use.

- The battery must be charged correctly prior to use. The instructions from the manufacturer and the specifications regarding correct charging in these instructions for use must be observed at all times.
- Fully charge the battery prior to initial use (see section 7.).
- In order to achieve the longest battery service life possible, fully charge the battery at least 4 times a year.



IMPORTANT

- Do NOT wear the hearing amplifier in the vicinity of strong electromagnetic fields or X-rays.
- Do NOT wear the hearing amplifier while bathing, showering or swimming.
- Protect the device from impacts, humidity, dirt, marked temperature fluctuations, direct sunlight and high levels of air humidity.
- Very high temperatures may develop in closed vehicles during summer. You should therefore never leave your hearing amplifier inside a vehicle.
- Do NOT drop the device or subject it to any shocks.
- If the hearing amplifier falls into water, dry it with a cloth and then have it inspected by your retailer.
- Never attempt to dry the hearing amplifier in a microwave, a tumble dryer or with a hair dryer. The hearing amplifier may otherwise become damaged.
- Do NOT use the hearing amplifier together with a mobile phone. (The radio waves of the mobile phone may cause background noise or a loss of volume.)
- Do NOT wear the hearing amplifier while applying cosmetics (e.g. make-up, hairspray, perfume or sun cream).
- Do NOT wear the hearing amplifier while undergoing shortwave therapy or medical treatments that involve strong radio frequency or magnetic fields.
- Take care when operating the buttons. Do NOT press too firmly.
- Do not insert any sharp objects into the microphone opening as this may damage the microphone.

- Do NOT touch the magnets of the hearing amplifier as this may damage the device.
- Do NOT touch the inside of the device. There are many sensitive components that have been precisely configured. Under no circumstances should you poke at the inside of the hearing amplifier with a needle or similar object.
- Service your hearing amplifier at regular intervals. Make sure there are no foreign objects in between the earplug and speaker, as this could impair the sound.

4. Proper use

The hearing amplifiers must only be used in order to improve people's hearing ability. The devices are only designed for the use described in these instructions for use. The manufacturer assumes no liability for damage resulting from impermissible or improper use. These hearing amplifiers are amplifying devices and are not medical devices that can be used for therapeutic purposes.

5. Device description


Hearing amplifier

- 1 Minus button
- 2 Plus button
- 3 Program selection button
- 4 Microphone
- 5 Adapter
- 6 Sound tube
- 7 Fixing tube
- 8 Earplug
- 9 Replaceable battery




Storage box with charging function

- 1 Hearing amplifier charging position
- 2 Charging position of replaceable battery
- 3 Storage position for drying capsule
- 4 Micro-USB connection
- 5 Drying capsule

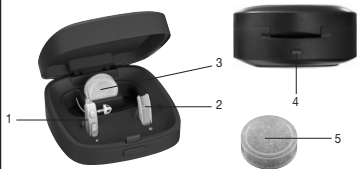

Cleaning brush

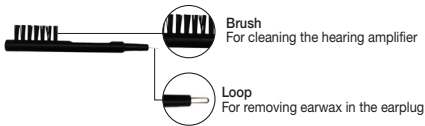

6. Initial use

Remove the hearing amplifier from the packaging and check that the device and all accessories are included and not damaged.

Charging the hearing amplifier using the storage box with charging function

To charge the device and battery, connect the mains part to a socket, plug in the enclosed micro-USB cable and connect it to your storage box with charging function.


Flashing green light:

The device and battery are charging.

Steady green light:

Device and battery are fully charged.

In general, it takes 2 hours before the device and battery are fully charged.

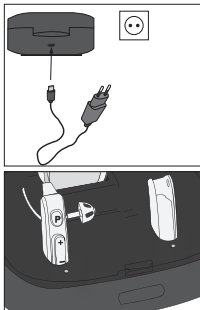

i Make sure the volume is initially set to the lowest setting before operating the hearing amplifier.



Note:

- i** • The charging process can be carried out with the lid open or closed.
- The hearing amplifier can be stored in the storage box with charging function after they have been fully charged and while you are not wearing them.

7. Usage

Adjusting your hearing amplifier

1. The hearing tubes are printed with “2B” in red and blue respectively. Red is for the right and blue is for the left ear.
2. Attach the earplug to the sound tube by pushing it over the grooves on the tube until it sits securely in place.
3. Place the hearing amplifier housing behind your ear. The curved part of the sound tube should sit comfortably on the ear (next to the arm of the glasses for glasses wearers).
4. Hold the sound tube in place and carefully insert the earplug into the ear canal. Make sure not to insert the earplug too deeply into the ear canal. If the earplug is not properly in place or feels uncomfortable, try a different earplug.
5. Place the fixing tube along your outer ear. This ensures the earplug sits more tightly in your ear. If the fixing tube bothers you, you can cut it off. It is not absolutely necessary.

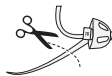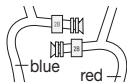

- i** Check whether you have selected the correct size of earplug by moving your head slowly up and down and then left and right while opening and closing your jaw. If the earplug slips out, it is too small. If you wear glasses, place the arm of the glasses between your head and the hearing amplifier.

- i** **IMPORTANT**
Never insert the sound tube into the ear canal without an earplug. Make sure also not to press the tube and earplug too deeply into the ear canal.

Switching the device on/off

In order to switch the hearing amplifiers on/off, hold down the program selection button on the device for three (3) seconds until you hear a beep.



Adjusting the volume

Plus button:

Increases the volume (press briefly)

Minus button:

Decreases the volume (press briefly)



Use the volume button to adjust the volume to the desired level so that you can hear sounds clearly and distinctly.

i Note:

- If you hear a slight whistling sound when wearing the hearing amplifier, check that your ear-plug is fitted properly in your ear. If it is not snug enough, use a different earplug.
- The hearing amplifier cannot heal an existing hearing impairment, but it does improve hearing and speech understanding.
- If you hear a single beep, the volume has been increased or reduced.
- If two beeps sound in succession, the highest or lowest possible volume has been reached.

Setting the hearing programs


To change the hearing program, press the program selection button.

P1: Normal mode (1x beep):

Suitable for quiet environments, e.g. at home or in the office.


P2: Noise reduction mode (2x beep)::

Suitable for outside areas, e.g. on the move, in the supermarket or restaurant)

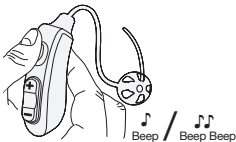

Changing the battery

To change the battery of the hearing amplifier, hold the battery firmly with one hand, and hold the upper part of the hearing amplifier with the other hand, then slide the two pieces apart. Now take the fully charged spare battery and slide it onto the hearing amplifier. The hearing amplifier is now ready to use again.

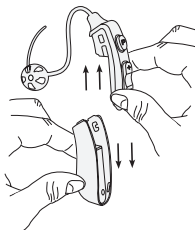

Replacing the sound tube

Please have the replacement sound tube set to hand for replacement. Check it in advance to ensure that it has the correct colour marking (red is for the right and blue for the left ear).

1. Remove the battery from the device for better grip.
2. Hold the device in one hand and use the other hand to grip the adapter that connects the sound tube and the device between your thumb and index finger.
3. Turn the adapter anticlockwise while also turning the device clockwise.
4. As soon as the adapter has turned through approximately 90°, pull the sound tube off in an upward direction. Hold the device firmly while doing so.
5. Pick up the new sound tube. Put the sound tube in position and, applying gentle pressure, rotate it fully onto the device in a clockwise direction until the arrow on the front is again in alignment with the device buttons.
6. Check that the sound tube is in place before you reinsert the battery and switch on the device.

If you have any problems removing the sound tube, try using a pair of tweezers, for example, to grip the adapter.

Inserting the drying capsule


A drying capsule is included in delivery. Wearing the hearing amplifier behind your ear means it comes into contact with your skin, and therefore also with sweat, for example. This means that you should dry the device after each use to care for it properly.

Remove the drying capsule from the packaging and place it with slight pressure inside the storage slot intended for this purpose.

The capsule has a colour indicator. As the drying capacity decreases over time, the colour changes from bright orange to white. If the capsule is a whitish colour, it no longer has any drying capacity and has to be replaced.

To find out where to obtain a new drying capsule, see section 10. “Accessories and replacement parts”.

Note: To ensure the best possible drying performance, close the lid of the storage box with charging function after placing the hearing amplifier inside.

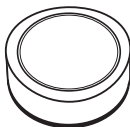

8. Cleaning and maintenance



- Always keep the hearing amplifier clean.
- Always treat the product with care and prevent the earplug and microphone from becoming blocked with foreign matter. Such blockages impair the sound amplification function.
- Clean the hearing amplifier and the earplugs with a clean, dry cloth after each use. If they are very dirty, you can also moisten the cloth with a mild soapy solution. Never use abrasive, corrosive or solvent-based cleaning products.

- Under no circumstances should you hold the hearing amplifier under water, as this can cause liquid to enter and damage the hearing amplifier.
- The cleaning brush supplied is suitable for removing earwax stuck in the earplug (see device description).
- Allow the hearing amplifier to fully dry after cleaning. Store the hearing amplifier in a safe, dry and clean place in the relevant storage box with charging function, with the drying capsule.
- The drying capsule must be replaced if the colour of the granulate changes from orange to white (you can find out where to obtain a new drying capsule in section 10. “Accessories and replacement parts”).

9. Accessories and replacement parts

Accessories and replacement parts are available from the corresponding service address listed under the specified material number.

Designation	Item number and/or order number
Drying capsules HA 60/80/85 (8 pieces)	641.15
Sound tubes size S	164.341
Sound tubes size L	164.342

10. What if there are problems?

Problem	Possible causes	Solution
No sound can be heard from the hearing amplifier.	Hearing amplifier is not switched on.	Switch on the hearing amplifier as described in chapter 7.
	Battery is not properly connected with the hearing amplifier.	Check whether the battery is properly connected with the hearing amplifier.
	Battery is empty.	Replace the battery and charge the empty battery in the storage box with charging function, as described in chapter 6.
	Microphone is dirty.	Clean the microphone opening carefully with the cleaning brush.
	Hearing amplifier is damaged.	Contact Customer Services.

Problem	Possible causes	Solution
The tone is very weak and faint.	Volume setting on the hearing amplifier is too low.	Increase the volume as described in chapter 7.
	The battery is almost empty.	Replace the battery and charge the empty battery in the storage box with charging function, as described in chapter 6.
	Earplug is dirty.	Remove the earplug and clear away coarse impurities using the cleaning brush. Then clean the earplug under running water.
	Microphone is dirty.	Clean the microphone opening carefully with the cleaning brush.
	Battery is not properly connected with the hearing amplifier.	Check whether the battery is properly connected with the hearing amplifier.
	The integrated speaker may be damaged.	Contact Customer Services.

Problem	Possible causes	Solution
Hearing amplifier emits unpleasant whistling sounds.	The earplug of the hearing amplifier does not fit in your ear properly. This may cause unpleasant whistling sounds (acoustic feedback) and impair the functioning.	Try again with another earplug. It is recommended to use an earplug that fits properly. If you have any doubts, please contact Customer Services.
	The hearing amplifier microphone is covered.	Do not cover the hearing amplifier microphone with parts of the ear or large portions of hair. This may encourage acoustic feedback.
	The hearing amplifier is set too loud.	Lower the hearing amplifier volume as described in chapter 7.
LEDs of the charger do not light up	The hearing amplifier could not sit correctly in the opening or the USB cable is not correctly connected.	Check whether the hearing amplifier is sitting correctly in the opening and check whether the USB cable is correctly connected to the storage box and the mains part.
	The charging contacts in the storage box with charging function are dirty.	Clean the charging contacts carefully with a dry towel. Then reinsert the hearing amplifiers into the opening.

11. Disposal

General disposal

For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its useful life. Dispose of the device at a suitable local collection or recycling



point in your country. Dispose of the device in accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.

Rechargeable battery disposal

- The empty, completely flat batteries must be disposed of using specially designated collection boxes, recycling points or electronics retailers. You are legally required to dispose of the batteries:
- The codes below are printed on rechargeable batteries containing harmful substances:
Pb = Battery contains lead,
Cd = Battery contains cadmium,
Hg = Battery contains mercury.



12. Technical specifications

Max. sound pressure level (OSPL90):	118 dB ± 3 dB
Sound amplification:	43 dB ± 5 dB
Overall harmonic distortion:	≤ 3% @ 1600 Hz
Frequency range:	200~6700 Hz
Input noise:	≤ 32 dB
Voltage:	1.5 V ---
Power supply:	≤ 3 mA
Operation period:	≥ 26 hours
Operating conditions:	Temperature: -10°C ~ +40°C Relative humidity: 30% ~ 75% Atmospheric pressure: 700 ~ 1600 hPa
Storage and transportation conditions:	Temperature: -10°C ~ +55°C Relative humidity: 10% ~ 90% Atmospheric pressure: 500 ~ 1600 hPa

The serial number is located on the device.

13. Warranty and service

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany (hereinafter referred to as “Beurer”) provides a warranty for this product, subject to the requirements below and to the extent described as follows.

The warranty conditions below shall not affect the seller’s statutory warranty obligations which ensue from the sales agreement with the buyer.

The warranty shall apply without prejudice to any mandatory statutory provisions on liability.

Beurer guarantees the perfect functionality and completeness of this product.

The worldwide warranty period is 3 years, commencing from the purchase of the new, unused product from the seller.

The warranty only applies to products purchased by the buyer as a consumer and used exclusively for personal purposes in the context of domestic use.

German law shall apply.

During the warranty period, should this product prove to be incomplete or defective in functionality in accordance with the following provisions, Beurer shall carry out a repair or a replacement delivery free of charge, in accordance with these warranty conditions.

If the buyer wishes to make a warranty claim, they should approach their local retailer in the first instance: see the attached “International Service” list of service addresses.

The buyer will then receive further information about the processing of the warranty claim, e.g. where they can send the product and what documentation is required.

A warranty claim shall only be considered if the buyer can provide Beurer, or an authorised Beurer partner, with

- a copy of the invoice/purchase receipt, and
- the original product.

The following are explicitly excluded from this warranty:

- deterioration due to normal use or consumption of the product;
- accessories supplied with this product which are worn out or used up through proper use (e.g. batteries, rechargeable batteries, cuffs, seals, electrodes, light sources, attachments and nebuliser accessories);
- products that are used, cleaned, stored or maintained improperly and/or contrary to the provisions of the instructions for use, as well as products that have been opened, repaired or modified by the buyer or by a service centre not authorised by Beurer;
- damage that arises during transport between manufacturer and customer, or between service centre and customer;
- products purchased as seconds or as used goods;
- consequential damage arising from a fault in this product (however, in this case, claims may exist arising from product liability or other compulsory statutory liability provisions).

Repairs or an exchange in full do not extend the warranty period under any circumstances.

FRANÇAIS



Lisez attentivement ce mode d'emploi, conservez-le pour un usage ultérieur, mettez-le à disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits. Notre société est réputée pour l'excellence de ses produits et les contrôles de qualité auxquels ils sont soumis. Nos produits couvrent les domaines de la chaleur, du poids, de la pression sanguine, de la glycémie sanguine, de la température corporelle, du pouls, de la thérapie douce, de la beauté, des massages et de l'amélioration de l'air.

Sincères salutations,
Votre équipe Beurer

Sommaire

1. Contenu.....	47	7. Utilisation.....	56
2. Symboles utilisés.....	48	8. Nettoyage et entretien.....	61
3. Consignes d'avertissement et de mise en garde.....	49	9. Accessoires et pièces de rechange.....	62
4. Utilisation conforme aux recommandations.....	53	10. Que faire en cas de problèmes ?.....	62
5. Description de l'appareil.....	54	11. Élimination.....	65
6. Mise en service.....	55	12. Caractéristiques techniques.....	65
		13. Garantie et maintenance.....	66

1. Contenu

Vérifiez si l'emballage carton extérieur du kit est intact et si tous les éléments sont inclus. Avant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil et les accessoires ne présentent aucun dommage visible et que la totalité de l'emballage a bien été retirée. En cas de doute, ne l'utilisez pas et adressez-vous à votre revendeur ou au service client indiqué.

- 1 amplificateurs auditifs numériques HA 80
(avec tube sonore pour l'oreille gauche ou droite)
- 4 embouts auriculaires (de taille et de style différents)
- 1 batterie interchangeable
- 1 brosse de nettoyage
- 1 capsule déshydratante
- 1 boîte de rangement avec fonction de recharge
- 1 mode d'emploi



Familiarisation avec l'appareil










Amplificateurs auditifs numériques permet de renforcer les capacités auditives chez l'Homme. Elle amplifie les sons, puis les transfère à l'oreille. Amplificateurs auditifs numériques ne peut ni prévenir ni atténuer les troubles auditifs organiques.


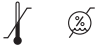
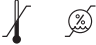


Elle vous offre de nombreuses possibilités d'application. Que vous vouliez regarder un film, discuter avec des amis ou tout simplement écouter les bruits de la nature dans la forêt, amplificateurs auditifs numériques vous aide à entendre les sons plus clairement.

Ces amplificateurs auditifs ne sont pas des dispositifs médicaux destinés à être utilisés à des fins thérapeutiques.

2. Symboles utilisés

Les symboles suivants sont utilisés sur le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil :

 AVERTISSEMENT	Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour votre santé.
 ATTENTION	Ce symbole vous avertit des éventuels dommages au niveau de l'appareil.
 Remarque	Ce symbole indique des informations importantes.
	Respecter les consignes du mode d'emploi.
	Numéro de série
	Appareil de type B
	Élimination conformément à la directive européenne WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques
	Signe CE Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.
	Marque de certification pour les produits exportés en Fédération de Russie et dans les pays de la CEI.

	Fabricant
Storage/Transport 	Température et taux d'humidité de stockage et de transport admissibles
Operating 	Température et taux d'humidité d'utilisation admissibles
	Éliminer l'emballage dans le respect de l'environnement.
IP21	Protection contre les corps solides, diamètre 12,5 mm ou plus, et contre les chutes de gouttes d'eau
	Utilisable jusqu'à

3. Consignes d'avertissement et de mise en garde



AVERTISSEMENT



- Consultez votre médecin avant d'utiliser ces amplificateurs auditifs (si vous souffrez actuellement d'otite ou si vous en avez souffert par le passé).
- N'utilisez PAS amplificateurs auditifs numériques si vous avez une otite moyenne ou si vous souffrez d'une inflammation du conduit auditif.
- Si vous ressentez une douleur ou une gêne lors du port de amplificateurs auditifs numériques, cessez de l'utiliser et contactez votre médecin.

- Si vous remarquez une inflammation de l'oreille, une irritation cutanée ou un excès de cérumen (cire de l'oreille) lors du port de amplificateurs auditifs numériques, cessez l'utilisation et contactez votre médecin.
- Cessez d'utiliser amplificateurs auditifs numériques et consultez un médecin si :
 - une éruption cutanée ou de l'eczéma apparaît sur les zones de la peau en contact avec amplificateurs auditifs numériques. (Amplificateurs auditifs numériques est conçue dans un matériau agréable pour la peau. Dans de rares cas, ce matériau peut entraîner des réactions allergiques, qui peuvent se manifester sous la forme d'eczéma.)
 - l'utilisation de amplificateurs auditifs numériques provoque un écoulement dans l'oreille ou rend le traitement de l'oreille nécessaire.
 - les capacités auditives diminuent considérablement et soudainement.
- Réglez d'abord le volume à un niveau faible, puis augmentez-le progressivement lorsque vous vous habituez à amplificateurs auditifs numériques.
- Ne réglez PAS le volume à un niveau trop élevé, car cela peut, à long terme, endommager encore plus l'audition.
- Ne prêtez PAS votre amplificateurs auditifs numériques à une autre personne et n'utilisez pas non plus amplificateurs auditifs numériques de quelqu'un d'autre. Vous vous exposeriez à un risque de dommages et d'infections auditives.
- Ne laissez PAS d'autres personnes utiliser votre amplificateurs auditifs numériques. L'utilisation d'aides auditives conçues pour une autre personne peut entraîner une perte auditive.
- Amplificateurs auditifs numériques n'est PAS prévue pour être utilisée par de jeunes enfants de moins de 36 mois.
- Le diagnostic des problèmes d'audition est particulièrement compliqué chez les enfants. Les enfants ne doivent utiliser une amplificateurs auditifs numériques qu'après un examen approfondi effectué par un ORL.
- Conservez amplificateurs auditifs numériques, les accessoires et les batteries hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque de blessure et d'ingestion.
- Cet appareil n'est PAS conçu pour être utilisé par une personne (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont limitées, ou n'ayant pas l'expé-

rience et/ou les connaissances nécessaires. Le cas échéant, cette personne doit, pour sa sécurité, être surveillée par une personne compétente ou doit recevoir de cette dernière des recommandations sur la manière d'utiliser l'appareil. Surveillez les enfants afin de les empêcher de jouer avec l'appareil.

- N'utilisez PAS amplificateurs auditifs numériques dans des environnements explosifs ou dangereux.
- N'utilisez PAS l'appareil dans des environnements enrichis en oxygène et pendant une longue durée.
- Dans les cas suivants, contacter le fabricant :
 - si vous avez besoin d'aide pour la mise en place, l'utilisation ou l'entretien de amplificateurs auditifs numériques ; ou
 - si, pendant son fonctionnement, l'appareil se comporte de façon inattendue ou si vous remarquez divers incidents.
- En cas de doute, n'utilisez PAS d'aides auditives endommagées et adressez-vous à votre revendeur ou au service client indiqué.
- Éteignez immédiatement l'appareil s'il est défectueux ou présente des défauts de fonctionnement.
- N'essayez en aucun cas d'ouvrir vous-même amplificateurs auditifs numériques et/ou de la réparer. Seul le service client ou un opérateur autorisé peut procéder à une réparation. Le non-respect de cette consigne annulerait la garantie.

Remarques relatives aux batteries :

- Si du liquide de la cellule de batterie entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
-  Risque d'ingestion ! Les enfants en bas âge pourraient avaler des batteries et s'étouffer. Veuillez donc conserver les batteries hors de portée des enfants en bas âge.
- Si une batterie a fui, enfillez des gants de protection et nettoyez l'appareil.
- Protégez les batteries d'une chaleur excessive.
-  Risque d'explosion ! Ne jetez pas les batteries au feu.
- En cas de non-utilisation prolongée de l'appareil, retirez les batteries de l'appareil.
- Ne démontez, n'ouvrez ou ne cassez pas les batteries.
- N'utilisez que le chargeur indiqué dans le mode d'emploi.
- Les batteries doivent être chargées correctement avant utilisation. Pour charger l'appareil, respecter toujours les instructions du fabricant ou les informations contenues dans ce mode d'emploi.
- Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie (voir chapitre 6).
- Rechargez la batterie complètement au moins 4 fois par an pour atteindre une durée de vie maximale de la batterie.

ATTENTION

- NE portez PAS amplificateurs auditifs numériques à proximité de champs électromagnétiques puissants ou de rayons X.
- NE portez PAS amplificateurs auditifs numériques dans le bain, sous la douche ou à la piscine.
- Protégez les appareils contre les chocs, l'humidité, les saletés, les fortes variations de température, l'ensoleillement direct et l'humidité de l'air élevée.
- L'été, dans une voiture fermée, la température peut devenir très élevée. Ne laissez jamais amplificateurs auditifs numériques dans votre voiture.

- Évitez de secouer ou de faire tomber l'appareil.
- Si amplificateurs auditifs numériques tombe dans l'eau, séchez-la à l'aide d'un chiffon et faites-la ensuite vérifier par votre revendeur.
- N'utilisez pas de micro-ondes, de sèche-linge, ni de sèche-cheveux pour faire sécher votre amplificateurs auditifs numériques. Cela pourrait l'endommager.
- N'utilisez PAS amplificateurs auditifs numériques avec un téléphone mobile. (Les ondes radio émises par les téléphones mobiles peuvent provoquer des interférences ou une atténuation du volume.)
- Ne portez PAS amplificateurs auditifs numériques lorsque vous appliquez des produits cosmétiques (par exemple, maquillage, laque, parfum ou crème solaire).
- Ne portez PAS amplificateurs auditifs numériques lors de thérapies par ondes courtes ou lors de traitements médicaux pouvant faire intervenir des champs correspondant aux fréquences radio ou magnétiques puissants.
- Manipulez les touches avec précaution. N'appuyez PAS dessus trop fermement.
- N'insérez pas d'objets pointus dans les ouvertures du microphone, cela pourrait l'endommager.
- Ne touchez PAS l'aimant des aides auditives, cela pourrait endommager l'appareil.
- Ne touchez PAS à l'intérieur de l'appareil. Il contient de nombreuses pièces sensibles qui ont été ajustées avec précision. Ne piquez en aucun cas une aiguille ou un objet similaire à l'intérieur de amplificateurs auditifs numériques.
- Entretenez régulièrement votre amplificateurs auditifs numériques. Assurez-vous qu'aucun corps étranger ne se trouve entre l'embout auriculaire et le haut-parleur, cela risquerait de créer des troubles sonores.


4. Utilisation conforme aux recommandations

Les amplificateurs auditifs ne peuvent être utilisés que dans le but d'améliorer les capacités auditives des personnes malentendantes. Les appareils ont été conçus exclusivement pour l'utilisation décrite dans le présent mode d'emploi. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou inadéquate. Ces amplificateurs auditifs ne sont pas des dispositifs médicaux destinés à être utilisés à des fins thérapeutiques.

5. Description de l'appareil


Amplificateurs auditifs numériques

- 1 Touche Moins
- 2 Touche Plus
- 3 Touche de sélection du programme
- 4 Microphone
- 5 Connecteur
- 6 Tube sonore
- 7 Brin de fixation
- 8 Embout auriculaire
- 9 Batterie interchangeable

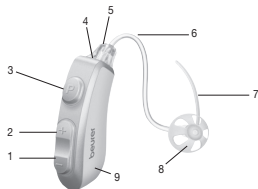


Boîte de rangement avec fonction de recharge

- 1 Position de chargement de amplificateurs auditifs numériques
- 2 Position de chargement de la batterie interchangeable
- 3 Position de rangement de la capsule déshydratante
- 4 Prise micro USB
- 5 Capsule déshydratante

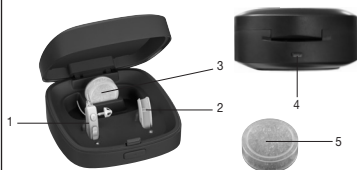

Brosse de nettoyage

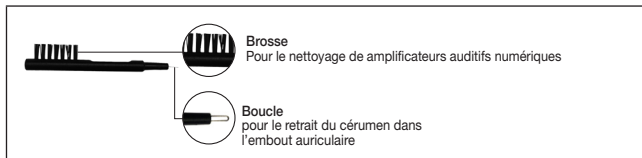

6. Mise en service

Retirez amplificateurs auditifs numériques de l'emballage et vérifiez que l'appareil et tous les accessoires sont inclus et en bon état.

Recharge de amplificateurs auditifs numériques avec la boîte de rangement avec fonction de recharge

Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique, branchez le câble micro USB fourni et raccordez-le à votre boîte de rangement avec fonction de recharge pour recharger l'appareil et les batteries.



Voyant vert clignotant :

Recharge de l'appareil et des batteries en cours.

Voyant vert fixe :

Appareil et batteries rechargés.

La charge complète de l'appareil et des batteries dure généralement 2 heures.

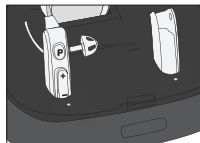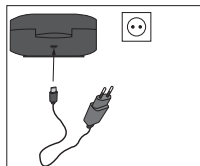

- i** Avant de mettre amplificateurs auditifs numériques en marche, assurez-vous que le volume est réglé au niveau le plus bas pour commencer.


Remarque :

- i**
- La recharge peut être réalisée avec le couvercle ouvert ou fermé.
 - À la fin de la recharge et lorsque vous ne les portez pas, les aides auditives peuvent être rangées dans la boîte de rangement avec fonction de recharge.

7. Utilisation

Ajuster amplificateurs auditifs numériques


1. Les tubes sonores sont marqués d'un « 2B » rouge ou bleu. Le rouge correspond à l'oreille droite et le bleu à l'oreille gauche.
2. Fixez l'embout auriculaire sur le tube sonore en l'insérant dans les rainures du tube jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Placez le boîtier de amplificateurs auditifs numériques derrière l'oreille. La courbure du tube sonore doit reposer confortablement sur l'oreille (pour les porteurs de lunettes, à côté de la branche).

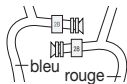

4. Tenez fermement le tube sonore et insérez doucement l'embout auriculaire dans le conduit auditif. Assurez-vous que l'embout n'est pas inséré trop profondément dans le conduit auditif. Si l'embout auriculaire ne se place pas correctement ou s'il vous gêne, essayez un autre embout.



5. Posez le brin de fixation le long de votre pavillon. Cela permet un meilleur ajustement de l'embout auriculaire à l'oreille. Si le brin de fixation vous dérange, vous pouvez le couper. Il n'est pas indispensable.

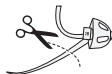

i Vérifiez que la taille de l'embout auriculaire est adaptée en hochant doucement la tête de haut en bas, puis de droite à gauche, tout en mastiquant. Si l'embout auriculaire glisse, c'est qu'il est trop petit. Si vous portez des lunettes, placez la branche entre votre tête et amplificateurs auditifs numériques.

i **IMPORTANT**
N'insérez jamais le tube sonore dans le conduit auditif sans embout auriculaire. Assurez-vous que le tube et l'embout ne sont pas insérés trop profondément dans le conduit auditif.

Mettre en marche/éteindre l'appareil

Pour mettre en marche ou éteindre les aides auditives, maintenez la touche de sélection du programme pendant trois (3) secondes jusqu'à entendre deux bips.



Régler le volume

Touche Plus :

augmenter le volume (pression brève)

Touche Moins :

diminuer le volume (pression brève)



Pour entendre les sons clairement, réglez le volume souhaité à l'aide du réglage du volume sonore.

i Remarque :

- Si vous entendez de légers sifflements lors du port de amplificateurs auditifs numériques, vérifiez que l'embout auriculaire est correctement placé dans votre oreille. S'il ne se place pas correctement, essayez un autre embout.
- Amplificateurs auditifs numériques ne peut pas guérir une perte auditive existante, mais elle peut améliorer l'audition et la compréhension de la parole.
- Un seul bip retentit lorsque vous augmentez ou vous diminuez le volume.
- En revanche, deux bips retentissent lorsque vous atteignez le volume maximum ou minimum.

Sélectionner un programme auditif


Pour modifier le programme auditif, appuyez sur la touche de sélection du programme.

P1 : mode normal (1 bip) :

Convient aux environnements silencieux, par exemple, à la maison ou au bureau.


P2 : mode de réduction de bruit (2 bips) :

Convient pour une utilisation en extérieur, par exemple en voiture, au supermarché ou au restaurant)

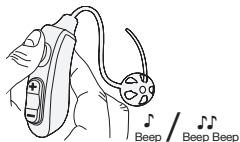

Remplacer la batterie

Pour remplacer la batterie de amplificateurs auditifs numériques, tenez la batterie d'une main et faites glisser de l'autre main la partie supérieure de amplificateurs auditifs numériques dans la direction opposée. Prenez maintenant la batterie de recharge complètement chargée et placez-la sur amplificateurs auditifs numériques. Amplificateurs auditifs numériques est de nouveau prête à l'emploi.

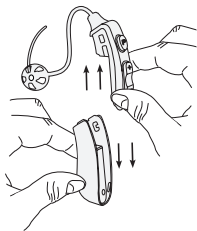

Remplacement du tube sonore

Pour le remplacement, veuillez préparer le tube sonore de rechange. Vérifiez le bon marquage coloré au préalable (le rouge correspond à l'oreille droite et le bleu à l'oreille gauche).


1. Retirez la batterie de l'appareil pour une meilleure prise en main.
2. Tenez l'appareil d'une seule main et saisissez, avec l'autre main, le connecteur du tube sonore de l'appareil entre le pouce et l'index.
3. Tournez le connecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et l'appareil en parallèle dans le sens inverse.
4. Lorsque le connecteur est tourné d'environ 90°, tirez le tube sonore vers le haut. Pendant ce temps, tenez bien l'appareil.
5. Attrapez le nouveau tube sonore. Placez le tube sonore et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre en exerçant une légère pression sur l'appareil, jusqu'à ce que la flèche sur la face avant soit de nouveau alignée avec les touches de l'appareil.
6. Vérifiez le bon positionnement du tube sonore avant de réinsérer la batterie et de remettre l'appareil en service.

Si vous rencontrez des problèmes lors du retrait du tube sonore, utilisez par exemple une pince pour saisir le connecteur.

Mettre en place la capsule déshydratante

L'appareil est fourni avec une capsule déshydratante. En portant amplificateurs auditifs numériques derrière l'oreille, elle entre en contact avec la peau et donc aussi avec la transpiration, par exemple. Pour entretenir l'appareil, il est donc nécessaire de le faire sécher après chaque utilisation.

Retirez la capsule déshydratante de son emballage et placez-la dans l'emplacement prévu à cet effet en exerçant une légère pression.

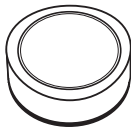

La capsule contient un indicateur coloré. Lorsque la puissance de séchage diminue, la couleur, initialement orange, devient blanche. Si la capsule est blanche, sa puissance de séchage est épuisée et doit être remplacée.

Pour savoir où se procurer une nouvelle capsule déshydratante, voir le chapitre « 9. Accessoires et pièces de rechange ».

Remarque : Pour un séchage optimal, fermez le couvercle de la boîte de rangement avec fonction de recharge après avoir utilisé amplificateurs auditifs numériques.



8. Nettoyage et entretien



ATTENTION

- Gardez toujours amplificateurs auditifs numériques propre.
- Manipulez toujours les appareils avec précaution et évitez qu'un corps étranger ne bouche l'embout auriculaire et le microphone. Ceci perturbe la fonction d'amplification du son.
- Après chaque utilisation, nettoyez amplificateurs auditifs numériques et l'embout auriculaire à l'aide d'un chiffon propre et sec. En cas de salissures plus importantes, vous pouvez également humidifier légèrement le chiffon avec de la lessive. N'utilisez pas de produit abrasif, corrosif ou contenant des solvants.
- Ne passez jamais amplificateurs auditifs numériques sous l'eau ; l'eau pourrait s'infiltrer à l'intérieur de amplificateurs auditifs numériques et l'endommager.
- La brosse de nettoyage fournie est idéale pour retirer le cérumen coincé dans l'embout auriculaire (cf. description de l'appareil).
- Après le nettoyage, laissez sécher complètement amplificateurs auditifs numériques. Conservez amplificateurs auditifs numériques dans un endroit sûr, sec et propre, dans sa boîte de rangement avec fonction de recharge avec la capsule déshydratante.
- La capsule déshydratante doit être remplacée lorsque les granulés, initialement orange, deviennent blancs (pour savoir où se procurer une nouvelle capsule déshydratante, voir le chapitre « 9. Accessoires et pièces de rechange »).

9. Accessoires et pièces de rechange

Les accessoires et pièces de rechange sont disponibles à l'adresse du service après-vente concerné, sous la référence donnée.

Désignation	Numéro d'article ou référence
Cartouches déshydratantes HA 60/80/85 (8 pces)	641.15
Tubes acoustiques taille S	164.341
Tubes acoustiques taille L	164.342

10. Que faire en cas de problèmes ?

Problème	Causes possibles	Solution
Aucun son ne se fait entendre dans amplificateurs auditifs numériques.	Amplificateurs auditifs numériques n'est pas allumée.	Allumez amplificateurs auditifs numériques comme indiqué au chapitre 7.
	La batterie n'est pas correctement reliée à amplificateurs auditifs numériques.	Vérifiez que la batterie est correctement reliée à amplificateurs auditifs numériques.
	La batterie est vide.	Changez la batterie et chargez la batterie vide dans la boîte de rangement avec fonction de recharge comme indiqué au chapitre 6.
	Le microphone est encrassé.	Nettoyez avec précaution les ouvertures du microphone avec la brosse de nettoyage.
	Amplificateurs auditifs numériques est endommagée.	Contactez le service client.

Problème	Causes possibles	Solution
Le son est très faible et indistinct.	Le réglage du volume sonore de amplificateurs auditifs numériques est trop faible.	Augmentez le volume comme indiqué au chapitre 7.
	La batterie est presque vide.	Changez la batterie et chargez la batterie vide dans la boîte de rangement avec fonction de recharge comme indiqué au chapitre 6.
	L'embout auriculaire est encrassé.	Enlevez les grosses impuretés de l'embout auriculaire et de l'extrémité avant du tube avec la brosse de nettoyage. Retirez ensuite l'embout auriculaire et nettoyez-le sous l'eau courante.
	Le microphone est encrassé.	Nettoyez avec précaution les ouvertures du microphone avec la brosse de nettoyage.
	La batterie n'est pas correctement reliée à amplificateurs auditifs numériques.	Vérifiez que la batterie est correctement reliée à amplificateurs auditifs numériques.
	Le haut-parleur intégré peut être endommagé.	Contactez le service client.

Problème	Causes possibles	Solution
Amplificateurs auditifs numériques émet des sifflements désagréables.	L'embout auriculaire de amplificateurs auditifs numériques ne rentre pas correctement dans l'oreille. Cela peut provoquer des sifflements désagréables (effet larsen) et nuire au fonctionnement de l'appareil.	Essayez avec un autre embout auriculaire. Il est recommandé d'utiliser un embout auriculaire correctement positionné. En cas de doute, adressez-vous au service client.
	Le microphone de amplificateurs auditifs numériques est couvert.	Assurez-vous que le microphone de amplificateurs auditifs numériques n'est pas recouvert par certaines parties de l'oreille ou des mèches de cheveux. Cela pourrait entraîner des effets larsen.
	Le son de amplificateurs auditifs numériques est trop fort.	Baissez le volume de amplificateurs auditifs numériques comme indiqué au chapitre 7.
Les LED de la station de charge ne fonctionnent pas	Il se peut que amplificateurs auditifs numériques ne s'insère pas correctement dans l'emplacement ou que le câble USB ne soit pas correctement relié.	Vérifiez que amplificateurs auditifs numériques est correctement insérée dans l'emplacement et que le câble USB est correctement relié à la boîte de rangement et à l'alimentation électrique.
	Les contacts de charge de la boîte de rangement avec fonction de recharge sont sales.	Nettoyez soigneusement les contacts de charge à l'aide d'un chiffon sec. Réinsérez ensuite l'amplificateur auditive dans son emplacement.

11. Élimination

Élimination générale

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de service. L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays. Éliminez l'appareil conformément à la directive européenne – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.



Élimination des batteries

- Les batteries usagées et complètement déchargées doivent être mises au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage ou bien déposées chez un revendeur d'appareils électriques. L'élimination des batteries est une obligation légale qui vous incombe :
- Ces pictogrammes se trouvent sur les batteries à substances nocives :
Pb = pile contenant du plomb,
Cd = pile contenant du cadmium,
Hg = pile contenant du mercure.



12. Caractéristiques techniques

Niveau de pression acoustique max. (OSPL90) :	118 dB ± 3 dB
Amplification sonore :	43 dB ± 5 dB
Distorsion harmonique totale :	≤ 3 % @ 1 600 Hz
Plage de fréquences :	200~6 700 Hz
Bruit d'entrée :	≤ 32 dB
Tension :	1,5 V $\overline{\overline{=}}$
Alimentation électrique :	≤ 3 mA

Durée de fonctionnement :	≥ 26 heures
Conditions d'utilisation :	Température : -10 °C ~ +40 °C Humidité relative de l'air : 30 % ~ 75 % Pression atmosphérique : 700 ~ 1 600 hPa
Conditions de stockage et de transport:	Température : -10 °C ~ +55 °C Humidité relative de l'air : 10 % ~ 90 % Pression atmosphérique : 500 ~ 1 600 hPa

Le numéro de série se trouve sur l'appareil.

13. Garantie et maintenance

La société Beurer GmbH, sise Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Allemagne, (ci-après désignée « Beurer ») propose une garantie pour ce produit dans les conditions suivantes et dans la mesure prévue ci-après.

Les conditions de garantie suivantes n'affectent en rien les obligations de garantie du vendeur découlant du contrat de vente conclu avec l'acheteur.

La garantie s'applique également sans préjudice de la responsabilité légale obligatoire.

Beurer garantit le bon fonctionnement et l'intégrité de ce produit.

La période de garantie mondiale est de 3 ans à compter de la date d'achat par l'acheteur du produit neuf et non utilisé.

Cette garantie ne s'applique qu'aux produits achetés par l'acheteur en tant que consommateur et utilisés uniquement à des fins personnelles dans le cadre d'une utilisation domestique.

Le droit allemand s'applique.

Si, au cours de la période de garantie, ce produit s'avère incomplet ou défectueux conformément aux dispositions suivantes, Beurer s'engage à proposer gratuitement un remplacement ou une réparation conformément aux présentes Conditions de garantie.

Si l'acheteur souhaite faire valoir la garantie, il doit d'abord s'adresser au revendeur local : cf. liste « Service client à l'international » ci-jointe pour connaître les adresses du service après-vente.

L'acheteur recevra ensuite des informations complémentaires concernant le déroulement de la demande de garantie, par exemple, l'adresse à laquelle envoyer le produit et les documents requis.

Une demande de garantie ne peut être prise en compte que si l'acheteur présente

- une copie de la facture/du reçu et
- le produit d'origine

à Beurer ou à un partenaire autorisé de Beurer.

La présente Garantie exclut expressément

- toute usure découlant de l'utilisation ou de la consommation normale du produit ;
- les accessoires fournis avec le produit qui s'usent ou qui sont consommés dans le cadre d'une utilisation normale du produit (par exemple, piles, piles rechargeables, manchettes, joints, électrodes, ampoules, embouts et accessoires pour inhalateur) ;
- les produits utilisés, nettoyés, stockés ou entretenus de manière inappropriée et/ou contraire aux conditions d'utilisation, ainsi que les produits ouverts, réparés ou modifiés par l'acheteur ou par un service client non agréé par Beurer ;
- les dommages survenus lors du transport entre le fabricant et le client ou entre le service client et le client ;
- les produits achetés en tant qu'article de second choix ou d'occasion ;

- les dommages consécutifs qui résultent d'une défaillance du produit (dans ce cas, toutefois, des réclamations peuvent être soulevées relatives à la responsabilité du fait des produits ou à d'autres dispositions légales obligatoires relatives à la responsabilité).

Les réparations ou le remplacement complet ne prolongent en aucun cas la période de garantie.



Lea atentamente estas instrucciones de uso, consérvelas para su futura utilización, póngalas a disposición de otros usuarios y respete las indicaciones.

Estimada clienta, estimado cliente:

Nos complace que haya elegido un producto de nuestra colección. Nuestro nombre es sinónimo de productos de alta y comprobada calidad en los ámbitos del calor, peso, presión arterial, glucemia, temperatura corporal, pulso, tratamiento suave, belleza, masaje y aire.

Atentamente,
El equipo de Beurer

Índice

1. Artículos suministrados	70	8. Limpieza y cuidado	84
2. Explicación de los símbolos	71	9. Accesorios y piezas de repuesto	84
3. Indicaciones de advertencia y de seguridad.....	72	10. Resolución de problemas.....	85
4. Uso correcto.....	76	11. Eliminación	88
5. Descripción del aparato	76	12. Datos técnicos.....	88
6. Puesta en funcionamiento.....	77	13. Garantía y asistencia	89
7. Utilización	79		

1. Artículos suministrados

Compruebe que el embalaje de los artículos suministrados esté intacto y que su contenido esté completo. Antes de utilizar el aparato deberá asegurarse de que ni este ni los accesorios presentan daños visibles y de que se retira el material de embalaje correspondiente. En caso de duda, no lo use y póngase en contacto con su distribuidor o con la dirección del servicio de atención al cliente indicada.

- 1 audífono digital HA 80
(incluidos tubos de sonido para el oído izquierdo o derecho)
- 4 almohadillas (de diferentes tamaños y tipos)
- 1 batería intercambiable
- 1 cepillo de limpieza
- 1 cápsula secante
- 1 estuche con función de carga
- 1 instrucciones de uso



Información general










El audífono sirve para mejorar la capacidad auditiva en personas. Para ello, refuerza los sonidos y los transmite al oído del usuario. El aparato no puede prevenir ni mitigar la pérdida de audición relacionada con causas orgánicas.


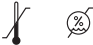
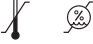


Sin embargo, ofrece múltiples aplicaciones. Le ayudará a escuchar con mayor nitidez y claridad tanto si desea ver una película como charlar con sus amigos o disfrutar al aire libre todos los sonidos de la naturaleza.

Estos amplificadores de sonido no son productos médicos que puedan utilizarse para fines terapéuticos.

2. Explicación de los símbolos

En el aparato, en las instrucciones de uso, en el embalaje y en la placa de características del aparato se utilizan los siguientes símbolos:

 ADVERTENCIA	Indicación de advertencia sobre riesgos de lesiones u otros peligros para la salud.
 ATENCIÓN	Indicación de seguridad sobre posibles daños en el aparato.
 Nota	Indicación de información importante.
	Respetar las instrucciones de uso.
	Número de serie
	Pieza de aplicación tipo B
	Eliminación según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
	Marcado CE Este producto cumple los requisitos de las directivas europeas y nacionales vigentes.
	Sello de certificación para los productos que se exportan a la Federación de a y a los países de la CEI.

	Fabricante
Storage/Transport 	Temperatura y humedad de almacenamiento y transporte admisibles
Operating 	Temperatura y humedad de funcionamiento admisibles
 PAP	Eliminar el embalaje respetando el medio ambiente.
IP21	Protección contra cuerpos extraños sólidos con un diámetro de 12,5 mm y superior y contra goteo vertical de agua
	Se puede utilizar hasta

3. Indicaciones de advertencia y de seguridad





ADVERTENCIA

- Consulte a su médico antes de utilizar estos amplificadores de sonido (si sufre actualmente dolor de oído o lo ha sufrido en el pasado).
- NO utilice el audífono si padece una otitis media o sufre una inflamación del conducto auditivo.
- Si siente dolor o malestar mientras utiliza el audífono, deje de usarlo y consulte a su médico.

- Si se le inflama el oído, se le irrita la piel o aumenta el cerumen mientras lleva el audífono, deje de usarlo y consulte a su médico.
- Deje de utilizar el audífono y consulte a un médico en los siguientes casos:
 - Erupción o eccemas en zonas de la piel en contacto con el audífono. (El audífono está fabricado con un material que no irrita la piel. Sin embargo, en raras ocasiones pueden producirse reacciones alérgicas que se manifestarán posiblemente en forma de eccemas).
 - El uso del audífono hace que secrete el oído o hace necesario el tratamiento del mismo.
 - La capacidad auditiva disminuye considerablemente de forma repentina.
- Ajuste el volumen primero en un nivel bajo y aumentelo progresivamente cuando se haya acostumbrado al audífono.
- NO ajuste el botón del volumen demasiado alto, ya que esto puede dañar a largo plazo la capacidad auditiva.
- NO preste su audífono a otras personas ni utilice el de otras personas. Existe riesgo de sufrir pérdida auditiva y de contraer infecciones.
- NO dé su audífono a otras personas para que lo utilicen. La utilización de un audífono fabricado para otra persona puede causar daños auditivos.
- El audífono NO se puede utilizar en niños menores de 36 meses.
- Los problemas auditivos son especialmente difíciles de diagnosticar en niños. Solo un otorrinolaringólogo debería prescribir un audífono a un niño tras someterlo a un examen exhaustivo.
- Mantenga el audífono, los accesorios y las baterías lejos del alcance de los niños; existe peligro de lesiones y de atragantamiento.

- Este aparato NO debe ser utilizado por personas (niños incluidos) con facultades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o con poca experiencia o conocimientos, a no ser que las vigile una persona responsable de su seguridad o que esta persona les indique cómo hacerlo. Se debe vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato.
- NO utilice el audífono en entornos explosivos ni peligrosos.
- NO utilice el aparato en entornos ricos en oxígeno ni durante un periodo de tiempo prolongado.
- Póngase en contacto con el fabricante en los siguientes casos:
 - si necesita ayuda para configurar, utilizar o limpiar el audífono; o
 - si el aparato tiene un comportamiento inesperado durante su funcionamiento o si ocurre cualquier otro incidente.
- En caso de duda, NO utilice un audífono dañado y diríjase a su distribuidor o a la dirección del servicio de atención al cliente indicada.
- Apague el aparato de inmediato si presenta defectos o se producen fallos de funcionamiento.
- No intente bajo ninguna circunstancia abrir y/o reparar el audífono usted mismo. Las reparaciones solo deberán realizarlas el servicio de atención al cliente o distribuidores autorizados. El incumplimiento de esta disposición anula la garantía.

Indicaciones para la manipulación de baterías:

- En caso de que el líquido de una batería entre en contacto con la piel o los ojos, lave la zona afectada con agua y busque asistencia médica.
-  ¡Peligro de atragantamiento! Los niños pequeños podrían tragarse las baterías y asfixiarse. ¡Guarde las baterías fuera del alcance de los niños!
- Si se derrama el líquido de una batería, póngase guantes protectores y elimine el aparato.
- Proteja las baterías de un calor excesivo.
-  ¡Peligro de explosión! No arroje baterías al fuego.
- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, retire las baterías.
- No despiece, abra ni triture las baterías.

- Utilice solo los cargadores indicados en las instrucciones de uso.
- Las baterías deben estar correctamente cargadas antes de su uso. Para una carga correcta, deben cumplirse en todo momento las indicaciones del fabricante o las de estas instrucciones de uso.
- Cargue completamente la batería antes de la primera puesta en funcionamiento (véase el capítulo 6).
- Cargue completamente la batería al menos 4 veces al año para prolongar su vida útil el mayor tiempo posible.



ATENCIÓN

- NO utilice el audífono cuando se encuentre cerca de fuertes campos electromagnéticos o rayos X.
- NO utilice el audífono mientras se bañe, nade o se duche.
- Proteja los aparatos de impactos, humedad, suciedad, grandes oscilaciones térmicas, exposición directa a los rayos del sol y alta humedad ambiental.
- En vehículos cerrados la temperatura puede llegar a ser muy alta en verano. Por eso, no deje nunca el audífono en el coche.
- NO golpee el aparato NI lo deje caer.
- Si se cae al agua, séquelo con un paño y llévelo a su distribuidor para que lo examine.
- No intente nunca secar el audífono en un microondas o una secadora o con un secador de pelo. Si lo hace, el audífono puede resultar dañado.
- NO utilice el audífono junto con un teléfono móvil. (Las ondas radioeléctricas de los teléfonos móviles pueden causar interferencias o atenuar el volumen).
- NO utilice el audífono junto con productos cosméticos (p. ej., maquillaje, laca, perfume o crema solar).
- NO utilice el audífono si se somete a terapias de ondas cortas o a tratamientos médicos en los que pueden formarse fuertes campos magnéticos o de radiofrecuencia.
- Manipule con cuidado los botones. NO los apriete demasiado.

- No introduzca ningún objeto puntiagudo en la abertura del micrófono, ya que hacerlo puede dañarlo.
- NO toque el imán del audífono, ya que hacerlo puede dañar el aparato.
- NO toque el interior del aparato. En él se encuentran muchas piezas sensibles ajustadas con precisión. No clave en ningún caso agujas u objetos similares en el interior del audífono.
- Someta el audífono a revisión periódicamente. Asegúrese de que no haya ningún cuerpo extraño entre la almohadilla y el altavoz, ya que esto podría afectar a la calidad del sonido.

4. Uso correcto

Los amplificadores de sonido solo pueden utilizarse con el fin de mejorar la capacidad auditiva de personas. Los aparatos se han diseñado exclusivamente para el uso descrito en estas instrucciones de uso. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños derivados de un uso no autorizado o incorrecto. Estos amplificadores de sonido no son productos médicos que puedan utilizarse para fines terapéuticos.

5. Descripción del aparato


Audífono

- 1 Botón menos
- 2 Botón más
- 3 Botón de selección de programas
- 4 Micrófono
- 5 Pieza de empalme
- 6 Tubo de sonido
- 7 Tubo de fijación
- 8 Almohadilla
- 9 Batería intercambiable



Estuche con función de carga

- 1 Posición de carga del audífono
- 2 Posición de carga de la batería intercambiable
- 3 Posición de almacenamiento para la cápsula secante
- 4 Toma micro USB
- 5 Cápsula secante

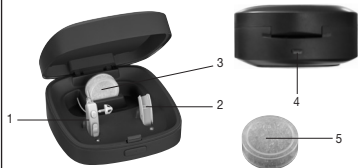

Cepillo de limpieza



6. Puesta en funcionamiento

Saque el audífono de su embalaje y asegúrese de que están el aparato y todos los accesorios y de que no presentan daños.

Carga del audífono con el estuche con función de carga

Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente, enchufe el cable micro USB suministrado y conéctelo al estuche con función de carga para cargar el aparato y las baterías.


Luz verde parpadeante:

El aparato y las baterías se están cargando.

Luz verde permanente:

El aparato y las baterías están completamente cargados.

Generalmente se tarda 2 horas en cargar completamente el aparato y las baterías.

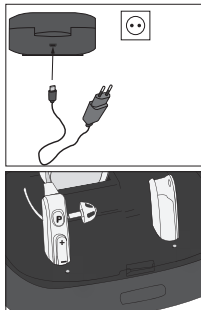

i Antes de poner en funcionamiento el audífono, asegúrese de que el botón del volumen esté al principio en el nivel más bajo.



Nota:

- i** La carga se puede realizar con la tapa abierta o cerrada.
- Tras haberlo cargado completamente, y mientras no lo lleve, podrá guardar el audífono en el estuche con función de carga.

7. Utilización

Adaptación del audífono

1. Los tubos de sonido tienen impreso “2B” en rojo y azul respectivamente. El rojo es para el oído derecho y el azul para el izquierdo.
2. Fije la almohadilla en el tubo de sonido deslizándola por las ranuras del tubo hasta que encaje bien.
3. Coloque la carcasa del audífono detrás de la oreja. La parte curva del tubo de sonido debe descansar cómodamente en la oreja (en las personas que usan gafas junto a la patilla de la gafa).
4. Sujete bien el tubo de sonido e introduzca con cuidado la almohadilla en el conducto auditivo. Tenga cuidado de no introducirla demasiado. Si la almohadilla no está bien colocada o le resulta incómoda, pruebe con otra.
5. Coloque el tubo de fijación a lo largo del pabellón de la oreja para garantizar un ajuste más firme de la almohadilla en la oreja. Si el tubo de fijación le molesta, puede cortarlo, ya que no es imprescindible.

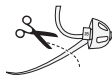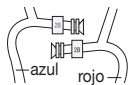

i Compruebe si ha elegido el tamaño de almohadilla adecuado moviendo lentamente la cabeza hacia arriba y hacia abajo y después hacia la derecha y hacia la izquierda mientras hace movimientos de masticación. Si la almohadilla se sale, es demasiado pequeña. Si usa gafas, coloque la patilla entre la cabeza y el audífono.

i **IMPORTANTE**
No introduzca nunca el tubo de sonido en el conducto auditivo sin almohadilla. Asegúrese también de no presionar el tubo y la almohadilla demasiado profundamente en el conducto auditivo.

Encendido y apagado

Para encender o apagar el audífono, mantenga pulsado el botón de selección de programas del aparato durante tres (3) segundos hasta que escuche un pitido.



Adaptación del volumen

Botón más:

Aumento del volumen (pulsación breve)

Botón menos:

Reducción del volumen (pulsación breve)



Para poder escuchar sonidos con claridad y nitidez, ajuste el volumen que desee con ayuda del botón del volumen.

i **Nota:**

- Si escucha un ligero pitido, compruebe si la almohadilla queda bien sujeta en el oído. Si no queda bien sujeta, utilice otra.
- El audífono no puede curar deficiencias auditivas, pero puede mejorar la capacidad auditiva y la comprensión.
- Si se oye un solo pitido, el volumen se ha aumentado o reducido.
- Si se oyen dos pitidos consecutivos, se ha alcanzado el volumen más alto o más bajo posible.

Ajuste de los programas auditivos


Para cambiar el programa auditivo, pulse el botón de selección de programas.

P1: modo normal (1 pitido):

Apropiado para entornos silenciosos, por ejemplo en casa o en la oficina.


P2: modo de supresión de ruidos (2 pitidos):

Apropiado para exteriores, p. ej. por la calle, en el supermercado o en un restaurante.

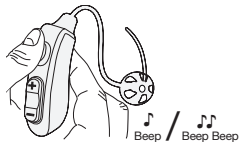

Cambio de la batería

Para cambiar la batería del audífono, sujete la batería con una mano y utilice la otra mano para deslizar la parte superior del audífono en la dirección opuesta. A continuación, retire la batería reemplazable totalmente cargada y colóquela en el audífono. El audífono vuelve a estar listo para su uso.

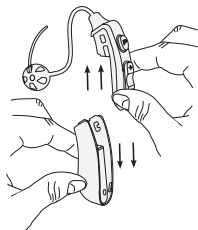

Sustitución del tubo de sonido

Tenga preparado el tubo de sonido de repuesto para sustituirlo. Exáminelo antes para comprobar que las marcas de color son correctas (el color rojo es para el oído derecho y el azul para el izquierdo).

1. Para lograr una mejor sujeción, retire la batería del aparato.
2. Sostenga el aparato en una mano y, con la otra, agarre la pieza de empalme del tubo de sonido con el aparato entre el pulgar y el índice.
3. Gire la pieza de empalme en el sentido contrario a las agujas del reloj y gire simultáneamente el aparato en el sentido de las agujas del reloj.
4. Cuando la pieza de empalme esté girada aproximadamente 90°, tire del tubo de sonido hacia arriba. Sujete bien el aparato mientras lo hace.
5. Tenga a mano el nuevo tubo de sonido. Coloque el tubo de sonido y gírelo en el sentido de las agujas del reloj completamente en el aparato una ligera presión hasta que la flecha de la parte delantera vuelva a quedar alineada con los botones del aparato.

6. Compruebe el ajuste del tubo de sonido antes de volver a colocar la batería y poner en funcionamiento el aparato.


Si tiene dificultades para extraer el tubo de sonido, utilice, por ejemplo, unas pinzas para agarrar la pieza de empalme.

Colocación de la cápsula secante

Entre los productos suministrados se incluye una cápsula secante. Al llevarlo colocado detrás de la oreja, el audífono entra en contacto con la piel y, por ejemplo, también con el sudor. Por lo tanto, para cuidar el aparato se recomienda secarlo después de cada uso.

Retire el embalaje de la cápsula secante e introdúzcala en el lugar de almacenamiento previsto ejerciendo una ligera presión.

La cápsula contiene un indicador de color. A medida que la capacidad de secado disminuye, el color cambia de naranja intenso a blanco. Cuando la cápsula presenta un color blanquecino, ya no tiene capacidad de secado y deberá sustituirse.

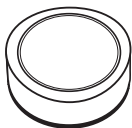

Encontrará información sobre dónde adquirir una nueva cápsula secante en el capítulo “10. Accesorios y piezas de repuesto”.

Nota: Para obtener un resultado de secado óptimo, cierre la tapa del estuche con función de carga después de haber introducido el audífono.

8. Limpieza y cuidado



- Mantenga el audífono siempre limpio.
- Maneje siempre los productos con cuidado e impida que la almohadilla o el micrófono se tapen con cuerpos extraños. Esto afecta a la función de amplificación del sonido.
- Limpie el audífono y las almohadillas con un paño limpio y seco tras cada uso. Si hay mucha suciedad, el paño puede humedecerse también con agua ligeramente jabonosa. No utilice nunca productos de limpieza abrasivos, corrosivos o que contengan disolventes.
- No sumerja nunca el audífono en agua, ya que podría penetrar en él y dañarlo.
- El cepillo adjunto sirve para eliminar cerumen adherido a la almohadilla (v. la descripción del aparato).
- Después de limpiar el audífono, deje que se seque completamente. Guárdelo en un lugar seguro, seco y limpio dentro del estuche correspondiente con función de carga con la cápsula secante.
- La cápsula secante debe sustituirse si el color del granulado cambia de naranja a blanco (encontrará información sobre dónde adquirir una nueva cápsula secante en el capítulo “10. Accesorios y piezas de repuesto”).

9. Accesorios y piezas de repuesto

Puede adquirir los accesorios y las piezas de repuesto en la dirección del servicio técnico correspondiente indicando el número de referencia.

Denominación	Número de artículo o de pedido
Cápsulas secantes HA 60/80/85 (8 ud.)	641.15
Tubos de sonido, tamaño S	164.341
Tubos de sonido, tamaño L	164.342

10. Resolución de problemas

Problema	Posibles causas	Solución
No se escucha ningún sonido procedente del audífono.	El audífono no está encendido.	Encienda el audífono como se describe en el capítulo 7.
	La batería no está correctamente conectada al audífono.	Compruebe si la batería está correctamente conectada al audífono.
	La batería está gastada.	Cambie la batería y cargue la batería gastada en el estuche con función de carga como se describe en el capítulo 6.
	El micrófono está sucio.	Limpie con cuidado la abertura del micrófono con el cepillo de limpieza.
	El audífono está dañado.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Problema	Posibles causas	Solución
El sonido es muy débil e ininteligible.	El volumen ajustado en el audífono es demasiado bajo.	Aumente el volumen como se describe en el capítulo 7.
	La batería está casi gastada.	Cambie la batería y cargue la batería gastada en el estuche con función de carga como se describe en el capítulo 6.
	La almohadilla está sucia.	Elimine la suciedad más grande de la almohadilla y del extremo delantero del tubo con el cepillo de limpieza. Retire después la almohadilla y límpiela debajo del grifo.
	El micrófono está sucio.	Limpie con cuidado la abertura del micrófono con el cepillo de limpieza.
	La batería no está correctamente conectada al audífono.	Compruebe si la batería está correctamente conectada al audífono.
	El altavoz integrado podría estar dañado.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Problema	Posibles causas	Solución
El audífono emite desagradables pitidos.	La almohadilla del audífono no encaja bien en el oído. Esto puede producir pitidos desagradables (retroacoplamiento acústico) y afectar al funcionamiento.	Inténtelo con otra almohadilla. Se recomienda utilizar una almohadilla que encaje bien. En caso de duda, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
	El micrófono del audífono está tapado.	No cubra el micrófono del audífono con partes de la oreja o una gran cantidad de cabello. Esto puede favorecer el retroacoplamiento acústico.
	El volumen ajustado en el audífono es demasiado alto.	Baje el volumen del audífono como se describe en el capítulo 7.
Los LED de la estación de carga no se iluminan.	Los audífonos podrían no encajar bien en el hueco o el cable USB no está bien conectado.	Asegúrese de que los audífonos encajen bien en el hueco y compruebe si el cable USB está bien conectado al estuche y a la fuente de alimentación.
	Los contactos de carga del estuche con función de carga están sucios.	Limpie los contactos de carga cuidadosamente con un paño seco. A continuación, vuelva a colocar el amplificador de sonido en el hueco.

11. Eliminación

Eliminación general

Para proteger el medio ambiente, el aparato no se debe desechar al final de su vida útil junto con la basura doméstica. Se puede desechar en los puntos de recogida adecuados disponibles en su zona. Deseche el aparato según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Para más información, póngase en contacto con la autoridad municipal competente en materia de eliminación de residuos.



Eliminación de baterías

- Las baterías usadas, completamente descargadas, deben eliminarse a través de contenedores de recogida señalados de forma especial, los puntos de recogida de residuos especiales o a través de los distribuidores de equipos electrónicos. Los usuarios están obligados por ley a eliminar las baterías correctamente.
- Estos símbolos se encuentran en baterías que contienen sustancias tóxicas:

Pb: la pila contiene plomo,

Cd: la pila contiene cadmio,

Hg: la pila contiene mercurio.



12. Datos técnicos

Nivel de intensidad acústica máx. (OSPL90):	118 dB ± 3 dB
Amplificación de sonido:	43 dB ± 5 dB
Distorsión armónica total:	≤3% @ 1600 Hz
Rango de frecuencias:	200~6700 Hz
Ruido de entrada:	≤32 dB
Tensión:	1,5 V ---
Alimentación:	≤3 mA
Tiempo de funcionamiento:	≥ 26 h

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura: -10 °C ~ +40 °C
Humedad relativa del aire: 30 % ~ 75 %
Presión atmosférica: 700 ~ 1600 hPa

Condiciones de transporte y
almacenamiento:

Temperatura: -10 °C ~ +55 °C
Humedad relativa del aire: 10 % ~ 90 %
Presión atmosférica: 500 ~ 1600 hPa

El número de serie se encuentra en el aparato.

13. Garantía y asistencia

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (en lo sucesivo, "Beurer") concede una garantía para este producto. La garantía está sujeta a las siguientes condiciones y el alcance de la misma se describe a continuación.

Las siguientes condiciones de garantía no afectan a las obligaciones de garantía que la ley prescribe para el vendedor y que emanan del contrato de compra celebrado con el comprador.

La garantía se aplicará además sin perjuicio de las normas legales preceptivas.

Beurer garantiza el perfecto funcionamiento y la integralidad de este producto. La garantía mundial tiene una validez de 3 años a partir de la fecha de compra del producto nuevo y sin utilizar por parte del comprador.

Esta garantía se ofrece solo para productos que el comprador haya adquirido en tanto que consumidor con fines exclusivamente personales en el marco de una utilización privada en el hogar.

Se aplica la legislación alemana.

En el caso de que, durante el periodo de garantía, este producto resultara estar incompleto o no funcionara correctamente conforme a lo dispuesto en las siguientes disposiciones, Beurer se compromete a sustituir el producto o a repararlo según las presentes condiciones de garantía.

Cuando el comprador desee recurrir a la garantía lo hará dirigiéndose en primera instancia al distribuidor local: véase la lista adjunta “Servicio internacional” que contiene las distintas direcciones de servicio técnico.

A continuación, el comprador recibirá información pormenorizada sobre la tramitación de la garantía, como el lugar al que debe enviar el producto y qué documentos deberá adjuntar.

El comprador solo podrá invocar la garantía cuando pueda presentar:

- una copia de la factura o del recibo de compra y
- el producto original

a Beurer o a un socio autorizado por Beurer.

Quedan excluidos explícitamente de la presente garantía

- el desgaste que se produce por el uso o el consumo normal del producto;
- los accesorios suministrados con el producto que se desgastan o consumen durante un uso normal (p. ej., pilas, baterías, brazaletes, juntas, electrodos, luminarias, cabezales y accesorios de inhalación);
- productos cuyo uso, limpieza, almacenamiento o mantenimiento sea indebido o vaya contra lo dispuesto en las instrucciones de uso, así como productos que hayan sido abiertos, reparados o modificados por el comprador o por un centro de servicio técnico no autorizado por Beurer;
- daños que se hayan producido durante el transporte entre las instalaciones del fabricante y las del cliente o bien entre el centro de servicio técnico y el cliente;
- productos que se hayan adquirido como productos de calidad inferior o de segunda mano;

- daños derivados que resulten de una falta del producto. En este caso, podrían invocarse eventualmente derechos derivados de la normativa de responsabilidad de productos o de otras disposiciones de responsabilidad legal preceptiva.

Las reparaciones o la sustitución del producto no prolongarán en ningún caso el periodo de garantía.



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com
www.beurer-healthguide.com



641.17_HA80 Single_non med_2020-11-18_04_IM1a_BEU