


MG 70

Aparat de masaj pe unde infraroșii

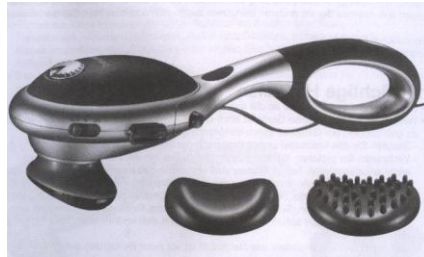

Stimate client,

Suntem foarte bucuroși că ați decis să achiziționați un produs din gama comercializată de compania noastră. Numele nostru este garanția asigurării unei calități înalte și a produselor integral testate din gama vizând încălzirea corpului uman, măsurarea greutateții corporale, a tensiunii arteriale, a temperaturii corpului, a pulsului, terapia ușoară, masaj și aerisire. Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni pentru o folosire atentă și să le păstrați pentru o folosire ulterioară; asigurați-vă că le puneți la dispoziția altor utilizatori și să respectați informațiile pe care le conțin.


Cu cele mai bune gânduri,
Echipa Beurer



1. Observații Importante

- Conectați dispozitivul doar la o sursă de alimentare având tensiunea (voltajul) indicat pe plăcuța aparatului.
- Ca și în cazul oricărui dispozitiv electric, dispozitivul de masaj ar trebui utilizat cu grijă și atenție cu scopul evitării producerii de șocuri electrice:
 - deconectați cablul de alimentare imediat după utilizare.
 - preveniți orice contact cu apa (cu excepția cazurilor când îl curățați cu o cârpă ușor umezită). Apa nu trebuie să ajungă niciodată în interiorul aparatului. Nu scufundați niciodată aparatul în apă. Nu utilizați niciodată aparatul în baie, la duș, în piscină sau deasupra unui bazin plin cu apă. Dacă, în ciuda acestor măsuri de precauții, apa a reușit să pătrundă în interiorul carcasei aparatului, deconectați-l imediat și contactați-vă distribuitorul sau atelierul (service-il) de reparații.
 - Dispozitivul în general și cablul de alimentare în special ar trebui verificate înainte de utilizare pentru depistarea oricăror eventuale deteriorări.
 - Nu cuplați dispozitivul la sursa de alimentare dacă cablul de alimentare este deteriorat. Contactați-vă distribuitorul sau atelierul de reparații.
 - Reparațiile trebuie efectuate doar de către atelierul de reparații sau de către distribuitorii autorizați.
 - Nu țineți suspendat și nu transportați niciodată dispozitivul ținându-l de cablul de alimentare al acestuia.
 - Dacă apare vreo defecțiune pe parcursul utilizării, opriți-l imediat și scoateți-l din priză.
 - Dispozitivul este destinat doar pentru scopurile descrise în acest manual de instrucțiuni. Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate ca urmare a survenirii de eventuale vătămări corporale ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neatențe a acestuia.
 - Nu utilizați nici un fel de accesorii de masaj altele decât cele furnizate împreună cu dispozitivul.
- Dispozitivul este destinat doar pentru utilizare individuală și nu pentru scopuri medicale (spitalicești) sau comerciale.
- Nu folosiți dispozitivul în mod continuu pentru o perioadă mai lungă de 20 de minute pentru a evita supraîncălzirea acestuia. Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de reutilizarea acestuia. Suprafața dispozitivului se încălzește pe parcursul utilizării sale. Persoanele insensibile la căldură ar trebui să manifeste o atenție sporită la contactul cu această suprafață pentru a evita arsurile.
- Nu introduceți niciodată obiecte prin orificiile aparatului în interiorul acestuia. Asigurați-vă că părțile mobile ale aparatului se pot deplasa întotdeauna ușor și că nu există obiecte sau degete care să blocheze mișcarea acestora. Asigurați-vă ca nu ajung fire de păr în interiorul aparatului. Purtați o cască de cap dacă este cazul.
- Opriți dispozitivul și deconectați-l din priză atunci când atașați sau detașați mânerul sau oricare alte accesorii (părți detașabile) ale aparatului.
- Nu acoperiți niciodată aparatul atunci când acesta este în stare de funcționare (de exemplu cu păaturi, perne, etc.)
- Nu utilizați niciodată aparatul nesupravegheat, în special dacă se află în apropiere.
- Copiii, persoanele neajutate sau cu dizabilități trebuie să utilizeze aparatul doar sub supravegherea unui adult sau trebuie să fie familiarizate foarte bine cu aparatul acesta înainte de utilizarea acestuia.
- Vă rugăm să nu utilizați aparatul pe animale domestice sau animale de companie.
- Persoanele cu aparat de reglare a ritmului cardiac (pacemaker) le este recomandat a-și consulta medicul înainte de utilizarea acestui dispozitiv de masaj și să nu îl utilizeze niciodată în zona inimii.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul pe pielea inflamată, umflată, arsă sau pe zonele cu leziuni ale acesteia.
- Următoarele părți ale corpului nu ar trebui masate: oasele (de ex. articulații, încheieturi, șira spinării), terminațiile altor zone sensibile ale corpului.
- Nu utilizați aparatul dacă suferiți de răceala cu febră, vene varicoase, tromboză, inflamații ale venelor, icter, forme de diabet, în cazul sarcinii, în caz de afecțiuni ale nervilor (de ex. sciatică) sau în cazul unor inflamații acute. În aceste cazuri vă rugăm să vă consultați medicul.
- Nu utilizați dispozitivul atunci când stați în pat. Nu trebuie să adormiți niciodată pe parcursul utilizării acestuia.

2. Descrierea dispozitivului

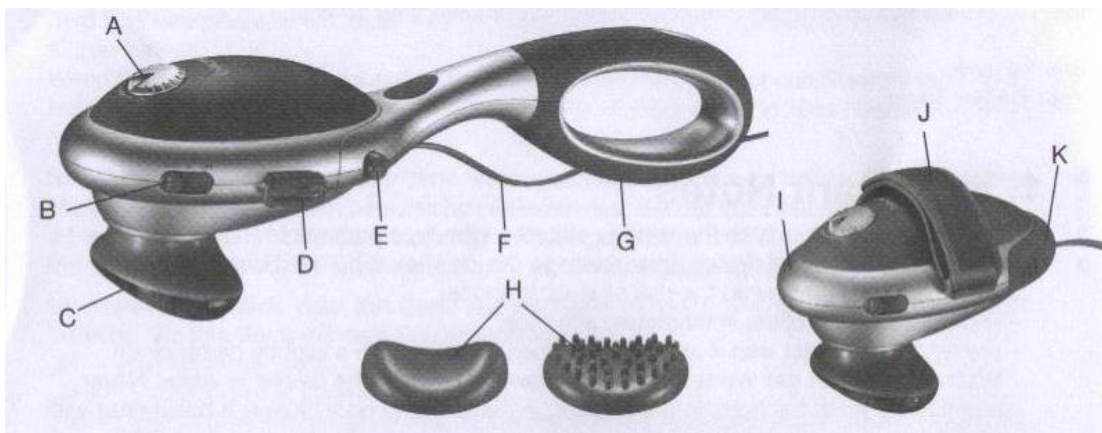

Unde:

- A Buton de control al masajului (viteza de masaj reglabilă în trepte)
- B comutator cu culisare:
OFF (OPRIT)
M – Masaj
M+H – Masaj și radiație termică (căldură) pe infraroșii
- C Suprafața de masaj cu căldură pe infraroșii
- D Dispozitiv de strângere pentru cureaua de mână
- E Butoane pentru blocarea mânerului
- F Cablul de alimentare
- G Mâner detașabil anti-alunecare
- H Părți detașabile ca accesorii de aderență:
- accesoriu cu aderență ușoară
- accesoriu cu aderență puternică (cu cap)
- I Capul de masaj
- J Priza (cureaua) de mână
- K Mufei de cuplare cu protecție

3. Utilizarea aparatului

Scopul utilizării: aparatul este utilizat doar pentru masajul corpului uman.

Decideți dacă doriți să utilizați dispozitivul de masaj cu mânerul său atașabil sau fără acesta, în acest din urmă caz utilizând priza (cureaua) de mână. Pentru a îndepărta mânerul, apăsați puternic pe cele două butoane de retenție de pe fiecare parte a mânerului și trageți afară mânerul din capul de masaj. Introduceți mufa de cuplare cu protecție în spatele capului de masaj. Introduceți-vă palma sub priza (cureaua) de mână. Utilizarea sistemului de prindere Velcro vă permite reglarea lungimii curelușei de mână astfel încât să puteți ține ușor capul de masaj în palma dvs. și să-l orientați facil.

Dacă doriți să atașați din nou mânerul, prima dată scoateți mufa de cuplare cu protecție și re-atașați mânerul până ce un sunet vă anunță cuplarea acestuia. Cablul de alimentare pornește din suportul mânerului.

Puteți masa cu sau fără ajutorul accesoriiilor de aderență detașabile. E suficient să alegeți accesoriul corespunzător tipului de aderență pe care îl preferați. Cu ajutorul tipului de tratament M+H – Masaj și radiație termică (căldură) pe infraroșii -, orice accesoriu de aderență va preveni furnizarea de căldură de la sursa de radiații în infraroșu- ca urmare, ar trebui să utilizați dispozitivul doar pe funcția M – masaj, dacă, în prealabil, ați montat cu accesoriu de masaj pentru aderență.

Asigurați-vă de faptul că dispozitivul este oprit înainte de introducerea cablului de alimentare. Porniți aparatul prin comutarea butonului cu culisare la una din pozițiile:

„M“ („doar masaj“) sau

„M+H“ („Masaj și radiație termică – căldură - pe infraroșii“).

Fixați viteza de masaj dorită cu ajutorul butonului de control al masajului. Amplasați dispozitivul pe acea parte a corpului pe care doriți să o masați. Puteți sta în picioare, sta jos sau sta întins și vă puteți masa fie pe dumneavoastră fie masa pe altcineva. Intensitatea masajului poate varia prin exercitarea unei presiuni mai ridicată sau mai scăzută pe dispozitivul de masaj. Nu masați niciodată o anumită parte a corpului în continuu, pentru mai mult de 3 minute, fără ca să treceți, între timp, la o altă parte a corpului. După utilizarea aparatului pentru o perioadă de maximum 20 de minute, opriți-l din nou, deconectați-l de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească. Depozitați aparatul într-un loc uscat.

4. Curățare

Pentru a curăța dispozitivul scos deja din priză și după ce se acesta s-a răcit, ștergeți-l cu o cârpă ușor umezită. Puteți folosi pe post de agent de curățare un detergent moale. Totuși, asigurați-vă că apa nu ajunge niciodată în interiorul aparatului. Nu folosiți aparatul din nou până ce acesta nu este complet uscat.

5. Reciclare

Vă rugăm să reciclați dispozitivul în concordanță cu prevederile directivei 2002/96/EG – WEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – Deșeurile de echipamente electrice și electronice). Dacă aveți orice fel de întrebări și nelămuriri, vă rugăm să vă adresați autorităților locale responsabile cu reciclarea materialelor.



