

beurer

PS 240



DE Personenwaage
Gebrauchsanweisung

EN Personal bathroom scale
Instruction for Use

FR Pèse-personne
Mode d'emploi

ES Báscula de baño
Instrucciones para el uso

IT Bilancia pesapersone
Instruzioni per l'uso

TR Terazi
Kullanma Talimatı

RU Напольные весы
Инструкция по применению

PL Waga łazienkowa
Instrukcja obsługi

NL Personenweegschaal
Gebruikershandleiding

PT Balança de casa-de-banho
Instruções de utilização

EL Ζυγαριά
Οδηγίες χρήσεως

DA Personvægt
Betjeningsvejledning

SV Personvåg
Bruksanvisning

NO Personvekt
Bruksveiledning

FI Henkilövaaka
Käyttöohje

CS Osobní váha
Návod k použití

SL Osebna tehtnica
Navodila za uporabo

HU Személymérleg
Használati utasítás

RO Cântar pentru persoane
Instrucțiuni de utilizare

SK Osobná váha
Návod na obsluhu

AR ميزان الأشخاص
دليل الاستعمال

CE


1. Inbetriebnahme

EN Getting started
FR Mise en service
ES Puesta en marcha
IT Messa in funzione
NL Ingebruikname

PT Colocação em funcionamento
TR İlk çalıştırma
EL Έναρξη λειτουργίας
DA Ibrugtagning
SV Börja använda vågen

NO Bruk
FI Käyttöönotto
RU Ввод в эксплуатацию
PL Uruchomienie
CS Uvedení do provozu
SL Prvi vklop


HU Üzembe helyezés
RO Punerea în funcțiune
SK Uvedenie do prevádzky
AR التشغيل

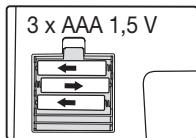

DE Batterie einlegen oder Isolierschutzstreifen entfernen.
EN Insert batteries or remove insulating strip.
FR Insérez les piles ou retirez la bande de protection isolante.
ES Colocar las pilas o quitar las tiras de protección de aislamiento.
IT Inserire le batterie o rimuovere la linguetta di protezione.
NL Plaats de batterij of verwijder de isolatieband.
PT Colocar a pilha ou retirar a fita de isolamento.

TR Pili takin veya izole koruma bandını çıkartın.
EL Τοποθετήστε τη μπαταρία ή αφαιρέστε την προστατευτική ταινία μόνωσης.
DA Indsæt batteri eller fjern isoleringsstrim-mel.
SV Lägg in batteriet eller ta bort skyddsrem-sorna.
NO Sett inn batteri eller fjern isoleringsstripe-ne.
FI Aseta paristo paikal-leen ja poista eristys-suojanauha.
RU Вставьте батарейку или удалите защитную изоляционную полоску.


PL Włożyć baterię lub usunąć ochronny pasek izolacyjny.
CS Vložte baterii nebo odstraňte izolační proužek.
SL Vstavite baterijo ali odstranite izolirni zaščitni trak.
HU Helyezze be az ele-met, vagy távolítsa el a szigetelőcsíket.
RO Introducerea bateriilor sau scoaterea benzi-lor de protecție pentru izolare.
SK Vložte batériu alebo odstráňte izolačnú pásku.
AR قم بأخذ البطاريات أو قم بإزالة أشرطة الحماية العازلة.

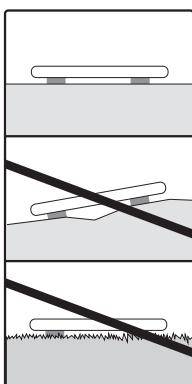

DE Waage auf einen ebenen und festen Boden stellen.
EN Place the scale on a secure, flat surface.
FR Posez la balance sur un sol plat et dur.
ES Colocar la báscula sobre un suelo plano y estable.
IT Posizionare la bilancia su un fondo piano e solido.
NL Plaats de weegschaal op een vlakke en vaste ondergrond.
PT Colocar a balança sobre piso nivelado e firme.

TR Teraziyi düz ve sağlam bir yüzey üzerine koyun.
EL Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
DA Stil vægten på et jævnt, fast gulv.
SV Placera vägen på ett jämnt och fast under-lag.
NO Plasser vekten på et jævnt og fast under-lag.
FI Aseta vaaka tasaiselle ja tukivealle alustalle.
RU Установить весы на прочную ровную поверхность.


PL Ustaw wagę na twar-dym i płaskim podłożu.
CS Postavte váhu na pevný a rovný podklad.
SL Tehnico postavite na čvrsto podlago oz. tla.
HU Állítsa a mérleget szilárd, vízszintes felületre.
RO Așezați cânțarul pe o podea fixă netedă.
SK Postavte váhu na rovný a pevný podklad.
AR وضع الميزان على أرضية صلبة ومستوية.

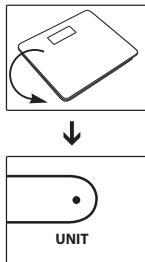

DE Waage ist umschaltbar (kg/lb/st).	TR Terazi modu değiştirilebilir (kg/lb/st).	PL Istnieje możliwość zmiany jednostek wag (kg/lb/st).
EN Scales can be switched to alternative units of measurement (kg/lb/st).	EL Η ζυγαρίδι μπορεί να τεθεί σε λειτουργία (kg/lb/st).	CS Váhu lze přepínat (kg/lb/st).
FR La balance est réglable (kg/lb/st).	DA Vægten kan omstilles (kg/lb/st).	SL Tehnico je moč preklapljati (kg/lb/st).
ES La báscula es comutable (kg/lb/st).	SV Vägen går att ställa om (kg/lb/st).	HU A mérleg bekapcsolható (kg/lb/st).
IT La bilancia è comutabile (kg/lb/st).	NO Vekten kan stilles om (kg/lb/st).	RO Cântarul prezintă posibilitatea de comutare între trepte (kg/lb/st).
NL De weegschaal is omschakelbaar (kg/lb/st).	FI Mittayksikön voi valita (kg/lb/st).	SK Váha je prepínateľná (kg/lb/st).
PT A balança é comutável (kg/lb/st).	RU Весы переключаются (kg/lb/st).	AR الميزان قابل التحويل. (kg/lb/st)

2. Wiegen

EN Weighing
FR Pesée
ES Pesado
IT Pesatura
NL Wegen

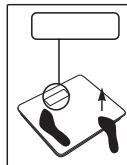

Quickstart

PT Pesar
TR Tartma
EL Ζύγιση
DA Vejning
SV Vägning


DE Waage betreten.
EN Step onto the scale.
FR Montez sur le pèse-personne.
ES Súbase a la báscula.
IT Salire sulla bilancia.
NL Stap op de weegschaal.

NO Foreta veiing
FI Punnitus
RU Взвешивание
PL Ważenie
CS Vážení

PT Subir para a balança.
TR Teraziye çıkarın.
EL Ανεβείτε στην ζυγαρίδι.
DA Træd op på vægten.
SV Ställ dig på vägen.
NO Gå opp på vekten.
FI Astu vaa'alle.
RU Встать на весы.

SL Tehtanje
HU Mérés
RO Cântărire
SK Váženie
AR الوزن


PL Wejdź na wagę.
CS Stoupněte si na váhu.
SL Stopite na tehtnico.
HU Álljon rá a mérlegre.
RO Așezați-vă pe cântăr.
SK Postavte sa na váhu.
AR الوقوف على الميزان.

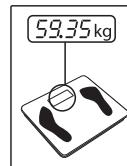

DE Stehen Sie während des Messvorgangs still!
EN Stand still whilst being weighed!
FR Ne bougez pas pendant la mesure !
ES ¡Durante el proceso de medición permanezca quieto!
IT Restare fermi durante il processo di pesatura!
NL Sta stil tijdens het wegen.

PT Não se mexa durante o processo de pesagem!
TR Tartma esnasında hareketsiz durun!
EL Σταθείτε ακίνητος κατά τη διαδικασία μέτρησης!
DA Stå stille under vejningen!
SV Stå stilla under mätningen!
NO Stå stille mens veiingen pågår!
FI Seiso punnitukseen aikana liikkumatta.

RU Во время взвешивания стойте неподвижно!
PL Podczas ważenia należy stać bez ruchu!
CS Během vážení stojte tisí!'
SL Med tehtanjem stoje mirno!
HU A mérés idején álljon nyugodtan!
RO În timpul procesului de măsurare stați nemîscat(ă)!
SK Počas merania stojte pokojne!
AR قف أثناء عملية التفقيس في وضع ساكن!

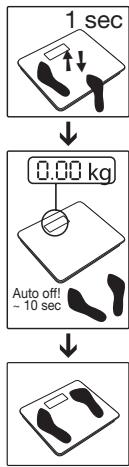

DE Hinweis: Bei Erstbenutzung und Standortwechsel.

EN Note: for first use and relocation.

FR Remarque : Première utilisation et changement de place.

ES Indicación: para usarla por primera vez o cambiarla de sitio.

IT Avvertenza: al primo utilizzo e in caso di spostamento

NL Aanwijzing: Voor het eerste gebruik of verplaatsing.

PT Nota: Para a primeira utilização e mudança do local de utilização.

TR Not: İlk kullanırında veya yer değişikliğinde.

EL Υπόδειξη: Κατά την πρώτη χρήση και τη μετακίνηση.

DA Bemærk: Ved førsteibrugtagning og ændring af vægtens placering.

SV Anvisning: Vid första användningen och vid platsbyte.

NO Merk: Ved første-gang bruk og ved flytting av vekten.

FI Neuvoo: Ensimmäisellä käyttökerralla ja vaa'an siirron jälkeen.

RU Примечание: При первом использовании и изменении положения весов.

PL Wskazówka: przy pierwszym użyciu i po przestawieniu w inne miejsce.

CS Upozornění: V případě prvního použití a změny místa.

SL Napotek: Pri prvi uporabi in menjavi mesta postavitev.

HU Megjegyzés: első használat / helyváltoztatás esetén.


RO Indicație: La prima utilizare și schimbarea locației.

SK Upozornenie: Pri prvom používaní a zmene polohy.

AR ارشاد: عند أول استخدام وتحفيز الموقع.

3. Fehlermeldung

EN Error messages
FR Messages d'erreur
ES Avisos de errores
IT Messaggi di errore
NL Foutmeldingen
PT Mensagens de erro

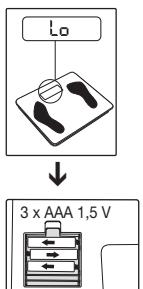

TR Hata mesajları
EL Μηνύματα σφαλμάτων
DA Fejlmeddelelse
SV Felmeddelanden
NO Feilmeldinger


DE Batterie leer
EN Battery empty
FR Batterie vide
ES Pilas agotadas
IT Batterie esauste
NL Batterij leeg
PT Bateria descarregada
TR Pil boş

FI Virheilmoitukset
RU Сообщения об ошибках
PL Komunikaty błędów
CS Chybová hlášení
SL Javljene napake

EL Η μπαταρία είναι άδεια
DA Batteri tomt
SV Batteriet tomt
NO Batteri tomt
FI Paristo tyhjä
RU Батарейка разряжена

HU Hibajelzések
RO Mesaje de eroare
SK Chybová hlášenie
AR بلغ الخطأ

PL Zużyta bateria
CS Vybité baterie
SL Baterijski vložki so prazni
HU Az elem lemerült
RO Baterie descărcată
SK Batéria je vybitá
AR البطارية فارغة الشحنة

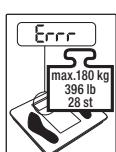

DE Maximale Tragkraft überschritten
EN Maximum weight capacity exceeded
FR Poids maximal dépassé
ES Capacidad de carga máxima superada
IT Superamento della portata massima
NL Maximale draagkracht overschreden
PT Capacidade de carga máxima ultrapassada

TR Maksimum taşıma kapasitesinin üzerine çıktıınız
EL Υπέρβαση ανώτατου ορίου αντοχής
DA Maksimal bærekraft overskredet
SV Den maximala bärkraften är överskriden
NO Maksimumsvekten er overskredet
FI Maksimipaino ylitti

RU Превышен максимальный вес
PL Przekroczone maksymalną nośność
CS Překročení maximální nosnosti
SL Prekoračena je maksimalna nosilnost
HU Túllépte a maximális teherbírást
RO S-a depășit capacitatea portantă maximă.
SK Maximálna nosnosť bola prekročená
AR تجاوز الحد الأقصى لقدر تحمل الميزان



Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.

Zeichenerklärung

	WARNUNG	Warnhinweis auf Verletzungsgefahr oder Gefahren für Ihre Gesundheit.
	ACHTUNG	Sicherheitshinweis auf mögliche Schäden an Gerät/Zubehör.
	Gebrauchsanweisung lesen	
	Kennzeichnung zur Identifikation des Verpackungsmaterials. A = Materialabkürzung, B = Materialnummer: 1-7 = Kunststoffe, 20-22 = Papier und Pappe	
	Verpackungskomponenten trennen und entsprechender kommunalen Vorschriften entsorgen.	
	Produkt und Verpackungskomponenten trennen und entsprechender kommunalen Vorschriften entsorgen.	
	Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik-Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)	
	Batterien nicht im Hausmüll entsorgen Pb Cd Hg	
	Hersteller	
	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.	
	Konformitätsbewertungszeichen für Großbritannien	
	Die Produkte entsprechen nachweislich den Anforderungen der Technischen Regelwerke der EAU	

⚠️ WARNUNG


- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern!
- Nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.
- Sollten Sie noch Fragen zur Anwendung unserer Geräte haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den Kundenservice.
- Reparaturen dürfen nur vom Kundenservice oder autorisierten Händlern durchgeführt werden.

⚠️ Hinweise zum Umgang mit Batterien

- Wenn Flüssigkeit aus einer Batteriezelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit Wasser auswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.

⚠️ Verschluckungsgefahr! Kleinkinder könnten Batterien verschlucken und daran erstickeln. Daher Batterien für Kleinkinder unerreichbar aufbewahren!

- Auf Polaritätskennzeichen Plus (+) und Minus (-) achten.
- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen und das Batteriefach mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme.
- **⚠️ Explosionsgefahr!** Keine Batterien ins Feuer werfen.
- Batterien dürfen nicht geladen oder kurzgeschlossen werden.
- Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts die Batterien aus dem Batteriefach nehmen.
- Prüfen Sie vor jeder Reklamation die Batterien und wechseln Sie diese ggf. aus.
- Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Immer alle Batterien gleichzeitig auswechseln.
- Keine Akkus verwenden!
- Keine Batterien zerlegen, öffnen oder zerkleinern.
- Die verbrauchten, vollkommen entladenen Batterien müssen Sie über speziell gekennzeichnete Sammelbehälter, Sondermüllannahmestellen oder über den Elektrohändler entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Batterien zu entsorgen.
- Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien: Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber.
- Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entfernt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammellstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik-Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.
- Belastbarkeit beträgt max. 180 kg (396 lb / 28 st), Ein teilung 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- Reinigung: Sie können die Waage mit einem angefeuchteten, fusselfreien Tuch reinigen. Tauchen Sie die Waage niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch niemals unter fließendem Wasser ab.
- Schützen Sie die Waage vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen, elektromagnetischen Feldern und zu nahen Wärmequellen.
- Steigen Sie nie einseitig auf den äußersten Rand der Waage: Kippgefahr!

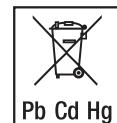

Pb Cd Hg



Pb Cd Hg

Hinweise für Verbraucher zur Altgeräteentsorgung und Verschrottung in Deutschland

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten unentgeltlich abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Die Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Außerdem ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern möglich.

Gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) sind die folgenden Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet:

- Elektro-Fachgeschäfte, mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern

- Lebensmittelläden mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
- Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/Gefriergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt. Für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen IT- u. Telekommunikationsgeräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Diese Vertrieber sind verpflichtet,

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
- auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

GARANTIE

Nähre Informationen zur Garantie und den Garantiebedingungen finden Sie im mitgelieferten Garantie-Faltblatt.

Irrtum und Änderungen vorbehalten

EN General advice



Read these instructions for use carefully and keep them for later use, be sure to make them accessible to other users and observe the information they contain.

Signs and symbols

	WARNING	indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	CAUTION	indicates a hazardous situation on which, if not avoided, may result in minor or moderate injury
	Read the instructions for use	
	Marking to identify the packaging material. A = Material code, B = Material number: 1-7 = Plastics, 20-22 = Paper and cardboard	

	Separate the packaging elements and dispose of them in accordance with local regulations.
	Separate the product and packaging elements and dispose of them in accordance with local regulations.
	Disposal in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment EC Directive – WEEE
	Do not dispose of batteries containing hazardous substances with household waste.
	Manufacturer
	This product satisfies the requirements of the applicable European and national directives.
	United Kingdom Conformity Assessed Mark
	The products demonstrably meet the requirements of the Technical Regulations of the EAEU.

WARNING

- Keep packaging material away from children!
- Not intended for commercial use.
- Should you have any questions regarding operation and usage of our appliances, please contact your local retailers or Customer Service.
- Repairs must only be carried out by Customer Services or authorised suppliers.

Notes on handling batteries

- If your skin or eyes come into contact with battery fluid, flush out the affected areas with water and seek medical assistance.
- Choking hazard!** Small children may swallow and choke on batteries. Store the batteries out of the reach of small children.
- Observe the plus (+) and minus (-) polarity signs.
- If a battery has leaked, put on protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth.
- Protect the batteries from excessive heat.
- Risk of explosion!** Never throw batteries into a fire.
- Do not charge or short-circuit batteries.
- If the device is not to be used for a long period, take the batteries out of the battery compartment.
- Before making a claim, please check the batteries and replace them if necessary.
- Use identical or equivalent battery types only.
- Always replace all batteries at the same time.
- Do not use rechargeable batteries.
- Do not disassemble, split or crush the batteries.
- The empty, completely flat batteries must be disposed of through specially designated collection boxes, recycling points or electronics retailers. You are legally required to dispose of the batteries.
- The codes below are printed on batteries containing harmful substances: Pb = Battery contains lead, Cd = Battery contains cadmium, Hg = Battery contains mercury.



- For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its useful life. Dispose of the unit at a suitable local collection or recycling point. Dispose of the device in accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.



- Max. capacity 180 kg (396 lb / 28 st), Graduation 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- Cleaning: You can clean the scale with a damp, cloth using a little washing-up liquid if necessary. Never immerse the scale in water or rinse it under running water.
- Protect the scale against knocks, damp, dust, chemicals, drastic changes in temperature, electromagnetic fields and sources of heat that are too near.
- Never step onto the outer edge of the scale with one foot as this could cause the scales to tip!

WARRANTY

Further information on the warranty and warranty conditions can be found in the warranty leaflet supplied.

Subject to errors and changes

FR Conseils d'ordre général



Lisez attentivement cette notice, conservez-la pour un usage ultérieur, mettez-la à disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.

Symboles utilisés

	AVERTISSEMENT	Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour votre santé.
	ATTENTION	Ce symbole vous avertit des éventuels dommages au niveau de l'appareil ou d'un accessoire.
		Consulter le mode d'emploi
		Étiquette d'identification du matériau d'emballage. A = Abréviation de matériau, B = Référence de ce matériau : 1 - 7 = plastique, 20 - 22 = papier et carton
		Séparer les composants d'emballage et les éliminer conformément aux prescriptions communales.
		Séparer le produit et les composants d'emballage et les éliminer conformément aux prescriptions communales.
		Élimination conformément à la directive européenne WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
		Ne pas jeter les piles à substances nocives avec les déchets ménagers


	Fabricant
	Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.
	Marquage de conformité UKCA
	Les produits sont complètement conformes aux exigences des règlements techniques de l'UEEA.

AVERTISSEMENT

- Éloignez les enfants du matériel d'emballage !
- Non prévue pour un usage industriel.
- Pour toute question concernant l'utilisation de nos appareils, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente de.
- Seul le service client ou un opérateur autorisé peut procéder à une réparation.

Remarques relatives aux piles

- Si du liquide de la cellule de pile entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
- Risque d'ingestion !** Les enfants en bas âge pourraient avaler des piles et s'étouffer. Veuillez donc conserver les piles hors de portée des enfants en bas âge !
- Respectez les signes de polarité plus (+) et moins (-).
- Si la pile a coulé, enfilez des gants de protection et nettoyez le compartiment à piles avec un chiffon sec.
- Protégez les piles d'une chaleur excessive.
- Risque d'explosion !** Ne jetez pas les piles dans le feu.
- Les piles ne doivent être ni rechargées, ni court-circuitées.
- En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, sortez les piles du compartiment à piles.
- Avant toute réclamation, vérifiez l'état des batteries et changez-les si cas échéant.
- Utilisez uniquement des piles identiques ou équivalentes.
- Remplacez toujours l'ensemble des piles simultanément.
- N'utilisez pas d'accumulateur !
- Ne démontez, n'ouvrez ou ne cassez pas les piles.
- Les piles usagées et complètement déchargeées doivent être mises au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage ou bien déposées chez un revendeur d'appareils électriques. L'élimination des piles est une obligation légale qui vous incombe.
- Ces pictogrammes se trouvent sur les piles à substances nocives : Pb = pile contenant du plomb, Cd = pile contenant du cadmium, Hg = pile contenant du mercure.
- Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de service. L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays. Veuillez éliminer l'appareil conformément à la directive européenne – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.
- Résistance jusqu'à 180 kg (396 lb / 28 st), Graduation 50 g (0,1 lb / 0,005 st).

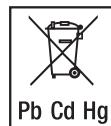

- Nettoyage : Vous pouvez nettoyer le pèse-personne à l'aide d'un chiffon non pelucheux légèrement humide. Ne plongez jamais la balance dans l'eau. Ne la nettoyez jamais sous l'eau courante.
- Protégez la balance contre les coups, l'humidité, la poussière, les produits chimiques, les fortes variations de température, les champs électromagnétiques et les sources de chaleur trop proches.
- Ne vous tenez jamais sur le bord extérieur de la balance : danger de basculement !

GARANTIE

Pour plus d'informations sur la garantie et les conditions de garantie, veuillez consulter la fiche de garantie fournie.

Sous réserve d'erreurs et de modifications

ES Indicaciones generales



Lea atentamente estas instrucciones de uso, consérvelas para su futura utilización, póngalas a disposición de otros usuarios y respete las indicaciones.

Símbolos

	ADVERTEN-CIA	Aviso sobre riesgos de lesiones u otros peligros para la salud.
	ATENCIÓN	Indicación de seguridad sobre posibles daños del aparato o de los accesorios.
	Leer las instrucciones de uso	
	Etiquetado para identificar el material de embalaje. A = abreviatura del material, B = número de material: 1-7 = plásticos, 20-22 = papel y cartón	
	Separar los componentes del envase y elimínelos conforme a las disposiciones municipales.	
	Separar el producto y los componentes del envase y elimínelos conforme a las disposiciones municipales.	
	Eliminación según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE)	
	No deseche pilas con la basura doméstica, ya que contienen sustancias tóxicas	
	Fabricante	
	Este producto cumple los requisitos de las directrices europeas y nacionales vigentes.	
	Marcado UKCA (Conformidad Evaluada del Reino Unido, por sus siglas en inglés)	
	Está demostrado que los productos cumplen los requisitos de las normas técnicas de la Unión Económica Euroasiática.	

ADVERTENCIA

- Mantenga a los niños alejados del material de embalaje!
- Dispositivo no previsto para el uso industrial.

- Si todavía tuviese preguntas sobre la utilización de nuestros aparatos, sírvase dirigirse a nuestro representante o al servicio técnico de.
- Las reparaciones sólo deben ser realizadas por el servicio al cliente o comerciantes autorizados.

Indicaciones para la manipulación de pilas

- En caso de que el líquido de las pilas entre en contacto con la piel o los ojos, lave la zona afectada con agua y busque asistencia médica.
- ¡Peligro de asfixia!** Los niños pequeños podrían tragarse las pilas y asfixiarse. Guarde las pilas fuera del alcance de los niños.
- Fíjese en los símbolos más (+) y menos (-) que indican la polaridad.
- Si se derrama el líquido de una pila, póngase guantes protectores y límpie el compartimento de las pilas con un paño seco.
- Proteja las pilas de un calor excesivo.
- ¡Peligro de explosión!** No arroje las pilas al fuego.
- Las pilas no se pueden cargar ni cortocircuitar.
- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas del compartimento.
- Antes de cada reclamo controle las pilas y en caso de que fuese necesario cámbielas.
- Utilice únicamente el mismo tipo de pila o un tipo equivalente.
- Cambie siempre todas las pilas a la vez.
- ¡No utilice baterías!
- No despiece, abra ni triture las pilas.
- Las pilas usadas, completamente descargadas, deben eliminarse a través de contenedores de recogida señalados de forma especial, los puntos de recogida de residuos especiales o a través de los distribuidores de equipos electrónicos. Los usuarios están obligados por ley a eliminar las pilas correctamente.
- Estos símbolos se encuentran en pilas que contienen sustancias tóxicas: Pb: la pila contiene plomo, Cd: la pila contiene cadmio, Hg: la pila contiene mercurio.
- Para proteger el medio ambiente no se debe desechar el aparato al final de su vida útil junto con la basura doméstica. Se puede desechar en los puntos de recogida adecuados disponibles en su zona. Deseche el aparato según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). Para más información, póngase en contacto con la autoridad municipal competente en materia de eliminación de residuos.
- La capacidad de carga es de máx. 180 kg (396 lb / 28 st), Precisión 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- Limpieza: limpie la báscula con un paño sin pelusas ligeramente humedecido. No sumerja nunca la balanza, ni la lave bajo un chorro de agua.
- Proteja la báscula de golpes, humedad, polvo, sustancias químicas, grandes cambios de temperatura, campos electromagnéticos y de la cercanía de fuentes de calor.
- Nunca suba por un sólo lado sobre el borde exterior de la báscula: ¡peligro de vuelco!



Pb Cd Hg



GARANTÍA

Encontrará más información sobre la garantía y las condiciones de la misma en el folleto de garantía suministrado.

Sous réserve d'erreurs et de modifications

IT Indicazioni generali



Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso, conservarle per impieghi futuri, renderle accessibili ad altri utenti e attenersi alle indicazioni.

Spiegazione dei simboli

	AVVERTENZA	Segnalazione di rischio di lesioni o pericoli per la salute.
	ATTENZIONE	Segnalazione di avviso di possibili danni all'apparecchio/degli accessori
		Leggere le istruzioni per l'uso
		Etichetta di identificazione del materiale di imballaggio. A = abbreviazione del materiale, B = codice materiale: 1-7 = plastica, 20-22 = carta e cartone
		Separare i componenti dell'imballaggio e smaltirli secondo le norme comunali.
		Separare il prodotto e i componenti dell'imballaggio e smaltirli secondo le norme comunali.
		Smaltimento secondo le norme previste dalla Direttiva CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).
		Non smaltire insieme ai rifiuti urbani batterie contenenti sostanze tossiche
		Produttore
		Il presente prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali vigenti.
		Marchio UKCA (valutazione di conformità nel Regno Unito)
		I prodotti sono comprovatamente conformi ai requisiti delle normative tecniche dell'UEE.

AVVERTENZA

- Tenere lontani i bambini dal materiale d'imballaggio!
- Non adatta all'utilizzo commerciale.
- In caso di dubbi o domande circa l'impiego delle nostre apparecchiature, rivolgersi al rivenditore o al servizio clienti.
- Le riparazioni possono essere effettuate solo dal Servizio clienti o da rivenditori autorizzati.

Avvertenze sull'uso delle batterie

- Se il liquido della batteria viene a contatto con la pelle e con gli occhi, sciacquare le parti interessate con acqua e consultare il medico.

• **Pericolo d'ingestione!** I bambini possono ingerire le batterie e soffocare. Tenere quindi le batterie lontano dalla portata dei bambini!

- Prestare attenzione alla polarità positiva (+) e negativa (-).
- In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, indossare guanti protettivi e pulire il vano batterie con un panno asciutto.
- Proteggere le batterie dal caldo eccessivo.
- **Rischio di esplosione!** Non gettare le batterie nel fuoco.
- Le batterie non devono essere ricaricate o mandate in cortocircuito.
- Qualora l'apparecchio non dovesse essere utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere le batterie dal vano batterie.
- Prima di inoltrare eventuali reclami, testare le batterie e se necessario sostituirle.
- Utilizzare solo tipologie di batterie uguali o equivalenti.
- Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.
- Non utilizzare batterie ricaricabili!
- Non smontare, aprire o frantumare le batterie.
- Smaltire le batterie esauste e completamente scariche negli appositi punti di raccolta, nei punti di raccolta per rifiuti tossici o presso i negozi di elettronica. Lo smaltimento delle batterie è un obbligo di legge.
- I simboli riportati di seguito indicano che le batterie contengono sostanze tossiche: Pb = batteria contenente piombo, Cd = batteria contenente cadmio, Hg = batteria contenente mercurio.
- A tutela dell'ambiente, al termine del suo utilizzo l'apparecchio non deve essere smaltito nei rifiuti domestici. Lo smaltimento deve essere effettuato negli appositi centri di raccolta. Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alle autorità comunali competenti per lo smaltimento.
- Portata max. 180 kg (396 lb / 28 st), Graduazione 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- Pulizia: per pulire la bilancia utilizzare un panno leggermente inumidito, privo di pelucchi e. Non immergere mai la bilancia in acqua, nè lavarla sotto l'acqua corrente.
- Non esporre la bilancia a urti, umidità, polvere, prodotti chimici, forti sbalzi di temperatura, campi elettromagnetici e fonti di calore troppo vicine.
- Non salire mai sul bordo esterno della bilancia e solo su un lato: pericolo di ribaltamento!
- **GARANZIA**
Per ulteriori informazioni sulla garanzia e sulle condizioni di garanzia, consultare la scheda di garanzia fornita.

Possibili errori e variazioni

TR Genel açıklamalar

Lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, ilerde kullanmak üzere saklayın, diğer kullanıcıların erişebilmesini sağlayın ve içindeki yönergelere uyun.

İşaretlerin açıklaması

	UYARI	Yaralanma tehlikelerine veya sağlığınızla ilgili tehlikelere yönelik uyarı.
--	--------------	---

	DİKKAT	Cihazda/aksesuarlarda meydana gelebilecek hasarlara yönelik güvenlik uyarısı.
		Kullanım kılavuzunu okuyun
		Ambalaj malzemesinin tanımlanması için kullanılan işaret. A = malzeme kısaltması, B = malzeme numarası: 1-7 = plastikler, 20 -22 = kâğıt ve karton
		Ambalaj bileşenlerini ayırin ve belediyyenin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.
		Ürünü ve ambalaj bileşenlerini ayırin ve belediyyenin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.
		Elektrikli ve elektronik atık cihazlarla ilgili AB direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edilmelidir
		Zararlı madde içeren pilleri evsel atıklarla birlikte bertaraf etmeyin <small>Pb Cd Hg</small>
		Üretici
		Bu ürün geçerli Avrupa Birliği yönetgelerinin ve ulusal yönetgelerin gereklerini yerine getirmektedir.
		Birleşik Krallık İçin Uygunluk Değerlendirmesi Yapıldı İşareti
		Ürünler, AEB'nin belirlediği teknik kuralların gerektirdiği şartlara kesin bir şekilde uymaktadır.

UYARI

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun!
- Ticari amaçlı kullanım için öngörlülmemiştir.
- Aletlerimizin kullanımları hakkında başka sorularınız varsa, satıcınıza veya Müşteri Servisine başvurunuz.
- Tamir işlemleri yalnızca müşteri servisi veya yetkili satıcılar tarafından yapılabilir.

Pillerle temas etme durumu için uyarılar

- Pil hücresindeki sıvı, cilt veya gözlerle temas ettiğinde, ilgili yeri suyla yıkayın ve bir doktora başvurun.
- Yutma tehlikesi!** Küçük çocuklar pilleri yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir. Bu nedenle pilleri, küçük çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayın!
- Artı (+) ve eksi (-) kutup işaretlerine dikkat edin.
- Bir pil aktığında koruyucu eldiven giyin ve pil bölmesini kuru bir bezle temizleyin.
- Pilleri aşırı ısuya karşı koruyun.
- Patlama tehlikesi!** Pilleri ateşle atmayın.
- Piller şarj edilmemeli veya kısa devre yaptırılmamalıdır.
- Cihazı uzun süre kullanmayacağınız durumlarda pilleri pil bölmesinden çıkarın.
- Her reklamasyon öncesinde pilleri kontrol edin ve gereklirse değiştirin.
- Yalnız aynı tip veya eşdeğer tip piller kullanın.

- Her zaman tüm pilleri aynı anda değiştirin.
- Şarj edilebilir pil kullanmayın!
- Pilleri parçalarına ayırmayın, açmayı veya parçalamayın.
- Kullanılmış, şarji tamamen boşalmış piller özel işaretli toplama kutularına atılarak, özel çöp alma yerlerine veya elektrikli cihazların teslim edilecek bertaraf edilmelidir. Pillerin bertaraf edilmesi, yasal olarak sizin sorumluluğundadır.
- Bu işaretler, zararlı madde içeren pillerin üzerinde bulunur: Pb = Pil kurşun içeriyor, Cd = Pil kadmiyum içeriyor, Hg = Pil civा içeriyor.
- Çevreyi korumak için, kullanım ömrü sona erdikten sonra cihazı ev atıklarıyla birlikte elden çıkarmayın. Cihaz, ülkenizdeki uygun atık toplama merkezleri üzerinden bertaraf edilebilir. Cihazı hurda elektrikli ve elektronik eşa direktifine - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun olarak bertaraf edin. Bertaraf etme ile ilgili sorularınızı, ilgili yerel makamlara iletebilirsiniz.
- Yükleme kapasitesi maks. 180 kg (396 lb / 28 st), Ölçeklendirme 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- Temizleme: Teraziyi, tütüp bırakmayan nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. Teraziyi hiç bir zaman suya sokmayın. Teraziyi asla akar suda yıkamayınız.
- Teraziyi darbelerden, nemden, tozdan, kimyasallardan, aşırı sıcaklık değişikliklerinden, elektromanyetik alanlardan ve çok yakınısı kaynaklarından koruyun.
- Asla terazinin üzerine en dış kenarından çıkmayın: Devrilmeye tehlikesi!

Garanti

Garanti ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri cihazla birlikte verilen garanti broşüründe bulabilirsiniz.

Hata ve değişiklik hakkı saklıdır

RU Общие указания

Внимательно прочтите данную инструкцию по применению, сохраните ее для последующего использования, храните ее в месте, доступном для других пользователей, и следуйте ее указаниям.

Пояснения к символам

	ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ	Предупреждает об опасности травмирования или нанесения вреда здоровью.
	ВНИМАНИЕ	Указывает на возможные повреждения прибора/принадлежностей.
		Прочтите инструкцию по применению.
		Маркировка для идентификации упаковочного материала. А = сокращенное обозначение материала, В = номер материала: 1-7 = пластик, 20-22 = бумага и картон
		Удалите элементы упаковки и утилизируйте их в соответствии с местными предписаниями.
		Снимите упаковку с изделия и утилизируйте ее в соответствии с местными предписаниями.

	Утилизация прибора в соответствии с директивой ЕС по отходам электрического и электронного оборудования – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Не утилизировать с бытовым мусором батареек, содержащие токсичные вещества Pb Cd Hg.
	Изготовитель.
	Это изделие соответствует требованиям действующих европейских и национальных директив.
	Знак соответствия требованиям Великобритании
	Продукция прошла подтверждение соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не давайте упаковочный материал детям!
- Не предназначены для коммерческого использования.
- Если у Вас имеются вопросы об использовании нашего прибора, обращайтесь, пожалуйста, к Вашему продавцу или в сервисную службу.
- Ремонт должен производиться только сервисной службой или авторизованными торговыми представителями.

⚠ Обращение с элементами питания

- При попадании жидкости из аккумулятора на кожу или в глаза необходимо промыть соответствующий участок большим количеством воды и обратиться к врачу.
- ⚡ **Опасность проглатывания мелких частей!** Маленькие дети могут проглотить батарейки и подавиться ими. Поэтому батарейки необходимо хранить в недоступном для детей месте!
- Обращайте внимание на обозначение полярности: плюс (+) и минус (-).
- Если батарейка потекла, очистите отделение для батареек сухой салфеткой, надев защитные перчатки.
- Защищайте батарейки от чрезмерного воздействия тепла.
- ⚡ **Опасность взрыва!** Не бросайте батарейки в огонь.
- Не заряжайте и не замыкайте батарейки накоротко.
- Если прибор длительное время не используется, извлеките из него батарейки.
- Перед заявлением претензий проверьте и при необходимости замените батарейки.
- Используйте батарейки только одного типа или равноценных типов.
- Заменяйте все батарейки сразу.
- Не используйте перезаряжаемые аккумуляторы!
- Не разбирайте, не открывайте и не разбивайте батарейки.
- Выбрасывайте использованные, полностью разряженные батарейки в специальные контейнеры, сдавайте в пункты приема спецотходов или в магазины электрооборудования. Закон обязывает пользователей обеспечить утилизацию батареек.

- Эти знаки предупреждают о наличии в батарейках токсичных веществ: Pb = свинец, Cd = кадмий, Hg = ртуть.
- В интересах защиты окружающей среды по окончании срока службы следует утилизировать прибор отдельно от бытового мусора. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора в Вашей стране. Прибор следует утилизировать согласно Директиве ЕС по отходам электрического и электронного оборудования – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). В случае вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.
- Максимальная нагрузка составляет 180 кг (396 lb / 28 st). Цена деления 50 г (0,1 lb / 0,005 st).
- Очистка: Для очистки весов используйте влажную безворсовую салфетку. Не окунайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой.
- Весы следует предохранять от ударов, влажности, пыли, химикатов, сильных колебаний температуры, электромагнитных полей и не устанавливать их вблизи источников тепла.
- Никогда не вставайте на один край весов: Опасность опрокидывания!

ГАРАНТИЯ

Более подробную информацию о гарантии и условиях гарантии см. в прилагаемом гарантийном листе.

Возможны ошибки и изменения

PL Wskazówki ogólne



Należy dokładnie przeczytać i zachować niniejszą instrukcję obsługi, przechowującą ją w miejscu dostępnym dla innych użytkowników i przestrzegać podanych w niej wskazówek.

Objaśnienie symboli

	OSTRZEŻENIE	Ostrzeżenie przed zagrożeniem obrażeniami ciała lub utratą zdrowia
	UWAGA	Wskazówki bezpieczeństwa odnoszące się do możliwości uszkodzenia urządzenia/akcesoriów
	Należy przeczytać instrukcję obsługi	
	Oznakowanie identyfikujące materiał opakowywany. A = skrót nazwy materiału, B = numer materiału: 1-7 = tworzywa sztuczne, 20-22 = papier i tkanina	
	Oddzielić elementy opakowania i zutylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami.	
	Oddzielić produkt i elementy opakowania i zutylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami.	
	Utylizacja zgodnie z dyrektywą WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)	

	Baterii zawierających szkodliwe substancje nie należy wyrzucać z odpadami z gospodarstwa domowego
	Producent
	Niniejszy produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych
	Oznaczenie zgodności z wymogami w Wielkiej Brytanii
	Produkty spełniają wymogi przepisów technicznych obowiązujących w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

OSTRZEŻENIE

- Opakowanie należy trzymać z dala od dzieci!
- Waga nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego.
- W przypadku dalszych pytań dotyczących stosowania naszych urządzeń prosimy o zwrócenie się do sprzedawcy lub działu obsługi klienta firmy.
- Naprawy mogą być przeprowadzane tylko przez serwis producenta lub autoryzowanego dystrybutora.

Wskazówki dotyczące postępowania z bateriami

- Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami, należy przemyć dane miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia!** Małe dzieci mogłyby połknąć baterie i się nimi udusić. Dlatego baterie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Należy zwrócić uwagę na znak polaryzacji plus (+) i minus (-).
- Jeśli z baterii wyciekł elektrolit, należy założyć rękawice ochronne i wyczyścić przegrodę na baterie suchą szmatką.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym działaniem wysokiej temperatury.
- Zagrożenie wybuchem!** Nie wrzucać baterii do ognia.
- Nie wolno ładować ani zwierać baterii.
- W przypadku niekorzystania z urządzenia przez dłuższy czas wyjąć baterię z przegrody.
- Przed złożeniem reklamacji należy zawsze sprawdzić baterię i w razie potrzeby ją wymienić.
- Należy używać tylko tego samego lub równoważnego typu baterii.
- Zawsze należy wymieniać jednocześnie wszystkie baterie.
- Nie należy używać akumulatorów!
- Nie wolno rozmontowywać, otwierać ani rozdrabniać baterii.
- Zużyte, całkowicie rozładowane baterie należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników zbiorczych, przekazywać do punktów zbiórki odpadów specjalnych lub do sklepu ze sprzętem elektrycznym. Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji baterii zgodnie z przepisami.
- Na bateriach zawierających szkodliwe związki znajdują się następujące oznaczenia: Pb = bateria zawiera ólów, Cd = bateria zawiera kadm, Hg = bateria zawiera rtęć.



Pb Cd Hg

• Ze względu na ochronę środowiska po zakończeniu użytkowania urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Utylizację należy zlecić w odpowiednim punkcie zbiórki w danym kraju. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z dyrektywą o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W razie pytań należy zwrócić się do odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za utylizację.

- Maksymalne obciążenie wynosi 180 kg (396 lb / 28 st), Dokładność 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- Czyszczenie: do czyszczenia wagi należy używać lekko wilgotnej, nie pozostawiającej włókien szmatki. Nigdy nie wolno zanurzać wagi w wodzie.
- Wagę należy chronić przed wstrząsami, wilgotnością, kurzem, chemikaliami, dużymi wahaniami temperatury oraz polami elektromagnetycznymi. Urządzenie nie powinno znajdować się zbyt blisko źródła ciepła.
- Nie wolno stawać z jednej strony na krawędzi wagi – waga może się przeszylić!

GWARANCJA

Szczegółowe informacje na temat gwarancji i warunków gwarancji znajdują się w załączonej ulotce gwarancyjnej.

Zastrzega się prawo do pomylek i zmian

NL Algemene aanwijzingen



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Verklaring van de symbolen

	WAARSCHUWING	Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.
	LET OP	Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren.
	Gebruiksaanwijzing lezen	
	Aanduiding voor de identificatie van het verpakkingsmateriaal. A = materiaalfkorting, B = materiaalnummer: 1-7 = kunststoffen, 20-22 = papier en karton	
	Scheid de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.	
	Scheid het product en de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voor-schriften af.	
	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)	
	Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, mogen niet als huisvuil worden aangeboden.	
	Fabrikant	

	Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
	UKCA-markering (UK Conformity Assessed)
	De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van de technische voorschriften van de Euzaziatische Economische Unie (EEU).

WAARSCHUWING

- Houd de verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen.
- Niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Mocht u nog vragen hebben over de toepassing van onze toestellen, neemt u contact op met uw handelaar of met de klantendienst van.
- Reparaties mogen alleen door de klantenservice of geautoriseerde handelaars worden uitgevoerd.

Tips voor de omgang met batterijen

- Als vloeistof uit de batterijcel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raadplegen.
- Gevaar voor inslikken!** Kleine kinderen kunnen batterijen inslikken, met verstikking als gevolg. Bewaar batterijen daarom buiten het bereik van kleine kinderen!
- Neem de aanduiding van de polariteit (plus (+) en min (-)) in acht.
- Als er een batterij is gaan lekken, moet u veiligheidshandschoenen aantrekken en het batterijvak met een droge doek reinigen.
- Bescherm de batterijen tegen overmatige hitte.
- Explosiegevaar!** Werp batterijen niet in vuur.
- Batterijen mogen niet worden opgeladen en niet worden kortgesloten.
- Haal de batterijen uit het batterijvak als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Controleer voor iedere klacht de batterijen en vervang deze eventueel.
- Gebruik alleen hetzelfde of een gelijkwaardig type batterij.
- Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen!
- Haal batterijen niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in kleine stukken.
- Deponeer de gebruikte, volledig lege batterijen in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de batterijen correct te verwijderen.
- Deze tekens kunt u aantreffen op batterijen met schadelijke stoffen: Pb = batterij bevat lood, Cd = batterij bevat cadmium, Hg = batterij bevat kwik.
- Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil weggegooid worden. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.
- De maximale belasting is 180 kg (396 lb / 28 st), Verdeling van 50 g (0,1 lb / 0,005 st).



- Reiniging: de weegschaal kan met een bevochtigde, pluisvrije doek worden gereinigd. Dompel de weegschaal nooit in water. Spoel hem ook nooit af onder stromend water.
- Stel het apparaat niet bloot aan schokken, vochtigheid, stof, chemische stoffen, sterke temperatuurschommelingen, elektromagnetische velden en warmtebronnen (ovens, verwarmingselementen).
- Stap nooit op één zijde op de buitenste rand van de weegschaal: Kantelgevaar.

Garantie

Meer informatie over de garantie en de garantievooraarden vindt u in het meegeleverde garantieblad.

Fouten en wijzigingen voorbehouden

PT Indicações gerais



Leia atentamente estas instruções de uso, guarde-as para utilização futura, disponibilize-as a outros utilizadores e respeite as indicações nas contidas.

Explicação dos símbolos

	AVISO	Advertência para o risco de lesões ou perigos para a sua saúde.
	ATENÇÃO	Indicação de segurança alertando para o risco de danos no aparelho ou nos acessórios.
	Ler as instruções de uso	
	Identificação do material de embalagem. A = Sigla do material, B = Número do material: 1-7 = Plástico, 20-22 = Papel e cartão	
	Separar os componentes da embalagem e eliminá-los de acordo com as regulamentações municipais.	
	Separar o produto e os componentes da embalagem e eliminá-los de acordo com as regulamentações municipais.	
	Eliminação de acordo com a diretiva da CE (diretiva WEEE), relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos	
	As pilhas que contenham substâncias nocivas não devem ser deitadas fora junto com o lixo doméstico	
	Fabricante	
	Este produto cumpre os requisitos das normas europeias e nacionais aplicáveis.	
	Marcação de Avaliação de Conformidade do Reino Unido (UKCA)	
	Os produtos cumprem comprovadamente os requisitos das regulamentações técnicas dos países membros da UEE.	

AVISO

- Mantenha as crianças afastadas do material de embalagem!

- Não se destina ao uso comercial.
- Se quiser colocar mais alguma questão em relação ao uso dos nossos equipamentos, contacte a loja onde comprou a balança ou o serviço de assistência a clientes da.
- As reparações só poderão ser efectuadas pelo serviço de apoio ao cliente ou então por revendedores autorizados.

Como lidar com as pilhas

- Se ocorrer um contacto do líquido da pilha com a pele ou os olhos, lave imediatamente as partes afetadas com água e consulte, o mais rapidamente possível, um médico.
- **Risco de engolir!** As crianças pequenas podem engolir as pilhas accidentalmente e sufocar. Por isso, guarde as pilhas num local fora do alcance de crianças pequenas!
- Atenção à polaridade correta: positivo (+) e negativo (-).
- No caso de uma pilha derramar o seu conteúdo, devem usar-se luvas de proteção para limpar o compartimento das pilhas com um pano seco.
- Proteja as pilhas de calor excessivo.
- **Perigo de explosão!** Não deitar pilhas para o lume.
- As pilhas não podem ser carregadas nem curto-circuitadas.
- No caso de não usar o aparelho durante algum tempo, retire as pilhas do respectivo compartimento.
- Antes de reclamar, verifique se as baterias estão carregadas e substitua-as, se necessário.
- Use unicamente o tipo de pilha idêntico ou equiparável.
- As pilhas devem ser sempre todas substituídas ao mesmo tempo.
- Não utilize baterias recarregáveis!
- Não desfaça, não abra nem triture as pilhas.
- Depois de gastas e completamente descarregadas, as pilhas terão de ser depositadas nos locais de recolha próprios (pilhões) ou entregues em lojas de material elétrico. Qualquer pessoa tem a obrigação de descartar as pilhas de forma adequada.
- Estes símbolos encontram-se em pilhas que contenham substâncias nocivas: Pb = a pilha contém chumbo, Cd = a pilha contém cádmio, Hg = a pilha contém mercúrio.
- Por motivos ecológicos, quando estiver inutilizado, o aparelho não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A eliminação deverá ser feita através dos respetivos pontos de recolha existentes no seu país de residência. Elimine o aparelho de acordo com a diretiva WEEE relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Se tiver qualquer dúvida a este respeito, informe-se junto do serviço municipal responsável pelo tratamento de resíduos.
- A capacidade de carga máx. é de 180 kg (396 lb / 28 st), Divisão mínima: 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- Limpeza: pode limpar a balança com um pano húmido. Em caso algum, ponha a balança dentro de água e nunca a lave debaixo de água corrente.
- Proteja a balança contra embates, humidade, pó, produtos químicos, variações acentuadas de temperatura, campos electromagnéticos e fontes de calor demasiado próximo.
- Nunca coloque todo o seu peso sobre o rebordo exterior da balança: perigo de tombar!

GARANTIA

Poderá obter mais informações a respeito da garantia e das condições da garantia na folha informativa da garantia fornecida juntamente com o produto.

Salvo erro ou omissão

ΕΛ Γενικές οδηγίες



Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση, διαθέστε τις και σε άλλους χρήστες και τηρήστε τις υποδείξεις.

Επεξήγηση συμβόλων

	ΠΡΟΕΙΔΟ - ΠΟΙΗΣΗ	Προειδοποιητική υπόδειξη για κινδύνους τραυματισμού ή κινδύνους για την υγεία σας.
	ΠΡΟΣΟΧΗ	Υπόδειξη ασφαλείας για πιθανές ζημιές στη συσκευή/στα παρελκόμενα.
	Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης	
	Σήμανση για την αναγνώριση του υλικού συκευασίας. Α = Σύντμηση υλικού, Β = Αριθμός υλικού: 1-7 = Πλαστικά, 20-22 = Χαρτί και χαρτόνι	
	Διαχωρίστε τα εξαρτήματα συσκευασίας και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.	
	Διαχωρίστε το προϊόν και τα εξαρτήματα συσκευασίας και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.	
	Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με την οδηγία της ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)	
	Μην απορρίπτετε στα οικιακά απορρίμματα τις μπαταρίες που περιέχουν βλαβερά υλικά	
	Κατασκευαστής	
	Αυτό το προϊόν πληρού τις απαιτήσεις των ιαχουσών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών.	
	Σήμα αξιολόγησης συμμόρφωσης του Ηνωμένου Βασιλείου	
	Τα προϊόντα ανταποκρίνονται αποδειγμένα στις απαιτήσεις του συνόλου των τεχνικών κανόνων της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης.	

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κρατήστε τη συσκευασία μακριά από τα παιδιά!
- Δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- Σε περίπτωση που έχετε τυχόν ερωτήσεις για τη χρήση των συσκευών μας, παρακαλείσθε ν' απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του Οίκου.
- Επισκευές επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνον από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή από εξουσιοδοτημένους εμπόρους.

Υποδείξεις για τον χειρισμό των μπαταριών

- Εάν έλθει σε επαφή υγρό μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τα σημεία που επιλήγησαν και συμβούλευσθείτε αμέσως γιατρό.

- ⚠ **Κίνδυνος κατάποσης!** Μικρά παιδιά μπορεί να καταπιούν μπαταρίες και να πνιγούν. Γι αυτό φυλάσσετε τις μπαταρίες σε μέρος μακριά από τα παιδιά!
- Προσέξτε τη σήμανση της πολικότητας συν (+) και μείον (-).
- Όταν μια μπαταρία έχει παρουσιάσει διαρροή, φορέστε προστατευτικά γάντια και καθαρίστε τη θήκη της με ένα στεγνό πανί.
- Προστατεύετε τις μπαταρίες από υπερβολική θερμότητα.
- ⚡ **Κίνδυνος έκρηξης!** Μη ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να επαναφορτίζονται ή να βραχυκυκλώνονται.
- Αν σκοπεύετε να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη θήκη μπαταριών.
- Προτού προβείτε σε κάποια καταγγελία, ελέγξτε τις μπαταρίες και, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τις.
- Χρησιμοποιέτε μόνον τον ίδιο ή έναν ισοδύναμο τύπο μπαταριών.
- Αλλάζετε όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτίζομενες μπαταρίες!
- Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή τεμαχίζετε τις μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες που έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν εκφοτιστεί πλήρως πρέπει να τοποθετούνται σε οικολογικούς κάδους με ειδική σήμανση ή στα σημεία συγκέντρωσης ειδικών απορριμάτων ή να παραδίδονται σε εμπόρους ηλεκτρικών ειδών. Είσαστε υποχρεωμένοι από τη νομοθεσία να φροντίσετε για την απόρριψη των μπαταριών.
- Αυτά τα σύμβολα βρίσκονται στις μπαταρίες που περιέχουν βλαβερές ουσίες: Pb = Η μπαταρία περιέχει μόλυβδο, Cd = Η μπαταρία περιέχει κάδιμο, Hg = Η μπαταρία περιέχει ιδρόγυρο.
- Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, η συσκευή στο τέλος της διάρκειας ζωής της δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη μπορεί να πραγματοποιείται μέσω κατάλληλων σημείων συλλογής στη χώρα σας. Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με την οδηγία της EK σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Σε περίπτωση απορίας, απευθυνθείτε στην αρμόδια για την απόρριψη δημοτική υπηρεσία.
- Η μέν. αντοχή είναι 180 kg (396 lb / 28 st), Διαίρεση 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- Καθαρισμός: Μπορείτε να καθαρίσετε τη ζυγαριά με ένα υγρό, χωρίς χνούδια πανί. Μη βιβλίσετε ποτέ τη ζυγαριά μέσα σε νερό ούτε να την πλύνετε ποτέ κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Προστατέψτε τη ζυγαριά από χτυπήματα, υγρασία, σκόνη, χημικές ουσίες, έντονη εναλλαγή θερμοκρασίας και κρατήστε τη μακριά από ηλεκτρομαγνητικά πεδία και πηγές θερμότητας.
- Σε καμία περίπτωση να μη στηρίζεστε στο εξωτερικό άκρο της ζυγαριάς μόνο από τη μια πλευρά: Κίνδυνος ανατροπής!

ΕΓΓΥΗΣΗ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγύηση και τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο παρεχόμενο φυλλάδιο εγγύησης.

Με επιφύλαξη σφάλματος και αλλαγών

DA Generelle anvisninger



Gennemlæs denne betjeningsvejledning grundigt, og opbevar den til senere brug. Gør den tilgængelig for andre brugere, og følg altid anvisningerne.

Symbolforklaring

	ADVARSEL	Advarsel om fare for tilskadekomst eller fare for dit helbred.
	VIKTIGT	Sikkerhedsanvisning om mulige skader på apparat/tilbehør.
	Læs betjeningsvejledningen	
	Mærkning til identifikation af emballagemateriale. A = materialeforkortelse, B = materialenummer: 1-7 = plast, 20-22 = papir og pap	
	Skil emballagekomponenterne ad, og bortskaf dem i overensstemmelse med de lokale bestemmelser.	
	Produktet og emballagekomponenterne skal adskilles og bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser.	
	Bortskaffelse i henhold til EF-direktivet om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)	
	Batterier, der indeholder skadelige stoffer, må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald	
	Producent	
	Dette produkt opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale direktiver.	
	Britisk overensstemmelsesvurdering	
	Produkterne er påviseligt i overensstemmelse med kravene i de tekniske regler for Den Europæiske Økonomiske Union.	

⚠ ADVARSEL

- Hold børn på afstand af emballagematerialet!
- Ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
- Hvis de har yderligere spørgsmål vedr. brugen af vore vægte, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller til kundeservice.
- Reparationer må kun udføres af kundeservice eller autoriserede forhandlere.

⚠ Henvisninger for håndtering af batterier

- Hvis væske fra cellebatteriet kommer i kontakt med hud eller øjne, skal det pågældende sted skylles med vand, og der skal søges læge.
- ⚡ **Slugningsrisiko!** Småbørn kan sluge batterier og blive kvalt. Batterierne skal derfor opbevares utilgængeligt for småbørn.
- Følg polaritetsmærkningerne for plus (+) og minus (-).

- Hvis et batteri er utæt, skal du tage beskyttelseshandsker på og rengøre batterirummet med en tør klud.
- Beskyt batterier mod meget høj varme.
- Eksplorationsfare!** Kast aldri batterier ind i ild.
- Normalte batterier må ikke oplades eller kortsluttes.
- Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal batteriene tages ud af batterirummet.
- Kontroller altid batteriene og udskift dem eventuelt inden en evt. reklamation.
- Anvend kun de samme eller lignende batterier.
- Alle batterier skal altid udskiftes samtidigt.
- Der må ikke anvendes genopladelige batterier!
- Batterier må aldrig skilles ad, åbnes eller knuses.
- De brugte, helt afladde batterier skal bortsaffaffes i de særligt mærkede opsamlingsbehældere, som findes på genbrugspladser og hos forhandlere af elapparater. Ifølge loven er der forpligtet til at bortsaffa batterierne.
- Denne symboler finder du på batterier med skadelige stoffer: Pb = batteriet indeholder bly, Cd = batteriet indeholder cadmium, Hg = batteriet indeholder kviksolv.
- Med henblik på at beskytte miljøet må apparatet ikke bortsaffaffes sammen med husholdningsaffaldet, når det skal kasseres. Bortsaffafelse kan ske på det pågældende lokale indsamlingssted. Apparatet skal bortsaffaffes i henhold til EU-direktivet vedrørende elektronisk affald - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Henved dig til din kommunens tekniske forvaltning, hvis du har andre spørgsmål.
- Bærevennen er maks. 180 kg (396 lb / 28 st), Inddeling 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- Rengøring: Du kan rengøre vægten med en opvredet frugtfri klud. Vægten må ikke holdes under vand og må aldrig vaskes under rindende vand.
- Beskyt vægten mod stød, fugt, stov, kemikalier, stærke temperatursvingninger, elektromagnetiske felter og for nære varmekilder.
- Stå aldrig op på den yderste kant af den ene side på vægten: Vippefare!

GARANTI

Nærmere oplysninger om garantien og garantibetingelserne findes i det medfølgende garantihæfte.

Med forbehold for fejl og ændringer

SV Allmänna anvisningar



Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, spara den för framtida användning, se till att den är tillgänglig för andra användare och följ anvisningarna.

Teckenförklaring

	VARNING	Varningsinformation om skaderisker eller hälsorisker.
	OBS!	Säkerhetsinformation om risk för skador på produkt/tillbehör.
	Läs bruksanvisningen	
	Märkning för identifiering av förpackningsmaterial. A = materialförkortning, B = materialnummer: 1-7 = plast, 20-22 = papper och kartong	

	Sortera förpackningskomponenterna och avfallshantera dem i enlighet med de kommunala föreskrifterna.
	Separera produkten och förpackningskomponenterna och avfallshantera enligt kommunala föreskrifter.
	Avfallshantera produkten enligt EG-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE
	Batterier ska inte kasseras som hushållsavfall
	Tillverkare
	Denna produkt uppfyller kraven i gällande europeiska och nationella riktlinjer.
	UKCA-märke
	Produkterna har bevisats uppfylla kraven i EA-EU:s tekniska regelverk.

WARNING

- Håll barn borta från förpackningsmaterialet!
- Ej avsedd för yrkesmässig användning.
- Skulle du ha ytterligare frågor om användningen av våra produkter, kontakta din återförsäljare eller kundservice.
- Reparationer får endast utföras av vår kundservice eller våra auktoriserade återförsäljare.

Anvisningar för hantering av batterier

- Om vätska från battericeller kommer i kontakt med hud eller ögon ska de berörda ställena sköljas med vatten. Uppsök läkarvärd.
- Risk för svälning!** Små barn kan svälja batterier, vilket kan orsaka kvävning. Förvara därför batterier oåtkomligt för små barn!
- Lägg märke till polsymbolerna plus (+) och minus (-).
- Om ett batteri läcker ska batterifacket rengöras med en torr trasa. Skyddshandskar ska bäras vid rengöringen.
- Utsätt inte batterierna för höga temperaturer.
- Explosionsrisk!** Kasta inte batterier i öppen eld.
- Batterier får inte laddas upp eller kortslutas.
- Om produkten inte ska användas under längre tid ska batterierna tas ut från batterifacket.
- Testa alltid batterierna och byt vid behov ut dem före en eventuell reklamation.
- Använd enbart samma eller en motsvarande batterityp.
- Byt ut alla batterier samtidigt.
- Använd inte uppladdningsbara batterier!
- Batterierna får inte öppnas eller tas isär.
- De förbrukade, helt urladdade batterierna ska kasseras separat i speciellt märkta insamlingsbehållare eller lämnas tillbaka till affären. Batterier ska enligt lag kasseras på särskilt vis.
- Följande teckenkombinationer förekommer på batterier som innehåller skadliga ämnen: Pb = batteriet innehåller bly, Cd = batteriet innehåller kadmium, Hg = batteriet innehåller kvicksilver.



Pb Cd Hg

- När produkten har tjänat ut får den av hänsyn till miljön inte slängas bland det vanliga hushållsavfallet. Lämna den i stället till en återvinningscentral. Produkten ska avyttras i enlighet med EG-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE. Om du har frågor som rör avfallshantering kan du vända dig till ansvarig kommunal myndighet.
- Kapacitet max. 180 kg (396 lb / 28 st), Noggrannhet 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- Rengöring: Du kan rengöra vågen med en fuktad, luddfri trasa. Säck aldrig ner vågen i vatten. Spola aldrig av den under rinnande vatten.
- Skydda vågen mot stötar, fukt, damm, kemikalier, kraftiga temperaturväxlingar, elektromagnetiska fält och alltför nära värmekällor.
- Trampa aldrig på den yttersta kanten på ena sidan av vågen: Risk att den tippar!

GARANTI

Mer information om garantin och garantivillkoren hittar du i den medföljande garantifoldern.

Med reservation för fel och ändringar

NO Generelle merknader



Les nøye gjennom denne bruksanvisningen, oppbevar den for senere bruk, sorg for at den er tilgjengelig for andre brukere, og følg instruksjonene.

Tegnforklaring

	ADVARSEL	Advarsel mot fare for personskader eller helsefarer.
	OBS	Det gjøres oppmerksom på mulige skader på apparat/tilbehør.
		Les bruksanvisningen
		Merking for å identifisere emballasjematerialet. A = materialforkortelse, B = materialnummer: 1-7 = kunststoff, 20-22 = papp og papir
		Skill emballasjekomponentene og kast dem i henhold til lokale forskrifter.
		Skill produktet og emballasjekomponentene, og kast dem i henhold til gjeldende bestemmelser.
		Avhendes i samsvar med EF-direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
		Ikke kast batterier som inneholder farlige stoffer i vanlig husholdningsavfall <small>Pb Cd Hg</small>
		Produsent
		Dette produktet oppfyller alle kravene i de gjeldende europeiske og nasjonale direktivene.
		Samsvarsverderingsmerke fra Storbritannia



Produktene oppfyller kravene i EAWUs tekniske forskrifter.

ADVARSEL

- Barn må holdes unna emballasjematerialet!
- Vekten er kun ment for personlig bruk, og er ikke tiltenkt for medisinsk eller yrkesmessig bruk!
- Hvis du har andre spørsmål angående bruken av et av våre produkter, kan du henvende deg til forhandleren din eller kundeservicen.
- Reparasjoner skal kun utføres av kundeservice eller en autorisert forhandler.


Instruksjoner for bruk av engangsbatterier

- Hvis væske fra battericeller kommer i kontakt med hud eller øyne, må det berørte området skylles med vann og lege oppsøkes umiddelbart.
- Fare ved svele!** Småbarn kan svele batteriene og kveles. Oppbevar derfor batteriene utilgjengelig for småbarn!
- Vær oppmerksom på polindikatorene pluss (+) og minus (-).
- Hvis et batteri lekker, må du bruke vernehansker og rense batteriommet med en torr klut.
- Beskytt batteriene mot for sterk varme.

Eksplosjonsfare!

- Ikke kast batterier på åpen ild.
- Batterier må ikke lades opp eller kortsluttes.
- Ta batteriene ut av batteriommet hvis apparatet ikke skal brukes på en stund.
- Test/bytt ut batteriene før du foretar en reklamasjon.
- Bruk bare den samme eller en tilsvarende batteritypen.
- Skift alltid ut alle batteriene samtidig.
- Ikke bruk oppladbare batterier!
- Ikke demonter, åpne eller knus batteriene.
- De utbrukte, helt utladte batteriene må kasseres via spesielle godkjente samlebeholderer, mottak for spesialavfall eller via den elektriske forretningen. Du er lovmedig forpliktet til å kaste batteriene på en miljømessig forsvarlig måte.

- Disse tegnene finnes på batterier som inneholder skadelige stoffer: Pb = batteriet inneholder bly, Cd = batteriet inneholder kadmium, Hg = batteriet inneholder kvikkosv.
- Av hensyn til miljøet skal det kasserte apparatet ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Kassering skal skje via aktuelle oppsamlingspunkter. Apparatet skal avhendes i henhold til WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ved spørsmål må du henvende deg til ansvarlige kommunale myndigheter.

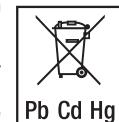

Pb Cd Hg

- Vekten måler opptil 180 kilo (396 lb / 28 st) i 50 grams (0,1 lb / 0,005 st) intervall.
- Reinigung: Du kan rengjøre skalaen med en fuktig klut. Aldri dypp vekten i vann. Vekten skal heller aldri skylles under rennende vann.
- Beskytt vekten mot støt, fuktighet, stov, kjemikalier, kraftige temperatursvingninger, elektromagnetiske felt og for nært plasserte varmekilder.
- Trå aldri ytterst på den ene siden av vekten: Vekten kan veite!

GARANTI

Du finner detaljert informasjon om garantien og garantivilkårene i det medfølgende garantiarket.

Med forbehold om feil og endringer

FI Yleisiä ohjeita



Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja noudata siinä annettuja ohjeita. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta ja laitteen muita käyttäjiä varten.

Merkkien selitykset

	VAROITUS	Varoitus loukkaantumisvaaroista tai terveyttä uhkaavista vaaroista.
	HUOMIO	Turvallisuusohje mahdollisista laitteellelisävarusteille aiheutuvista vaarioista.
	Lue käyttöohje.	
	Pakkauksamateriaalin tunnistusmerkintä. A = materiaalin lyhenne, B = materiaalinumero: 1–7 = muovit, 20–22 = paperi ja pahvi	
	Irrota pakkauksen osat ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti.	
	Irrota pakkauksen osat tuotteesta ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti.	
	Hävitä laite EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkalaiteron mukaisesti – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).	Pb Cd Hg
	Vaarallisia aineita sisältäviä paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.	
	Valmistaja	
	Tämä tuote täyttää voimassa olevien eurooppalaisten ja kansallisten määräysten vaatimukset.	
	Ison-Britannian vaatimustenmukaisuuden arvointimerkintä	
	Tuotteet ovat todistettavasti yhdenmukaisia Euroopan talousunionin teknisten standardien kanssa.	

VAROITUS

- Älä jätä pakkauksamateriaalia lasten ulottuville!
- Laite on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön.
- Jos haluatte kysyä lisää laitteenemme soveltamisesta, käänny myyjän tai asiakaspalvelun puoleen.
- Korjauksesta saa tehdä vain asiakaspalvelu tai valtuuttettu myyjä.

Paristojen käsitellyn liittyvät ohjeet

- Jos paristosta vuotava neste joutuu kosketukseen ihon tai silmien kanssa, huuhteile altistunut kohta vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.
- Tukehtumisvara!** Pieni lapsi saattaa nielaista pariston ja tukehtua. Säilytä siksi paristot pienesten lasten ulottumattomissa!
- Tarkista napaisuusmerkinnät plus (+) ja miinus (-).

- Jos paristosta on vuotanut nestettä, käytä suojakäsineitä ja puhdista paristokoteloa kuivalla liinalla.
- Älä altista paristoa liialliselle lämmölle.
- Rajähdyssvaro!** Paristoja ei saa heittää tuleen.
- Paristoja ei saa ladata tai kytkeä oikosulkuun.
- Poista paristot paristokotelosta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikana.
- Ennen reklamaation tekemistä tarkista ensin paristot ja vaihda ne tarvittaessa.
- Käytä aina samanlaisia tai samantyyppisiä paristoja.
- Vaihda kaikki paristot aina samanaikaisesti.
- Älä käytä uudelleenladattavia paristoja!
- Paristoja ei saa purkaa, avata tai rikkota.
- Hävitä käytetty, täysin tyhjät paristo viemällä ne paikalliseen paristonkeräys- tai ongelmajätteistöseen tai toimittamalla ne elektroniikkaliikeeseen hävitettäväksi. Laki edellyttää, että paristot hävitetään asianmukaisella tavalla.
- Ympäristöllöihin haitallisissa paristoissa on seuraavia merkintöjä: Pb = paristo sisältää lyijyä, Cd = paristo sisältää kadmiumia, Hg = paristo sisältää elohopeaa.
- Kun laitteen käyttöökkä on päättynyt, laitetta ei saa ympäristöstystä hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Hävitä käytöstä poistettu laite viemällä se asianmukaiseen keräys- ja kierätyspisteesseen. Laite tulee hävittää EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkaroumaa koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti. Saat lisätietoja paikallisilta jättehuoltoviranomaisilta.
- Kantavuus enintään 180 kg (396 lb / 28 st), Näytöväli 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- Puhdistus: Voit puhdistaa vaa'an kostutetulla, nukkamattomalla liinalla. Älä koskaan upota vaakaa veteen. Älä koskaan huuhtele vaakaan juoksevan veden alla.
- Suojaa vaaka iskuilta, kosteudelta, pölyltä, kemikaaleilta, voimakkalta lämpötilanvaihtelulta, elektromagneettisilta kentiltä ja suorilta lämmönlähteiltä.
- Seiso aina keskellä vaakaa, älä vain toisella reunalla: kaatumisvara!

TAKUU

Tarkempia tietoja takuusta ja takuuuhdoista löytyy mukana toimitetusta takuulomakkeesta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin emmekä vastaa mahdollisista virheistä

CS Obecné pokyny



Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschováního pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a říde se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Vysvětlení symbolů

	VAROVÁNÍ	Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrození zdraví.
	POZOR	Bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/příslušenství.
	Přečtěte si návod k použití.	

	Štítek pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka
	Součásti obalu roztržte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Produkt a součásti obalu roztržte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE)
	Baterie s obsahem škodlivých látek nepatří do domovního odpadu
	Výrobce
	Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic
	Označení posouzení shody pro Spojené království
	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.

VAROVÁNÍ

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí!
- Není určeno pro komerční použití.
- Pokud bude mít další dotazy k používání našich přístrojů, obrátěte se prosím na Vašeho prodejce nebo na zákaznický servis.
- Opravy mohou provádět jen zákaznické servisy nebo autorizovaní obchodníci.

Pokyny pro zacházení s bateriemi

- Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře!
- Nebezpečí spolknutí!** Malé děti by mohly baterie spolknout a udusit se. Baterie proto uchovávejte mimo dosah dětí!
- Dbejte na označení polarity plus (+) a minus (-).
- Pokud baterie vytče, použijte ochranné rukavice a vypočítejte příhrádku na baterii suchou utěrkou.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem.
- Nebezpečí výbuchu!** Baterie nevhazujte do ohně.
- Baterie nesmí být nabijeny nebo zkratovány.
- V případě, že nebudeste přístroj delší dobu používat, vymějte baterie z příhrádky na baterie.
- Před každou reklamací nejdříve zkontrolujte baterie a případně je vyměňte.
- Používejte stejný nebo rovnocenný typ baterii.
- Vyměňujte vždy všechny baterie zároveň.
- Nepoužívejte dobíjecí akumulátory!
- Baterie se nesmí rozebírat, otevřít nebo drtit.
- Použijte, zcela vybité baterie se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrnách pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni baterie likvidovat.

- Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nachází následující značky: Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmiump, Hg = baterie obsahuje rtuť.
- V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.
- Zatížitelnost je max. 180 kg (396 lb / 28 st), Dělení 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- Čištění: Váhu můžete čistit navlhčenou utěrkou nepouštějící vlákná. Nikdy neponořujte váhy do vody. Nikdy je také neoplaňujte pod teplou vodou.
- Váhu chráňte před nárazy, vlnkostí, prachem, chemikály, silnými teplotními výkyvy, elektromagnetickými poli a blízkými tepelnými zdroji.
- Nestopejte z jedné strany na samý okraj váhy: nebezpečí pěvřhnutí!

ZÁRUKA

Další informace o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.

Chyby a změny vyhrazeny

SL Splošní napotki



Pozorno preberite ta navodila za uporabo. Nato jih shranite za poznejsjo uporabo, omogočite dostop do njih tudi drugim uporabnikom in upoštevajte napotke.

Razlagi simbolov

	OPOZORILO	Opozorilo o nevarnosti poškodb ali nevarnosti za zdravje.
	POZOR	Varnostno opozorilo o možnosti nastanka poškodb na napravi/dodatkih.
	Preberite navodila za uporabo.	
	Označevanje za identificiranje embalažnega materiala. A = okrajšava materiala, B = številka materiala: 1-7 = plastike, 20-22 = papir in lepenka	
	Ločite komponente embalaže in jih zavritez v skladu z lokalnimi predpisi.	
	Ločite izdelek in komponente embalaže ter jih odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.	
	Napravo odstranite v skladu z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi – WEEE	
	Baterij, ki vsebujejo škodljive snovi, ne smete zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.	

	Proizvajalec
	Ta izdelek izpoljuje zahteve veljavnih evropskih direktiv in nacionalnih predpisov.
	Oznaka ugotovljene skladnosti Združenega kraljestva
	Izdelki preverljivo izpoljujejo zahteve tehničnih predpisov EAWU.

OPOZORILO

- Ne dovolite stika otrok s pakirnim materialom!
- Ni za gospodarske namene.
- Če imate kakšna vprašanja glede uporabe naše naprave, se prosimo obrnite na našega zastopnika ali na servisno službo družbe.
- Popravila se smejo opravljati le v servisni službi ali pri pooblaščenih trgovcih.

Napotki za ravnanje z baterijami

- Če tekočina iz baterijske celice pride v stik s kožo ali očmi, prizadeta mesta sperite z vodo in obišcite zdravnika.
- **Nevarnost zadušitve!** Majhni otroci lahko pogoltejo baterije in se zaradi tega zadušijo. Zato baterije hranite na mestu, kjer jih majhni otroci ne morejo doseči!
- Bodite pozorni na znak polarnosti plus (+) in minus (-).
- Ob razlitju baterije si nadenite zaščitne rokavice in predalček za baterije očistite s suho krpo.
- Baterije zaščitite pred previsoko temperaturo.
- **Nevarnost eksplozije!** Baterij ne mečite v ogenj.
- Baterij ni dovoljeno polniti ali na njih povzročiti kratkega stika.
- Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije iz predalčka.
- Pred vsako reklamacijo najprej preverite baterijske vložke, in jih po potrebi zamenjajte.
- Uporabite le enake baterije ali baterije enakovrednega tipa.
- Vedno zamenjajte vse bateriji hrdati.
- Ne uporabljajte akumulatorskih baterij.
- Baterij ne razstavljaljite, odprije ali stiskajte.
- Izrabljene in popolnoma izpraznjene baterije je treba odstraniti v posebne označene zbiralnike, na zbirna mesta za nevarne odpadke ali pri trgovcih z elektronskimi in električnimi napravami. Zakonsko ste zavezani k pravilnemu odstranjevanju baterij.
- Na baterijah, ki vsebujejo škodljive snovi, so te oznake: Pb = baterija vsebuje svinec, Cd = baterija vsebuje kadmij, Hg = baterija vsebuje živo srebro.
- Ko naprava ni več uporabna, je zaradi varovanja okolja ne smete zavreči med gospodinjske odpadke. Odstranite jo na ustreznih zbirališčih za predelavo odpadkov v svoji državi. Napravo odstranite v skladu z Direktivo ES o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na pristojno komunalno podjetje.
- Maksimalna obremenitev znaša 180 kg (396 lb / 28 st). Razdelitev 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- Čiščenje: Tehnico lahko očistite z navlaženo krpo, ki ne pušča vlaken. Nikoli ne potapljaljte tehnicne v vodo. Nikoli je ne perite pod tekočo vodo.
- Zaščitite tehnicno pred udarci, vlagi, prahom, kemikalijami, velikimi temperaturnimi nihanji, elektromagnetnimi polji in v bližini se nahajajočih virov toplotne.

• Nikdar ne stopite enostransko na zunanjji rob tehnicne: lahko se prekucnete!

GARANCIJA

Dodatevne informacije o garanciji in garancijskih pogojih najdete v priloženi garancijski zloženki.

Pridržujemo si pravico do napak in sprememb

HU Általános utasítások



Figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót, és tartsa be a benne foglalt utasításokat. Örizze meg az útmutatót későbbi használatra, és tegye azt más használók számára is hozzáérhetővé.

Jelmagyarázat

	FIGYELMEZTETÉS	Sérülésveszélyre vagy egészségkárosodás veszélyére figyelmeztető információ.
	FIGYELEM	Biztonsági megjegyzés a készülék/tartozékok lehetséges károsodására vonatkozóan.
	Olvassa el a használati útmutatót	
	Jelölés a csomagolóanyag azonosításához. A = anyag rövidítése, B = anyagszám: 1-7 = műanyagok, 20-22 = papír és karton	
	Válassza szét a csomagolóelemeket, és ártalmatlanítsa azokat a helyi előírásoknak megfelelően.	
	Válassza szét a terméket és a csomagolóelemeket, és ártalmatlanítsa azokat a helyi előírásoknak megfelelően.	
	Ártalmatlanítás az Európai Unió elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) irányelvre szerint	
	A veszélyes anyagot tartalmazó elemeket nem szabad háztartási hulladékkel együtt kezelní.	
	Gyártó	
	A termék eleget tesz az érvényes európai és nemzeti irányelteknek.	
	UKCA-jelölés (UKCA = UK Conformity Assessed)	
	A termékek igazolhatóan megfelelnek az EAWU műszaki előírásainak.	

FIGYELMEZTETÉS

- A csomagolóanyagot gyermekeltől tartsa távol!
- Nem üzleti célú alkalmazásra készült.
- Amennyiben készülékeink használatával kapcsolatban kérdései merülnek fel, kérjük, forduljon kereskedőjéhez vagy a ügyfélszolgálati irodájához.

- A javítást csak szakszerviz vagy arra felhatalmazott kereskedő végezheti.

⚠ Az elemekkel kapcsolatos figyelmeztetések

- Ha az elemcella folyadéká a bőrre vagy a szembe jut, az érintett területet öblítse le vízzel és forduljon orvoshoz.
- ⚠ Fennáll a lenyelés veszélye!** A kisgyermeknek az elemeket lenyelhetik és azok kifordítottan okozhatnak. Ezért tartha az elemeket kisgyermekktől elzárt helyen!
- Ügyeljen a pozitív (+) és negatív (-) polaritásra.
- Ha az elem kifolyt, akkor húzzon védőkesztyűt, majd száraz ruhával alaposan tisztítsa meg az elemtártót.
- Védje az elemeket a tüzelőtől hőtől.
- ⚠ Robbanásveszély!** Ne dobja az elemeket tűzbe.
- Az elemeket nem szabad utántölteni, vagy rövidre zární.
- Ha hosszabb időn keresztül nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket az elemtártóból.
- Minden reklámáció előtt ellenőrizze az elemeket, és szükség esetén cserélje ki őket.
- Csak ugyanazt vagy egyenértékű elemtípust használjon.
- Az elemet mindenkor egyidejűleg cserélje ki.
- Ne használjon akkumulátorokat!
- Az elemeket nem szabad szétszedni, kinyitni vagy feldarabolni.
- Az elhasznált, teljesen lemerült elemeket a külön megjelölt gyűjtőtartályokba helyezve, gyűjtőhelyeken vagy az elektromos boltokba leadva ártalmatlanítsa. Az elemek ártalmatlanítására törvény kötelezi.
- A káros anyagot tartalmazó elemeket a következő jelölések szerepelnek: Pb = az elem ólomt tartalmaz, Cd = az elem kadmiumot tartalmaz, Hg = az elem higanyt tartalmaz.
- A környezet védelme érdekében a készüléket az élettartama után nem szabad a háztartási hulladék közé dojni. Az ártalmatlanítást az Őr szolgálatnak megfelelő gyűjtőhelyein kell elvégzni. A készüléket az Európai Uniónak az elhasználódott elektromos és elektronikus készülékek vonatkozó – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelvre szerint ártalmatlanítja. Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.
- Terhelhetőség max. 180 kg (396 lb / 28 st), Dokladność 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- Tisztítás: A mérleget egy megnevezített, nem bolyhozódó kendővel tisztíthatja meg. A mérleget sose merítse vízbe, és sose öblítse le folyó víz alatt!
- Óvjá a mérleget az ütődésekkel, a nedvességtől, a porral, a vegyszerekkel, az erős hőmérséklet-ingadozástól, az elektromágneses mezőktől és a túl közeli hőforrásoktól.
- Soha ne álljon a mérleg egyik külső peremére: borulásveszély!

GARANCIA

A garanciával és a garanciális feltételekkel kapcsolatos bővebb tájékoztatást a mellékelt jóllással brosúrában talál.

Tévedések és változtatások jogá fenntarta

RO Indicări generale



Citii cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consulta-re ulterioară, puneti-le la dispoziția altor utilizatori și respectați indicațiile.

Explicația simbolurilor

	AVERTIZARE	Indicație de avertizare privind pericolele de vătămare sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră.
	ATENȚIE	Indicație de siguranță privind posibile defecțiuni ale aparatului/accesoriilor.
	Citii instrucțiunile de utilizare	
	Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare. A = Abrevierea pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton	
	Separati componente ambalajului și eliminați-le conform reglementărilor locale.	
	Separati produsul și componente ambalajului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.	
	Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice	
	Nu eliminați la gunoiul menajer bateriile care conțin substanțe nocive Pb Cd Hg	
	Producător	
	Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.	
	marcaj de evaluare a conformității pentru Regatul Unit	
	S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE).	

⚠ AVERTIZARE

- Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor!
- Aparatul este indicat pentru uz propriu și nu pentru uz medical sau comercial!
- În cazul în care aveți întrebări cu privire la utilizarea aparatelor noastre, vă rugăm să vă adresați comerciantului sau serviciului pentru clienti.
- Reparațiile trebuie efectuate doar de personalul serviciului pentru clienti sau de comercianții autorizați.
- ⚠ Indicații privind manipularea bateriilor**
- Când lichidul din celula bateriei intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locurile afectate cu apă și căutați ajutor de specialitate.
- ⚠ Pericol de înghițire!** Copiii pot înghiții bateriile și se pot asfixia. De aceea, nu păstrați bateriile la îndemâna copiilor!
- Respectați marcajele de polaritate Plus (+) și Minus (-).
- Dacă bateria s-a scurs, puneti-vă mănuși de protecție și curățați compartimentul pentru baterii cu o cârpă uscată.
- Protejați bateriile de căldura excesivă.
- ⚠ Pericol de explozie!** Nu aruncați niciodată baterie în foc.
- Bateriile nu trebuie să fie încărcate sau scurtcircuite.

- În cazul în care aparatul nu este utilizat o perioadă îndelungată, scoateți bateriile din compartimentul pentru baterii.
- Înainte de a înainta o reclamație, verificați funcționarea bateriilor și înlăcuți-le dacă este nevoie.
- Utilizați numai același tip de baterie sau un tip de baterie cu aceeași valoare.
- Înlăcuți întotdeauna toate bateriile simultan.
- Nu utilizați acumulatori!
- Nu dezasamblați, deschideți sau rupeți bateriile.
- Bateriile uzate, complet goale trebuie eliminate în recipientele de colectare special marcate, la firmele specializate sau la comerciantul de electrice. Aveți obligația legală să eliminați bateriile ca deșeu.
- Bateriile care conțin substanțe toxice prezintă acesti simboluri: PB = bateria conține plumb, Cd = bateria conține cadmiu, Hg = bateria conține mercur.
- În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoiul menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.
- Sarcina admisă a căntarului este de maxim 180 kg (396 lb / 28 st), divizare 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- Curătarea: Căntarul poate fi curătat cu o cârpă umedă, fără scame. Nu spălați niciodată căntarul în apă. Nu spălați niciodată căntarul sub jet de apă.
- Feriți căntarul de șocuri, umiditate, praf, substanțe chimice, fluctuații puternice de temperatură, câmpuri electromagnetice și surse de căldură prea apropiate.
- Nu vă urcați niciodată pe căntar pe marginea exteroară a căntarului: Pericol de cădere!

GARANȚIE

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.

Ne rezervăm drepturile asupra erorilor și modificările

SK Všeobecné upozornenia



Starostlivo si prečítajte tento návod na použitie, uschovajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

Vysvetlenie symbolov

	VÝSTRAHA	Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia.
	POZOR	Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve.
		Prečítajte si návod na použitie
		Štítok pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 - 7 = plast, 20 - 22 = papier a lepenka

	Oddelite obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Oddelite výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Likvidácia v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Baterie nevyhodzujte do komunálneho odpadu
	Výrobca
	Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	Značka posúdenia zhody Spojeného kráľovstva
	S-a demonstrat că produsele îndeplinește cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Euraſiatice (UEE).

⚠️ VÝSTRAHA

- Obal uchovávajte mimo dosahu detí!
- Nie je určená pre komerčné využitie.
- V prípade otázok týkajúcich sa použitia našich prístrojov sa prosím obrátte na vášho predajcu alebo na zákaznícky servis.
- Opravy môže vykonávať len zákaznícky servis alebo autorizovaní predajcovia.

⚠️ Upozornenia týkajúce sa manipulácie s batériami

- Ak dojde ku kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto vymyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

⚠️ Nebezpečenstvo prehlutnia!

Malé deti by mohli batérie prehltnúť a zadusiť sa nimi. Z tohto dôvodu skladujte batérie mimo dosahu malých detí!

- Dbajte na označenie polarity plus (+) a minus (-).
- Ak batéria vytečie, nasadte si ochranné rukavice a prie-hradku na batéria vyčistite suchou handričkou.
- Batéria chráňte pred nadmerným teplom.

⚠️ Nebezpečenstvo výbuchu!

Batéria nikdy nehádzte do ohňa.

- Batéria sa nesmú nabijať alebo skratovať.
- Keď prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte batéria z prie-hradky na batéria.

⚠️ Pred každou reklamáciou najskôr skontrolujte batéria a v prípade potreby ich vymenťte.

- Používajte iba rovnaký alebo rovnocenný typ batérií.
- Vždy vymenťte všetky batérie naraz.

⚠️ Nepoužívajte akumulátory!

- Batéria nerazoberajte, neotvárajte ani nedrvte.
- Použité úplne vybité batérie musíte likvidovať vložením do špeciálne označených zbernych nádob, odovzdáním na zbernych miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo zákona máte povinnosť batérie zlikvidovať.
- Na batériach obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky: Pb = batéria obsahuje olovu, Cd = batéria obsahuje kadmiu, Hg = batéria obsahuje ortút.





يرجى قراءة دليل الاستعمال هذا بعناية، واحرص على حفظه لغرض الاستخدام اللاحق مع ضرورة تسليمه للمستخدمين الآخرين وكذلك مراعاة الإرشادات الواردة به.

شرح الرموز

 إرشاد تحذيري يشير إلى أخطار الإصابة أو إلى أخطار تهدد صحتك.	تحذير
 إرشاد للسلامة يشير إلى إمكانية حدوث أضرار بالجهاز / الملحقات التكميلية.	تنبيه
 اقرأ دليل الاستعمال	
 علامة لتحديد هوية مادة العبوة. B = رقم المادة ، اختصار المادة A = البلاستيك، 20-22 = الورق والkarton = 1-7	
 افضل مكونات التغليف وتخالص منها وفقاً للوائح المحلية	
 افضل المنتج ومكونات التغليف وتخالص منها وفقاً للوائح المحلية	
 يتم التخلص من الجهاز طبقاً للتوجيه المجموعة الأوروبية - WEEE (التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة)	
 لا يجوز التخلص من البطاريات ضمن القمامات المنزلية	 Pb Cd Hg
 الشركة المنتجة	
 هذا المنتج يفي بمتطلبات التوجيهات الأوروبية والمحلية السارية.	
 علامة تقييم المطابقة للمملكة المتحدة	
 ثبت تطابق المنتجات مع متطلبات الضوابط الفنية للاتحاد الاقتصادي الأوروبي	



- بعد الأطفال عن مواد التغليف!
- الميزان غير مخصص لاستخدام التجاري.
- إذا كانت لديك استفسارات حول استخدام الجهاز الخاص بك، توجه من فضلك إلى الموزع الذي تتعامل معه أو إلى مركز خدمة العملاء.
- لا يجوز إجراء أعمال الإصلاحات إلا لدى مركز خدمة العملاء أو أحد المتأهل المعتمدة.



- إرشادات التعامل مع البطاريات
- إذا تلامس السائل الخارج من خلية البطارية مع الجلد أو العين، فينبعي عمل المنطقة المصابة بالماء وطلب المساعدة الطبية.
- خطر الانبعاث! قد يتبع الأطفال الصغار البطاريات ويختلقوا بها لأن الله. لذلك يجب حفظ البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال الصغار!
- انتبه إلى العلامات القطبية موجب (+) وسالب (-).
- إذا حدث تسرب من بطارية، فقم بارتداء قفاز واقٍ للأيدي وقم بتنظيف درج البطارية بمذيل جاف.

- V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zbernych miest vo vašej krajinie. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na mestny úrad zodpovedný za likvidáciu.
- Zátaženie predstavuje max. 180 kg (396 lb/28 st), hodnota dielika 50 g (0,1 lb /0,005 st).
- Čistenie: Váhu môžete čistiť navlhčenou utierkou nepúšťajúcou vlákna. Váhu nikdy neponárajte do vody. Nikdy ju neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Váhu chráňte pred nárazmi, vlnkostou, prachom, chemikáliami, veľkými teplotnými výkyvmi, pôsobením elektromagnetických polí a neskladujte ju blízko tepelných zdrojov.
- Nikdy nestúpajte iba na jednu vonkajšiu stranu váhy: Nebezpečenstvo prevrátenia!

ZÁRUKA

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v príloženom záručnom liste.

Chyby a zmeny vyhradené

- قم بحماية البطاريات من الحرارة المفرطة.
-  خطر الانفجار! لا تقم بالقاء البطاريات في النار.
- لا يجوز شحن البطاريات أو السماح بجحود دائرة القصر.
- في حالة عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة، قم بإخراج البطاريات من موضعها.
- قم بفحص البطاريات قبل أي شكوى، وقم بتغييرها إذا لزم الأمر.
- انتبه إلى العلامات القليلية موجبة (+) وسلبية (-).
- إذا حدث تسرب من بطارية، قم بارتداء قفاز واقٍ للأيدي وقم بتنظيف درج البطارية بمذيل جاف.
- قم بحماية البطاريات من الحرارة المفرطة.
-  خطر الانفجار! لا تقم بالقاء البطاريات في النار.
- لا يجوز شحن البطاريات أو السماح بجحود دائرة القصر.
- في حالة عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة، قم بإخراج البطاريات من موضعها.
- لا تستخدمني نفس نوع البطارية أو نوع بطارية مكافئ.
- قم دائمًا بتغيير جميع البطاريات في نفس الوقت.
- لا تستخدمني بطاريات قابلة لإعادة الشحن!
- لا تقم بفكك البطاريات أو فتحها أو كسرها.
- يجب عليك التخلص من البطاريات المستهلكة أو فارغة الشحنة تمامًا عن طريق إلقائها في حاويات مهملات مميزة يشكل خاص أو عن طريق تسليمها لمستودعات تجميع القامة الخاصة أو من خلال إرجاعها إلى متاجر الأجهزة الكهربائية. حيث أنك مطالب بالتخليص من البطاريات بموجب القانون.
- تجد هذه العلامات على البطاريات المحتونة على مواد ضارة:

 - 
Pb = بطارية تحتوي على الرصاص،
Cd = بطارية تحتوي على الكادميوم،
Hg = بطارية تحتوي على الزينق.
 - حافظ على البيئة لا يجوز التخلص من الجهاز بعد انتهاء عمره الافتراضي له ضمن القمامه المنزلية. يمكن التخلص من الجهاز من خلال تسليمه لمستودعات التجميع المعنية في بلدك.
 - تخلص من الأجهزة الكهربائية الأوروبية - WEEE (التخلص من الأجزاء الكهربائية والإلكترونية القديمة). في حالة وجود أي استفسارات توجه إلى الجهة المحلية المسؤولة عن التخلص من الأجهزة القديمة.
 - الحد الأقصى لقوة الحمل يبلغ 180 كجم (396 رطل) 28 حجر، التدرج 50 جرام (0,005 st) 0,1 lb.
 - التنظيف: يمكنك تنظيف الميزان باستخدام قطعة قماش خالية من الوبر ومبللة، ولا تقم بشطفه أبداً تحت ماء جار.
 - احرص على حماية الميزان من التعرض للصلصالات والرطوبة والأتربة والغبار والمواد الكيميائية والتقلبات الشديدة في درجات الحرارة والمحالات الكهرومغناطيسية وكذلك عدم وضعه بالقرب من مصادر الحرارة.
 - لا تoccusد أبداً من جانب واحد على الحافة الخارجية للميزان: خطر الانقلاب!
 - الصمام يمكن الإطلاع على معلومات أكثر تفصيلاً حول الصمام وشروط الصمام في منشور الصمام المرفق.

تاريسيغت مارج فحب ظفتجن امك ،أطخلاؤ وصلنا ادع ام

